



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ C+

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NON-DICOM VRPACS (V.2)

MỤC LỤC


I.	Đăng nhập hệ thống	3
1.1.	Lựa chọn trình duyệt	3
1.2.	Nhập địa chỉ hệ thống PACS	3
1.3.	Nhập thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập	3
1.4.	Cấu hình camera cho Nondiom (dành cho giao thức HTTP)	4
II.	Hệ thống NON-DICOM	5
2.1.	Bố cục giao diện	5
2.2.	Chức năng hệ thống	6
2.2.1.	Lọc ca chụp theo thiết bị (máy chụp)	6
2.2.2.	Lọc ca chụp theo trạng thái ca chụp	6
2.2.3.	Tìm kiếm ca chụp theo: Bác sĩ chỉ định, Chỉ định, Bộ phân chụp, Kết luận, Tên đoàn khám, Mã hồ sơ	7
2.2.4.	Tìm kiếm ca chụp theo: mã, họ tên, ngày chụp	7
2.2.5.	Chế độ hiển thị	8
2.2.6.	Xem thông tin, lịch sử ca chụp	9
2.2.7.	Đăng xuất	9
2.2.8.	Tính năng chuột phải	10
2.2.9.	Đổi mật khẩu	10
2.3.	Quy trình thực hiện một ca bệnh và trả kết quả	11

I. Đăng nhập hệ thống


1.1. Lựa chọn trình duyệt



1.2. Nhập địa chỉ hệ thống PACS

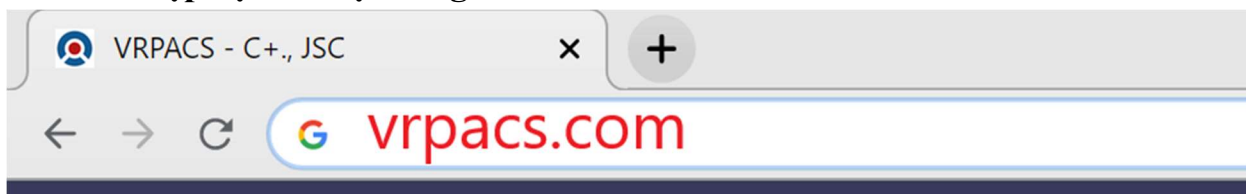

1.3. Nhập thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập

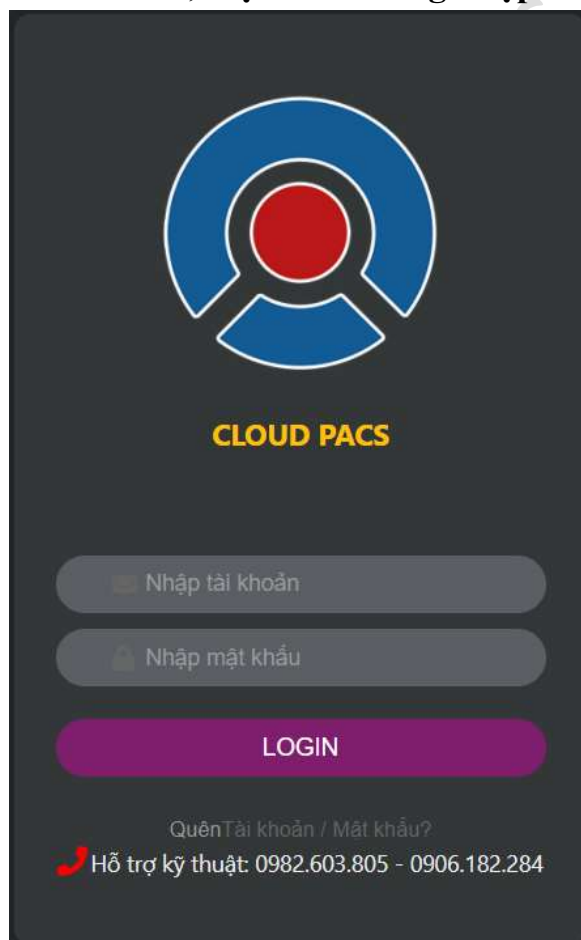


1.4. Cấu hình camera cho Nondiom (dành cho giao thức HTTP)


Nhập dòng sau: **chrome://flags** (dành cho trình duyệt chrome) hoặc **edge://flags**(dành cho trình duyệt edge) lên thanh địa chỉ.



Tìm kiếm tùy chọn: **Insecure origins treated as secure**

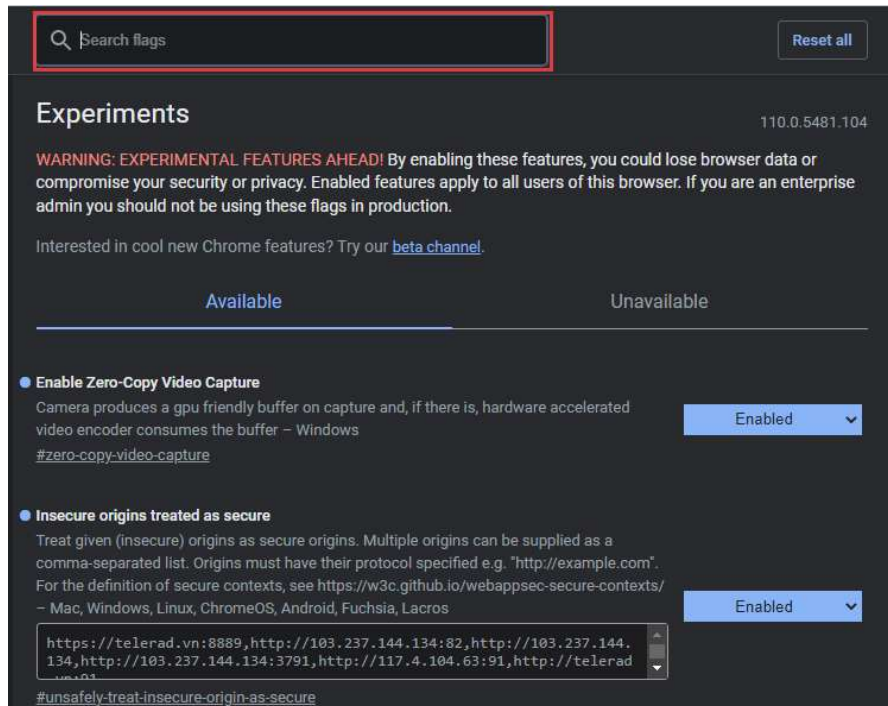


Nhập địa chỉ trang **Non-dicom** và chọn **Enabled** để trình duyệt chấp nhận và cho phép sử dụng camera từ máy.

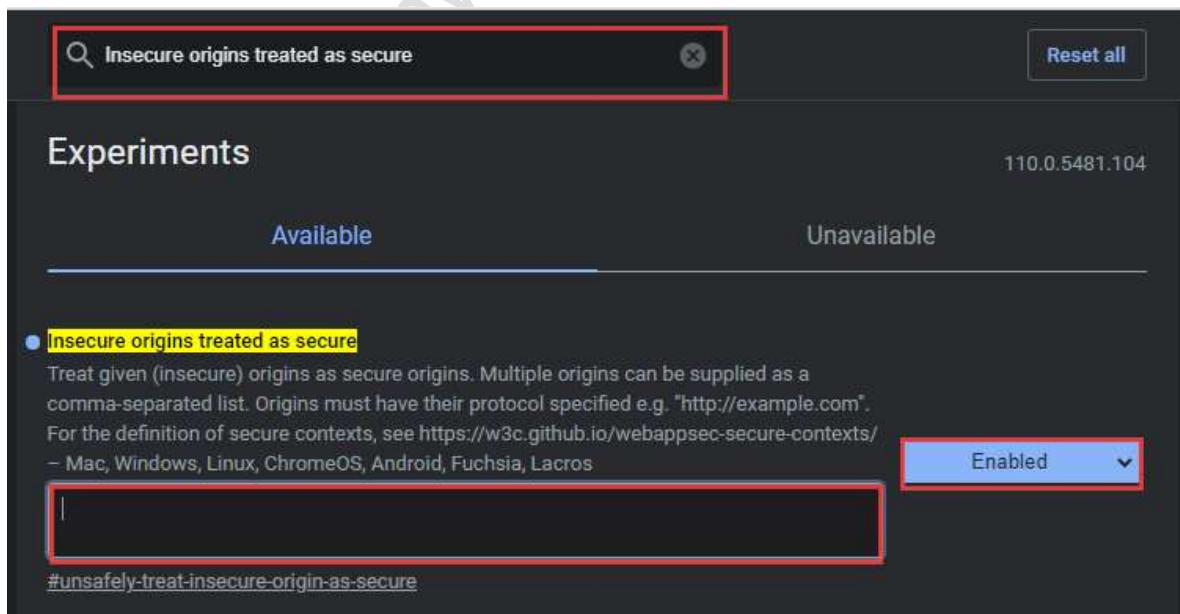

II. Hệ thống NON-DICOM




2.1. Bộ cục giao diện

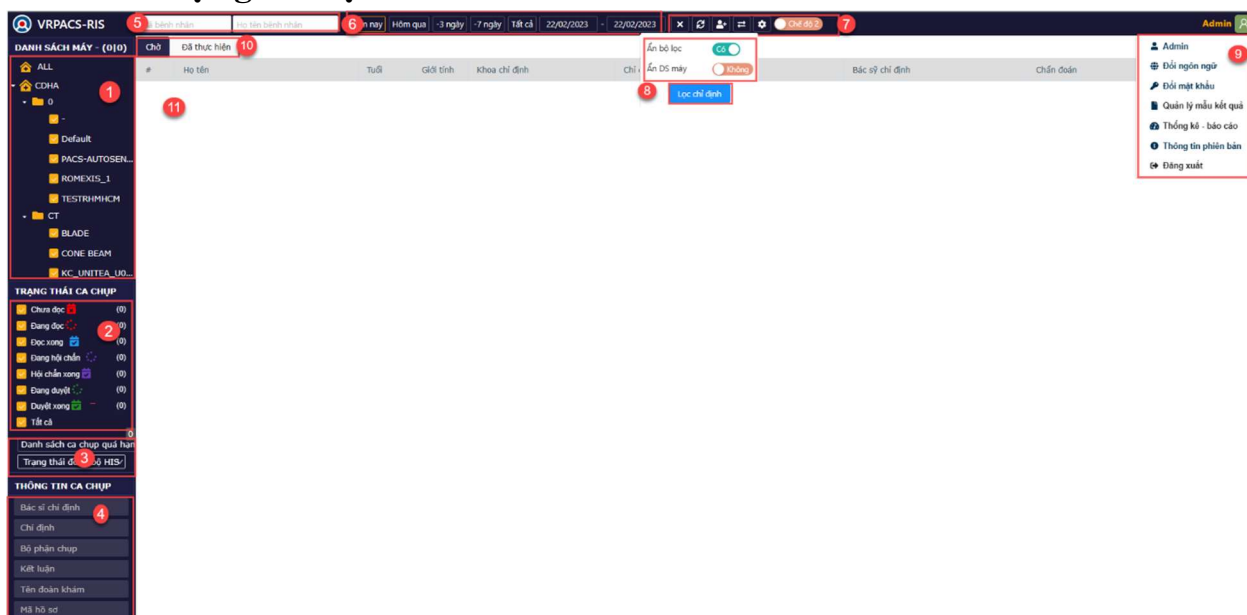

- 1) Các chức năng lọc các ca chụp theo máy chụp.
- 2) Các chức năng lọc các ca chụp theo trạng thái ca chụp: **chưa đọc, đang đọc, đọc xong, đang duyệt, duyệt xong** hoặc tất cả trạng thái.
- 3) Chức năng lọc theo trạng thái “**Danh sách ca chụp quá hạn**” và “**Trạng thái đồng bộ His**”
- 4) Các chức năng tìm kiếm ca chụp theo: “**Bác sĩ chỉ định**”, “**Chỉ định**”, “**Bộ phận chụp**”, “**Kết luận**”, “**Tên đoàn khám**”, “**Mã hồ sơ**”.
- 5) Các chức năng tìm kiếm ca chụp theo: Mã BN, họ tên.
- 6) Tìm kiếm theo mốc thời gian.
- 7) Các nút lệnh: “**Xóa lọc**”, “**làm mới**”, “**thêm bệnh nhân**”, “**cài đặt**”, “**tùy chỉnh chế độ hiển thị (chế độ 1/chế độ 2)**”.
- 8) Các tùy chỉnh “**Ẩn bộ lọc**”, “**Ẩn DS máy**”, “**Lọc chỉ định**”.
- 9) Các chức năng “**Đổi ngôn ngữ**”, “**Đổi mật khẩu**”, “**Quản lý mẫu kết quả**”, “**Thống kê - báo cáo**”, “**Thông tin phiên bản**”, “**Đăng xuất**”.
- 10) Tab danh sách “**Chờ**”, “**Đã thực hiện**” .
- 11) Danh sách bệnh nhân danh sách “**Chờ**”

2.2. Chức năng hệ thống

2.2.1. Lọc ca chụp theo thiết bị (máy chụp)

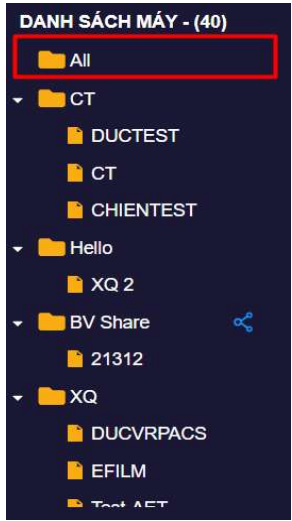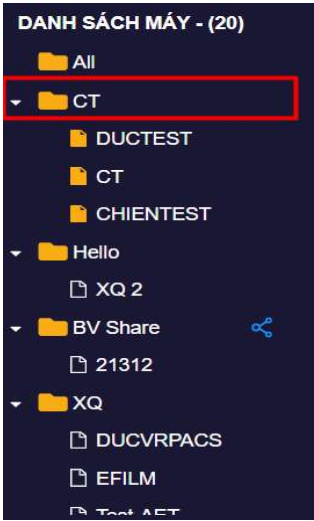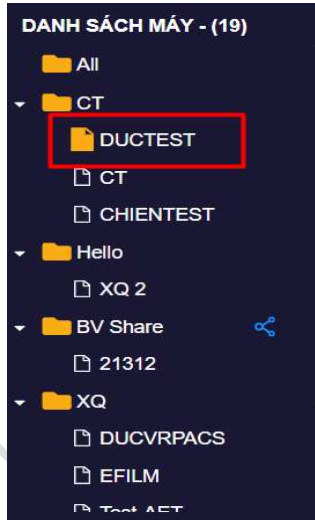Chọn tất cả các máy chụp vào bộ lọc	Chọn một nhóm các máy chụp vào bộ lọc	Chọn máy duy nhất vào bộ lọc
 DANH SÁCH MÁY - (40) - All - CT - DUCTEST - CT - CHIENTEST - Hello - XQ 2 - BV Share 21312 - XQ - DUCVRPACS - EFILM - Test AET	 DANH SÁCH MÁY - (20) - All - CT - DUCTEST - CT - CHIENTEST - Hello - XQ 2 - BV Share 21312 - XQ - DUCVRPACS - EFILM - Test AET	 DANH SÁCH MÁY - (19) - All - CT - DUCTEST - CT - CHIENTEST - Hello - XQ 2 - BV Share 21312 - XQ - DUCVRPACS - EFILM - Test AET

Chú ý: Lựa chọn bằng cách Click chuột trái.

2.2.2. Lọc ca chụp theo trạng thái ca chụp

Chọn trạng thái ca chụp cho bộ lọc	Thêm hoặc bỏ trạng thái ca chụp cho bộ lọc
 TRẠNG THÁI CA CHỤP ☒ Chưa đọc ☒ Đang đọc ☒ Đọc xong ☒ Đang duyệt ☒ Duyệt xong ☒ Tất cả	 TRẠNG THÁI CA CHỤP ☐ Chưa đọc ☐ Đang đọc ☐ Đọc xong ☐ Đang duyệt ☒ Duyệt xong ☐ Tất cả

2.2.3. Tìm kiếm ca chụp theo: Bác sĩ chỉ định, Chỉ định, Bộ phận chụp, Kết luận, Tên đoàn khám, Mã hồ sơ

THÔNG TIN CA CHỤP	
Bác sĩ chỉ định	
Chỉ định	
Bộ phận chụp	
Kết luận	
Tên đoàn khám	
Mã hồ sơ	

- Nhập “**Bác sĩ chỉ định**”.
- Nhập “**Chỉ định**” cần tìm (theo mã ICD)
- Nhập “**Bộ phận chụp**” cần tìm (theo Protocol của máy chụp)
- Nhập “**Kết luận**” (theo kết luận của bác sĩ đọc kết quả)
- Nhập “Tên đoàn khám” và “Mã hồ sơ”

2.2.4. Tìm kiếm ca chụp theo: mã, họ tên, ngày chụp

Mã bệnh nhân	Tên bệnh nhân	Hôm nay	Hôm qua	-3 Ngày	- 7 Ngày	Tất cả	13/08/2020	-	13/08/2021	x	↺
--------------	---------------	---------	---------	---------	----------	--------	------------	---	------------	---	---

- Nhập mã hoặc họ tên bệnh nhân cần tìm.
- Lựa chọn ngày chụp dịch vụ: hôm nay, hôm qua, -3 ngày....
- Lựa chọn ngày chụp cụ thể: từ thanh công cụ, có thể nhập trực tiếp từ bàn phím hoặc click chọn vào ô hiển thị ngày tháng.

Mã bệnh nhân	Tên bệnh nhân	Hôm nay	Hôm qua	-3 Ngày	- 7 Ngày	Tất cả	13/08/2020	-	13/08/2021	x	↺
--------------	---------------	---------	---------	---------	----------	--------	------------	---	------------	---	---

Lựa chọn ngày cần tìm: click vào ngày bắt đầu và click chọn ngày kết thúc.

Mã bệnh nhân	Tên bệnh nhân	Hôm nay	Hôm qua	-3 Ngày	- 7 Ngày	Tất cả	13/08/2020	-	13/08/2021	x	↺																																																	
Chờ	Đã thực hiện																																																											
#	##	Thông tin bệnh nhân	Máy chụp	Bác sĩ																																																								
<< < Aug 2020 > >> <table><tr><td>Su</td><td>Mo</td><td>Tu</td><td>We</td><td>Th</td><td>Fr</td><td>Sa</td></tr><tr><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td></tr><tr><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr><tr><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> Today												Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa																																																						
26	27	28	29	30	31	1																																																						
2	3	4	5	6	7	8																																																						
9	10	11	12	13	14	15																																																						
16	17	18	19	20	21	22																																																						
23	24	25	26	27	28	29																																																						
30	31	1	2	3	4	5																																																						

Hủy bỏ tìm kiếm

Mã bệnh nhân	Tên bệnh nhân	Hôm nay	Hôm qua	-3 Ngày	- 7 Ngày	Tất cả	13/08/2020	-	13/08/2021	x	↺
--------------	---------------	---------	---------	---------	----------	--------	------------	---	------------	---	---

Làm mới tìm kiếm, danh sách

Mã bệnh nhân	Tên bệnh nhân	Hôm nay	Hôm qua	-3 Ngày	- 7 Ngày	Tất cả	13/08/2020	-	13/08/2021	x	↺
--------------	---------------	---------	---------	---------	----------	--------	------------	---	------------	---	---

2.2.5. Chế độ hiển thị

Chế độ 1: Chế độ hiển thị tùy chọn

Giao diện hiển thị của chế độ 1, tại chế độ này sẽ phù hợp với các thiết bị có kích thước lớn

The screenshot displays the VRPACS-PIS interface in Mode 1. The top bar includes navigation tabs: "Vũ hình nhân", "Vũ hình bệnh nhân", "Hôm nay", "Hôm qua", "-3 ngày", "-7 ngày", "Tất cả", and date filters "24/05/2023" and "30/05/2023". A "Create" button is highlighted. The left sidebar shows a tree view of the system structure, including "DANH SÁCH MÁY - (0/3)", "ALL", "Bệnh viện Từ Dũ", "Hội chẩn", "Nội soi", "CDHA", "PHATHOLOGY", "PHATHOLOGY 1", "0", "Default", "PACS-AUTOSEN...", "ROMEXIS_1", "TESTRHHMCM", "CT", "BLADE", "KC_UNITEA_U001", "Máy Test123", "testindcm", "X-QUANG", "Demo Medi+", "HIS", "MÁY TEST222", "QUANH CHOP", "QUANH CHOP 01", and "SIRONA-PANOR...". The main area shows a table of patient data with columns: "#", "Trạng thái", "Thông tin bệnh nhân", "Thời gian", and "Bác sĩ chỉ định". The table lists three patients, with the third patient highlighted. The right panel displays detailed information for the selected patient, including "PACIENT TEST PIS - Chỉ định TEST GPB", "Danh sách chỉ định", "Kỹ thuật viên", "Mẫu kết quả", "Chỉ định", "Cá nhân", "Thời gian duyệt", "Kỹ thuật thăm khám", "Chẩn đoán: TEST chẩn đoán", "Mô tả hình ảnh", and a video feed.

Chế độ 2: Chế độ hiển thị mặc định

The screenshot displays the VRPACS-PIS interface in Mode 2. The top bar is similar to Mode 1, but the "Create" button is not highlighted. The left sidebar is identical. The main area shows a table of patient data with columns: "#", "Trạng thái", "Thông tin bệnh nhân", "Thời gian chụp", "Bác sĩ chỉ định", and "Chẩn đoán". The table lists three patients, with the third patient highlighted. The right panel displays detailed information for the selected patient, including "Thông tin bệnh nhân", "PACIENT TEST PIS - 24 - M", "Chỉ định: Chỉ định TEST GPB", "Kỹ thuật:", "Mô tả:", "Kết luận:", "Khuyến nghị:", and a video feed.

2.2.6. Xem thông tin, lịch sử ca chụp

Từ danh sách ca chụp, chúng ta click chọn vào ca chụp:

The screenshot displays the VRPACS-RIS interface. On the left, there's a sidebar with navigation options like 'DANH SÁCH MÁY - (0/26)', 'TRẠNG THÁI CA CHỤP', and 'THÔNG TIN CA CHỤP'. The main area shows a table of scans with columns for '#', 'Trạng thái', 'Thông tin bệnh nhân', 'Thời gian chụp', 'Bác sĩ chỉ định', and 'Chẩn đoán'. A specific scan is highlighted with a red box and a red circle '1'. To the right, a detailed view of the selected scan is shown, including patient information, scan details, and a conclusion. Red circles '2' and '3' highlight specific elements in the detailed view.

#	Trạng thái	Thông tin bệnh nhân	Thời gian chụp	Bác sĩ chỉ định	Chẩn đoán
18	ROMEXIS_1	TEST 1 22113081579909, F, 33	DX -	Le Van A	Viêm pte quan capz
19	Duyệt xong	SIRONA-PANOREX	17-11-2022 16:13	DX -	
20	Đang đọc	TEST DEFAULT 2211783866569, M, 44	16-11-2022 22:49	DX -	
21	Duyệt xong	TEST 22118913086934, M, 11	03-11-2022 09:48	DX -	23123
22	Đang đọc	TEST QR A220001634, M, 23	25-10-2022 11:37	CT -	S
23	Đang đọc	TEST QR A220001634, M, 23	25-10-2022 11:37	CT -	S
24	Duyệt xong	TEST QR A220001634, M, 23	25-10-2022 11:37	CT -	S
25	Đang đọc	VĂN TEST 2210008982, M, 123	10-05-2022 09:52	Lương Thị Thùy Hà (SOFH Phòng 120 (SA OB.))	
26	Đã in	SIRONA-PANOREX	11-02-2020 08:46	JPG -	

- 1) Thông tin ca chụp của BN tại danh sách.
- 2) Thông tin chi tiết của ca chụp: thông tin BN, mô tả, kết luận.
- 3) Lịch sử các ca chụp của bệnh nhân.
- 4) Các nút tính năng:

	Gửi HIS	Gửi kết quả sang His		Cập nhật từ HIS	Cập nhật ca chụp từ His
	Cho phép sửa KQ	Cho phép sửa kết quả		Thêm chỉ định	Thêm chỉ định
	Hủy duyệt	Hủy duyệt		Lâm sàng	Lâm sàng
	Cập nhật	Cập nhật ca chụp		Chữ ký	Tắt/Bật in có chữ ký
	In phiếu	In phiếu		In	In kết quả bệnh nhân


2.2.7. Đăng xuất

Chọn vào biểu tượng góc trên bên phải và chọn **đăng xuất**



2.2.8. Tính năng chuột phải

Click chuột phải vào tên bệnh nhân:

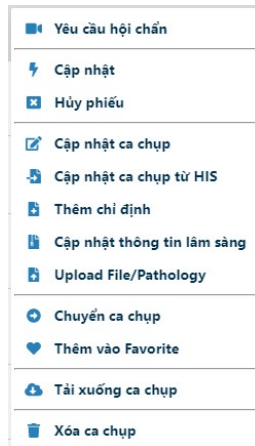

- Yêu cầu hội chẩn
- Cập nhật
- Hủy phiếu
- Cập nhật ca chụp
- Cập nhật ca chụp từ His
- Thêm chỉ định
- Cập nhật thông tin lâm sàng
- Upload File/Pathology
- Chuyển ca chụp
- Thêm vào Favorite
- Tải xuống ca chụp
- Xóa ca chụp

2.2.9. Đổi mật khẩu

Chọn vào biểu tượng  góc trên bên phải chọn **Đổi mật khẩu**



Sau khi chọn **Đổi mật khẩu** giao diện sẽ hiển thị như sau:

1. Nhập mật khẩu cũ
2. Nhập mật khẩu mới
3. Nhập lại mật khẩu mới
4. Lưu

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu

Lưu ý: Mật khẩu phải chứa ít nhất một chữ in hoa, 1 chữ thường, 1 số, 1 ký tự đặc biệt.

Lưu

Nhập thông tin sau đó click **Lưu**

2.3. Quy trình trình thực hiện một ca bệnh và trả kết quả

Bước 1: Chọn bệnh nhân cần thực hiện → Click double vào tên của bệnh nhân

VRPACS-RIS

Mã bệnh nhân

Test

Hôm nay

Hôm qua

-3 ngày

-7 ngày

Tất cả

01/01/2018

-

22/02/2023

Admin

DANH SÁCH MÁY - (325)

Default

PACS-AUTOSEN...

ROMEXIS_1

TESTRIMHCM

CT

BLADE

CONE BEAM

KC: LIMITFA 10001

Trạng thái của chụp

Chưa đọc (0)

Đang đọc (0)

Độc xong (0)

Đang tải ảnh (0)

Hải chẩn xong (0)

Đang duyệt (0)

Duyệt xong (0)

Tất cả (0)

Danh sách ca chụp quá hạn

Trạng thái đồng bộ HIS

THÔNG TIN CA CHỤP

Bác sĩ chỉ định

Chỉ định

Bộ phận chụp

Kết luận

Tên đoán khám

Mã hồ sơ

Chữ

Đã thực hiện

#	Họ tên	Tuổi	Giới L.	Khoa chỉ định	Chỉ định	Bác sĩ chỉ định	Chẩn đoán
1	TEST 1	22	M		X quang Tim phổi thẳng	Demo	
2	HUONG TEST 2112	23	M	22062.Khoa Nội Tổng hợp - ung bướu	Chụp Xquang sơ tiếp tuyến	TH.S QTV	
3	HUONG TEST TRUNG QUỐC 0901	24	M	22064.Khoa Ngoại	Chụp Xquang tuyến vú	TH.S QTV	

Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị ra thông báo → Nhấn chọn **Nhận đọc**

Xác nhận thực hiện ca chụp!

Mã phiếu: VR-17


Máy: BLADE

Họ tên: TEST 1 - 22


Chỉ định: X quang Tim phổi thẳng

Cập nhật
Nhận đọc
Hủy

Bước 3: Cho phép trình duyệt truy cập camera

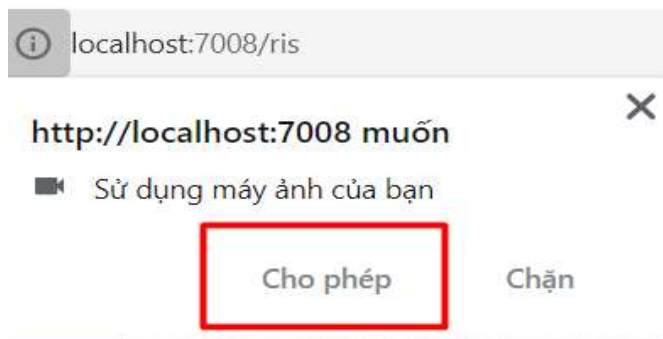


Hệ thống sẽ hiển thị hình ảnh được chuyển trực tiếp từ máy sang hệ thống

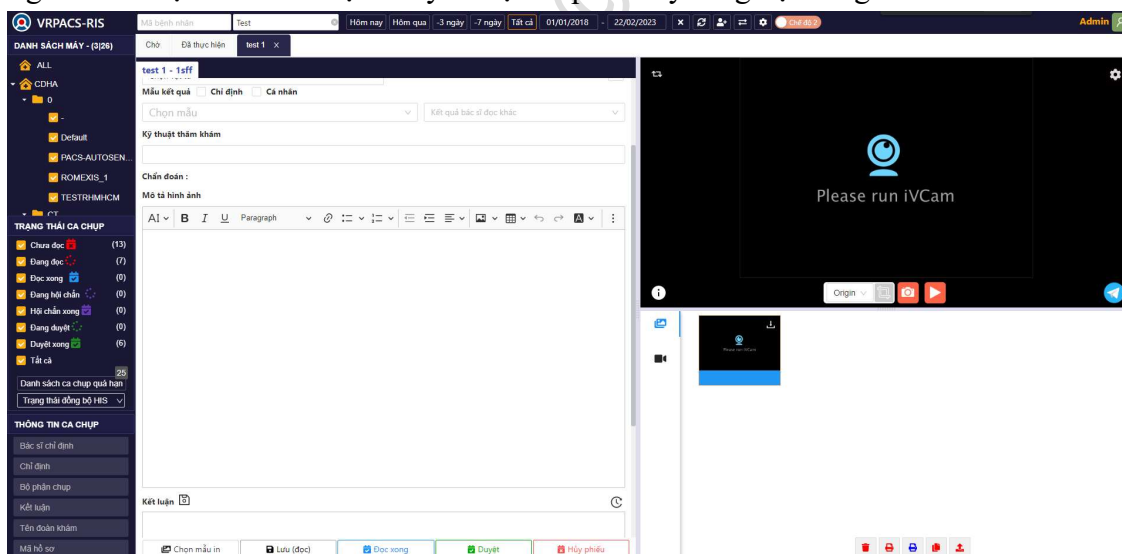


Bước 4: Thực hiện thao tác với hình ảnh

Bác sĩ (hoặc KTV) thực hiện lấy **ảnh chụp** bằng cách nhấn vào nút tròn màu đỏ trong cửa sổ khung hình. Có thể “Crop” theo tỉ lệ ảnh.

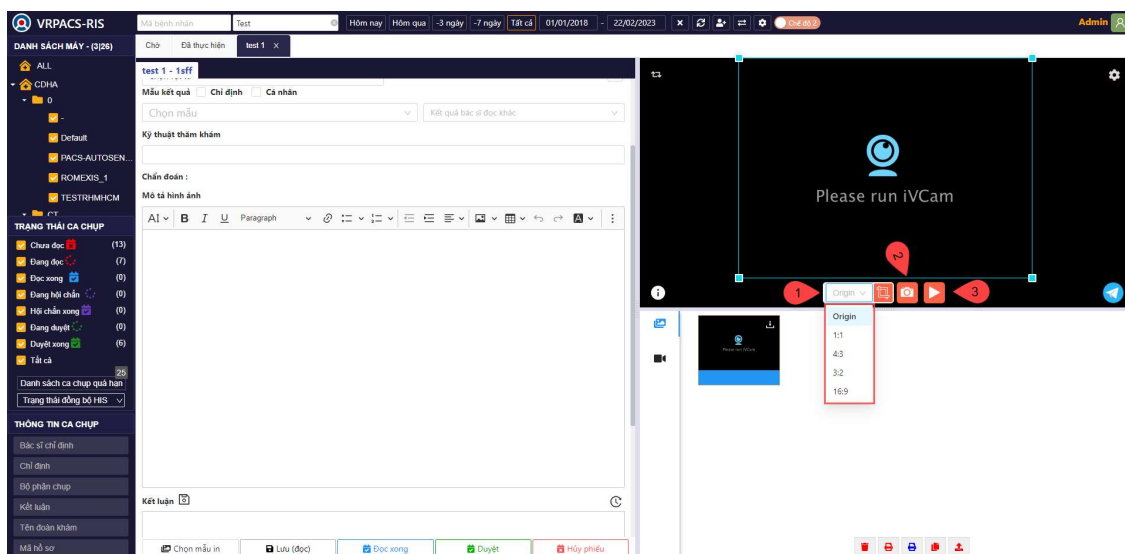


Hình ảnh khi thực hiện chụp sẽ được lưu trữ tại đây

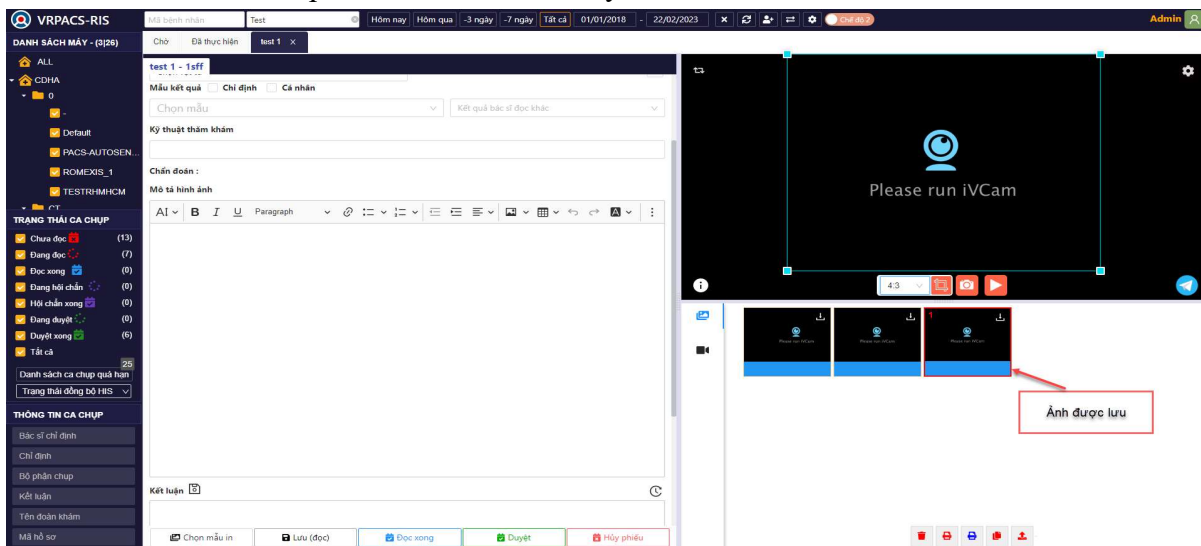


Ngoài ra, có thể xóa, in ảnh riêng hoặc upload ảnh lên

- Xóa: chuột phải vào ảnh để đánh số ảnh được chọn → Click chọn xóa (biểu tượng hình thùng rác)
- In ảnh: In ảnh đã chọn.
- In ảnh riêng: chuột phải vào ảnh để đánh số ảnh được chọn → Click chọn in (biểu tượng tài liệu bên phải thùng rác)
- Copy ảnh: Có thể copy trong ca chụp hoặc copy sang ca chụp khác.
- Upload file: Upload ảnh hoặc các file hỗ trợ vào ca chụp.

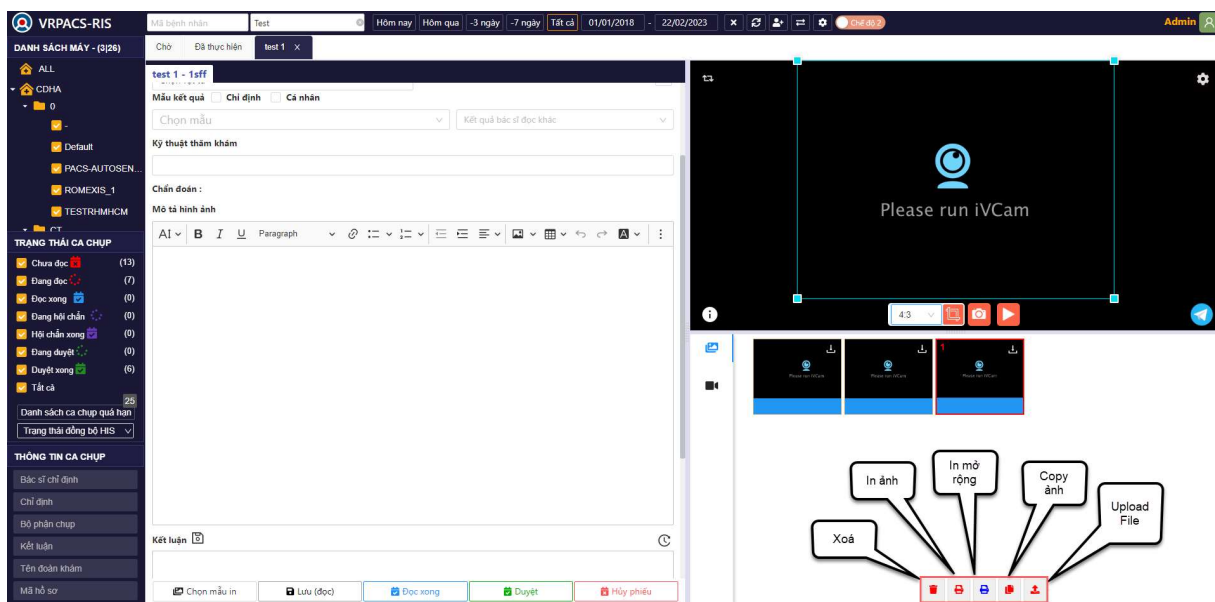


Quay video:

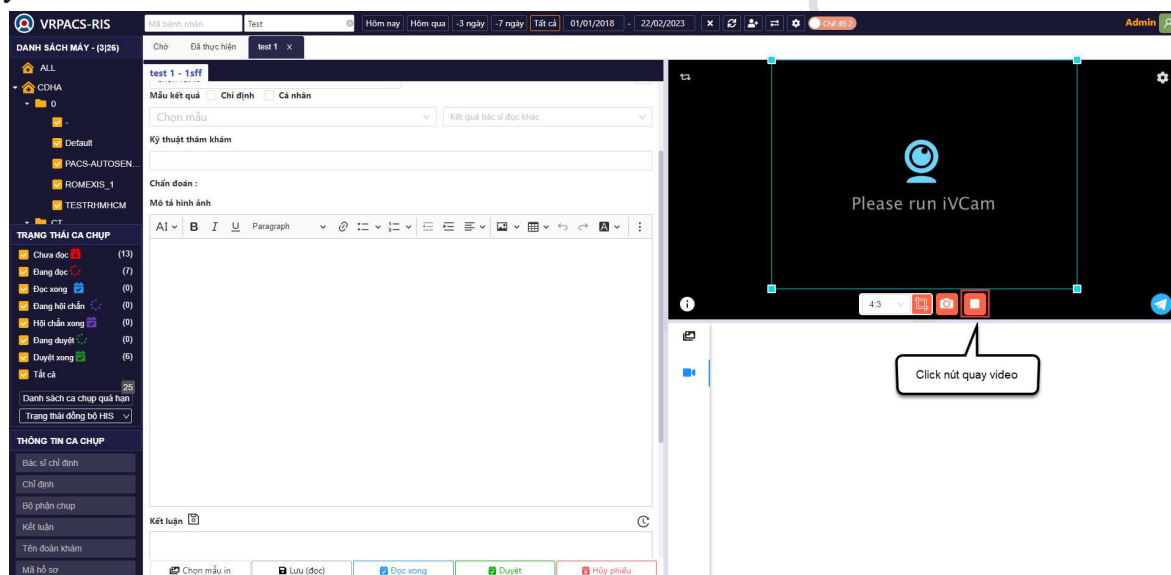

Hình ảnh khi thực hiện chụp sẽ được lưu trữ tại đây

Để thực hiện một số thao tác với video → Chọn dấu ba chấm bên cạnh video

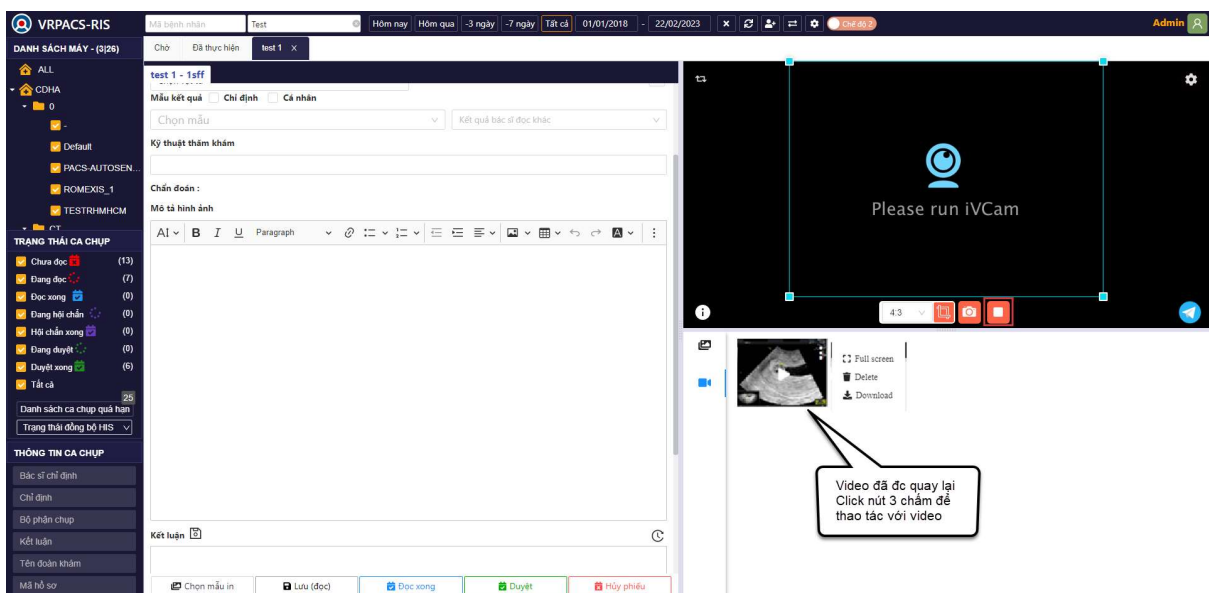

Một số thao tác bao gồm: **Mở toàn màn hình, xóa video hoặc tải xuống**

Bước 4: Trả kết quả

Hiện tại có 2 quy trình nhận và đọc kết quả bệnh nhân.

Quy trình 1: Dừng cho bác sĩ đọc và trả kết quả nhanh


Hệ thống sẽ hiển thị Form kết luận như sau: **Làm lần lượt theo số thứ tự như trong ảnh**

1. Chọn danh sách chỉ định
2. Chọn tên kỹ thuật viên chụp
3. Chọn loại mẫu kết quả: Chỉ định (mặc định) hoặc cá nhân
4. Chọn mẫu kết quả
5. Chọn kết quả của các bác sĩ cùng đọc ca đó.
6. Kỹ thuật thăm khám
7. Nội dung chẩn đoán
8. Kết luận
9. Đề nghị
10. Các thao tác trả kết quả:
 - Duyệt bệnh nhận.
 - Chọn ảnh và mẫu in ảnh.
 - Hủy phiếu.


Quy trình 2: Dùng cho hội chẩn trực tuyến

Bước 1: Bác sĩ yêu cầu mở một cuộc hội chẩn trực tuyến

Sau khi bác sĩ thực hiện một ca khó mà cần hội chẩn với một bác sĩ khác, ta thực hiện theo như sau:

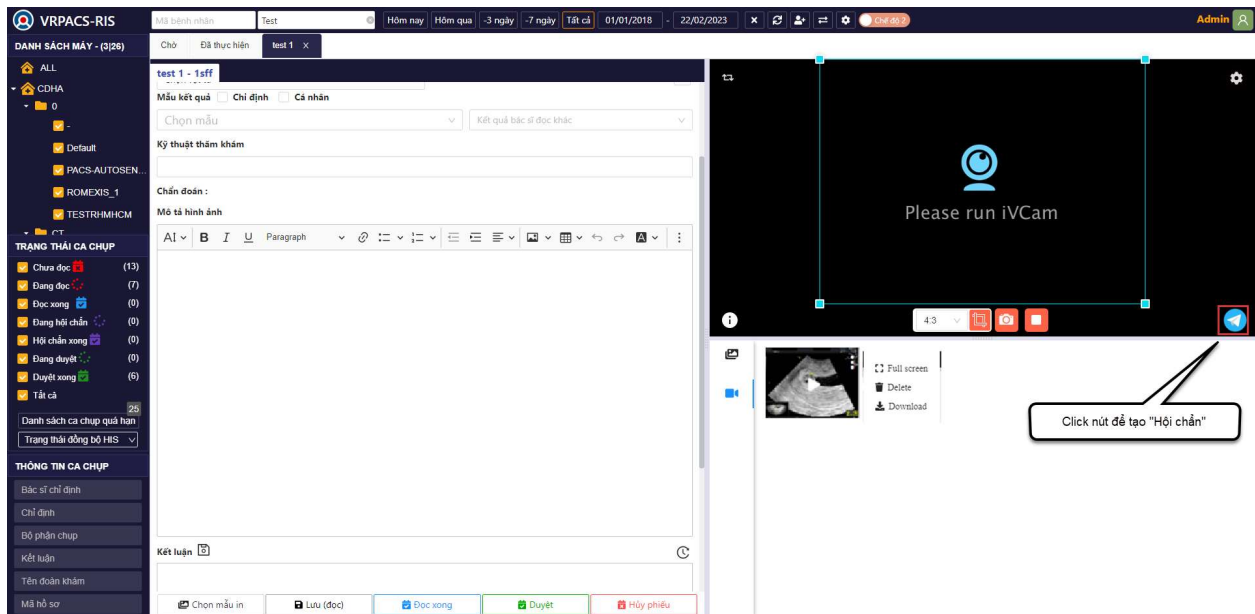

Giao diện hệ thống hội chẩn sẽ hiển thị như hình dưới đây

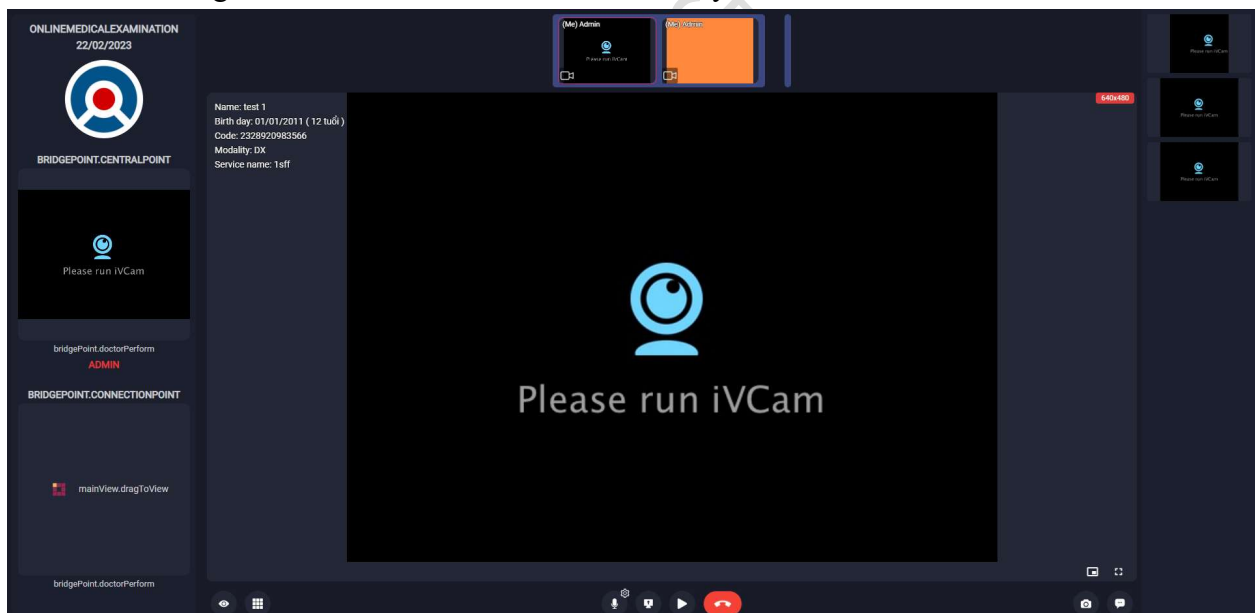

Bước 2: Bác sĩ tham gia hội chẩn

Bác sĩ tham gia hội chẩn có thể tìm thấy ca cần hội chẩn bằng cách đăng nhập vào hệ thống RIS → Tìm kiếm tên bệnh nhân → Chọn “Live”

VRPACS-RIS

Mã bệnh nhân: TEST

Hôm nay | Hôm qua | -7 ngày | -30 ngày | Tất cả | 27/02/2023

Admin

BỘ LỌC (25)

DANH SÁCH MÁY

ALL Modality

CDHA

0

Default

PACS-AUTOSE...

TRẠNG THÁI CA CHỤP

Chưa đọc (12)

Đang đọc (8)

Đọc xong (0)

Đang hội chẩn (0)

Hội chẩn xong (0)

Đang duyệt (0)

Duyệt xong (0)

Tất cả

Danh sách ca chụp quá hạn

AI Filter

Trạng thái đồng bộ HIS

THÔNG TIN CA CHỤP

Bác sĩ chỉ định

Chỉ định

Bộ phận chụp

Kết luận

Tên đoán khám

Mã hồ sơ

#	#	Thời gian chụp	Máy chụp	Mã	Họ tên	Tuổi	Giới tính
1	Tất cả	20/02/2023 10:02	testndcm	23216425...	TEST NDCM NEW VER	23	Nam
2	Chưa đọc	16/02/2023 20:09	CONE BEAM	23295444...	TEST BN CT	23	Nam
3	Đang đọc	16/02/2023 17:21	ROMEXIS_1	23209209...	Live TEST 1	12	Nam
4	Chưa đọc	16/02/2023 17:19	CONE BEAM	23279829...	TEST 2	12	Nam
5	Chưa đọc	16/02/2023 17:19	ROMEXIS_1	23275841...	TEST MODALI...	123	Nam
6	Đang đọc	15/02/2023 09:58	CONE BEAM	23289816...	TEST 1502		Nữ
7	Chưa đọc	14/02/2023 10:17	Default	23263133...	TEST PATHO...		Nam
8	Chưa đọc	07/02/2023 15:19	TESTRHHMCM	99221200...	TEST 123	23	Nam
9	Chưa đọc	06/02/2023 17:24	CONE BEAM	23209253...	TEST NGÀY 0602	12	Nam
10	Đang đọc	06/02/2023 17:24	CONE BEAM	23209253...	TEST NGÀY 0602	12	Nam
11	Chưa đọc	06/02/2023 16:18	ROMEXIS_1	23210546...	TEST 011	33	Nữ
12	Đang đọc	13/01/2023 10:35	CONE BEAM	23191164...	TEST HỘI CHẨN CONEBEAM	33	Nữ
13	Chưa đọc	24/12/2022 09:30	TESTRHHMCM	DC122214	TEST	22	Nam
14	Chưa đọc	23/12/2022 15:30	TESTRHHMCM	2212000020	TEST SỬA	18	Nam
15	Đã in	28/11/2022 09:14	CONE BEAM	22116938...	TEST TRẢ ÁNH KEY	44	Nam
16	Chưa đọc	18/11/2022 10:00	QUANH CHOP 01	22114214...	Live TEST TRẢ KQ 3 BƯỚC	44	Nữ
17	Đã in	17/11/2022 16:21	ROMEXIS_1	22119031...	TEST HỦY KẾT QUẢ11	26	Nam

Click nút "Live"

Thông tin bệnh nhân

Các trạng thái khi hội chẩn trực tuyến bao gồm:

Live : Bắt đầu hội chẩn

 : Đang thực hiện cuộc hội chẩn

 : Thực hiện xong cuộc hội chẩn

Chú ý: Bác sĩ chỉ vào được phòng hội chẩn khi ca đó đang ở trạng thái bắt đầu hội chẩn

Bước 3: Trả kết quả

Hệ thống sẽ hiển thị Form kết luận như sau: **Làm lần lượt theo số thứ tự như trong ảnh**

1. Chọn danh sách chỉ định
2. Chọn tên kỹ thuật viên chụp
3. Chọn loại mẫu kết quả: Chỉ định (mặc định) hoặc cá nhân
4. Chọn mẫu kết quả
5. Chọn kết quả của các bác sĩ cùng đọc ca đó.
6. Kỹ thuật thăm khám
7. Nội dung chẩn đoán
8. Kết luận
9. Đề nghị
10. Các thao tác trả kết quả:
 - Duyệt bệnh nhận.
 - Chọn ảnh và mẫu in ảnh.
 - Hủy phiếu.

Danh sách chỉ định 1

Chọn chỉ định

Kỹ thuật viên 2

Chọn kỹ thuật viên

Mẫu kết quả 3

Chỉ định Cá nhân

4

Kết quả bác sĩ đọc khác 5

Kỹ thuật thăm khám 6

Mô tả hình ảnh 7

AI B I U Paragraph

8

Kết luận

9

Khuyến nghị

10

Lưu (đọc) Đọc xong Duyệt Chọn mẫu in Hủy phiếu