



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ C+

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VRPACS (V.2)

MỤC LỤC

I. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG.....	3
1.1 Lựa chọn trình duyệt.....	3
1.2 Nhập địa chỉ hệ thống ADMIN.....	3
1.3 Nhập thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập.....	3
II. HỆ THỐNG TRANG QUẢN TRỊ ADMIN	4
2.1 Bố cục giao diện	4
2.2 Các chức năng chính	4
2.2.1 Thống kê.....	4
2.2.2 Chức năng Bác Sĩ	6
2.2.3 Bệnh nhân	10
2.2.4 Dịch vụ kỹ thuật:	10
2.2.5 Loại dịch vụ.....	11
2.2.6 Mẫu kết quả	13
2.2.7 Backup.....	14
2.2.8 Cầu hình	16
2.2.9 Máy chụp Pacs.....	17
2.2.10 Khu vực	20
2.2.11 Thư mục	22
2.2.12 Phân quyền Bác sĩ.....	24
2.2.13 Mẫu in kết quả.....	27
2.2.14 ICD.....	28
2.2.15 Vật tư.....	33

I. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG


1.1 Lựa chọn trình duyệt



1.2 Nhập địa chỉ hệ thống ADMIN



1.3 Nhập thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập

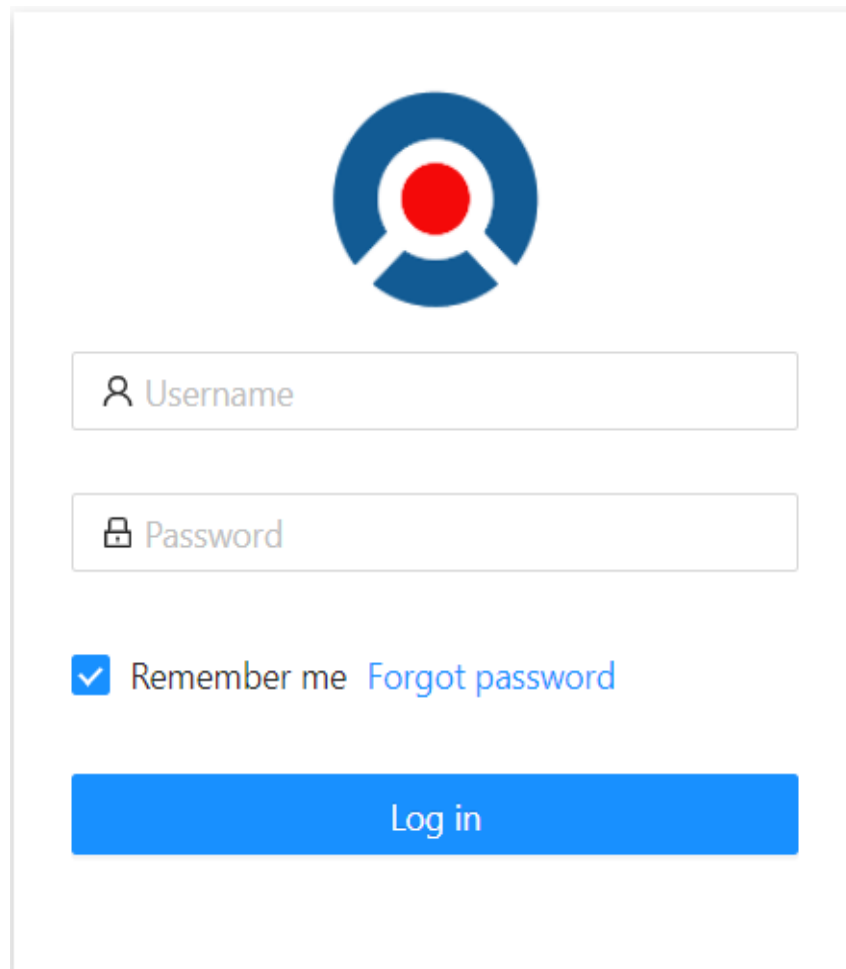A login form for the VRPACS system. At the top is a circular logo with a blue outer ring and a red center. Below the logo are two input fields: 'Username' with a person icon and 'Password' with a lock icon. There is a checked checkbox labeled 'Remember me' and a link 'Forgot password'. At the bottom is a blue 'Log in' button.




☒ Remember me [Forgot password](#)

[Log in](#)

II. HỆ THỐNG TRANG QUẢN TRỊ ADMIN

2.1 Bố cục giao diện

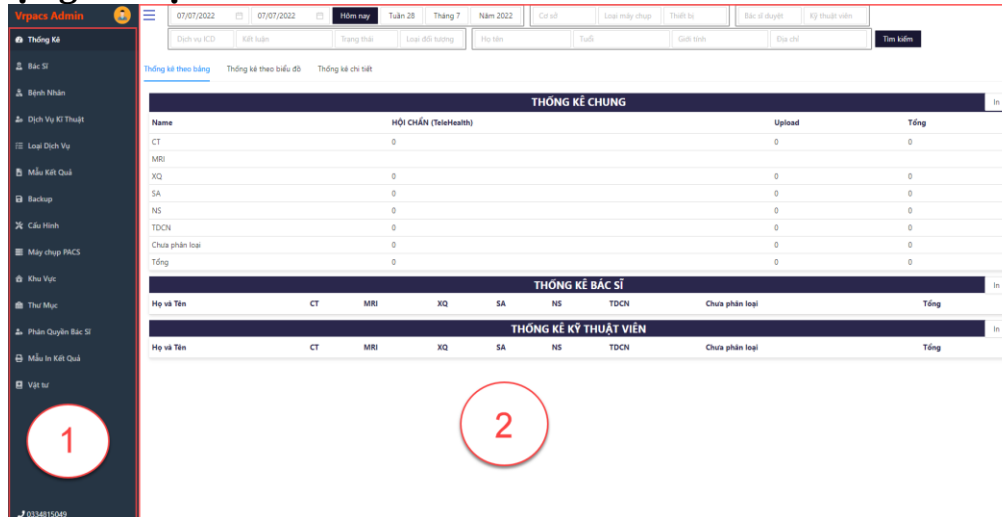


1. Danh sách các chức năng quản trị của hệ thống
2. Bảng hiển thị chức năng của từng chức năng quản trị.

2.2 Các chức năng chính

2.2.1 Thống kê

Click vào chức năng **Thống kê**

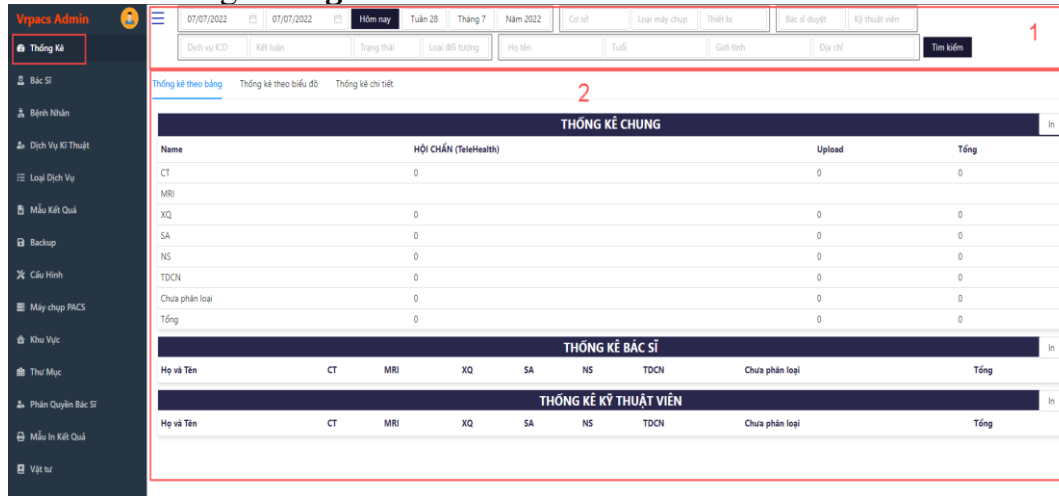

Chức năng thống kê gồm có:

1. Tìm kiếm

* Tìm kiếm theo thời gian

07/07/2022	07/07/2022	Hôm nay	Tuần 28	Tháng 7	Năm 2022	Cơ sở	Loại máy chụp	Thiết bị	Bác sĩ duyệt	Kỹ thuật viên	
Dịch vụ ICD	Kết luận	Trạng thái	Loại đối tượng	Họ tên	Tuổi	Giới tính	Địa chỉ				Tìm kiếm

* Tìm kiếm theo phòng chụp, thiết bị chụp

07/07/2022	07/07/2022	Hôm nay	Tuần 28	Tháng 7	Năm 2022	Cơ sở	Loại máy chụp	Thiết bị	Bác sĩ duyệt	Kỹ thuật viên	
Dịch vụ ICD	Kết luận	Trạng thái	Loại đối tượng	Họ tên	Tuổi	Giới tính	Địa chỉ				Tìm kiếm

* Tìm kiếm theo Bác sĩ, kỹ thuật viên

07/07/2022	07/07/2022	Hôm nay	Tuần 28	Tháng 7	Năm 2022	Cơ sở	Loại máy chụp	Thiết bị	Bác sĩ duyệt	Kỹ thuật viên	
Dịch vụ ICD	Kết luận	Trạng thái	Loại đối tượng	Họ tên	Tuổi	Giới tính	Địa chỉ	Tìm kiếm			

* Tìm kiếm theo thông tin ca chụp:

07/07/2022	07/07/2022	Hôm nay	Tuần 28	Tháng 7	Năm 2022	Cơ sở	Loại máy chụp	Thiết bị	Bác sĩ duyệt	Kỹ thuật viên
Dịch vụ ICD	Kết luận	Trạng thái	Loại đối tượng	Họ tên	Tuổi	Giới tính	Địa chỉ	Tìm kiếm		

* Tìm kiếm theo thông tin bệnh nhân:

07/07/2022	07/07/2022	Hôm nay	Tuần 28	Tháng 7	Năm 2022	Cơ sở	Loại máy chụp	Thiết bị	Bác sĩ duyệt	Kỹ thuật viên
Dịch vụ ICD	Kết luận	Trạng thái	Loại đối tượng	Họ tên	Tuổi	Giới tính	Địa chỉ	Tìm kiếm		


* Sau khi nhập thông tin cần tìm kiếm → ấn nút **Tìm kiếm**

2. Các loại thống kê gồm có :

* Thống kê theo bảng

07/07/2022 07/07/2022 Hôm nay Tuần 28 Tháng 7 Năm 2022 Cơ sở Loại máy chụp Thiết bị Bác sĩ duyệt Kỹ thuật viên Dịch vụ ICD Kết luận Trạng thái Loại đối tượng Họ tên Tuổi Giới tính Địa chỉ Tìm kiếm										
Thống kê theo bảng Thống kê theo biểu đồ Thống kê chi tiết										
THỐNG KÊ CHUNG										
Name	HỘI CHẨN (TeleHealth)					Upload	Tổng			
CT	0					0	0			
MRI										
XQ	0					0	0			
SA	0					0	0			
NS	0					0	0			
TDCN	0					0	0			
Chưa phân loại	0					0	0			
Tổng	0					0	0			
THỐNG KÊ BÁC SĨ										
Họ và Tên	CT	MRI	XQ	SA	NS	TDCN	Chưa phân loại	Tổng		
THỐNG KÊ KỸ THUẬT VIÊN										
Họ và Tên	CT	MRI	XQ	SA	NS	TDCN	Chưa phân loại	Tổng		

* Thống kê theo biểu đồ

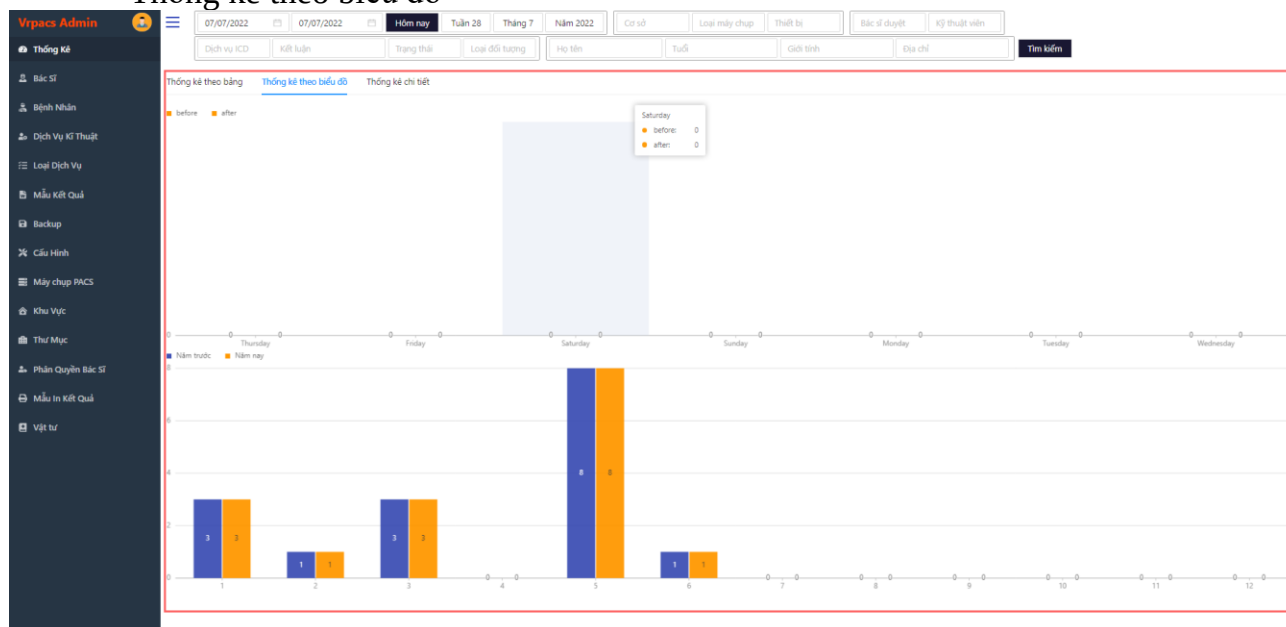

* Thống kê theo chi tiết

Vrpacs Admin

01/06/2022

07/07/2022

Hôm nay

Tuần 26

Tháng 7

Năm 2022

Cơ sở

Loại máy chụp

Thiết bị

Bác sĩ duyệt

Kỹ thuật viên

Dịch vụ ICD

Kết luận

Trạng thái

Loại đối tượng

Họ tên

Tuổi

Giới tính

Địa chỉ

Tìm kiếm

Thống kê theo bảng

Thống kê theo biểu đồ

Thống kê chi tiết

Tổng số ca: 1

STT	Mã bệnh nhân	Họ tên bệnh nhân	Tuổi		Địa chỉ	Ngày thực hiện	BHYT	Chẩn đoán	Nơi gửi	Yêu cầu	Kết quả	Người đọc
			Nam	Nữ								
1	1653534210207	Bệnh Nhân TEST	67			17/06/2022 11:01						

2.2.2 Chức năng Bác Sĩ

Vrpacs Admin

Keyword

Tất cả

Tìm kiếm

Thêm mới

Quản lý quyền

Thêm mới nhanh

Thống kê

Bác Sĩ

Bệnh Nhân

Dịch Vụ Kỹ Thuật

Loại Dịch Vụ

Mẫu Kết Quả

Backup

Cấu Hình

Máy chụp PACS

Khu Vực

Thư Mục

Phân Quyền Bác Sĩ

Mẫu In Kết Quả

Vật tư

Tên tài khoản	Tên Đăng Nhập	Giới Tính	Địa chỉ	Ngày Sinh	Email	Điện Thoại	Chữ ký	Ảnh đại diện	Vị trí	Mô tả	Thứ tự ưu tiên	
his-upload	his-upload	Nam	Hải Phòng		abc@gmail.com	03544234252				Không		i [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]
B5 Chau	bschau	Nam			bschau@telerad.vn					Không		i [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]
Tp Văn	vancott	Nam			vancott@telerad.vn					Không		i [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]
Bs Huu	bshuu	Nam			bshuu@telerad.vn					Không		i [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]
Giao Ban	giaoban	Nam			giaoban@telerad.vn					Không		i [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]
Viettel 1	vt1	Nam			vt1@telerad.vn					Không		i [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]
VIETTEL2	vt2	Nam			vt2@telerad.vn					Không		i [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]
Ngô Văn Sơn	nvs	Nam			nvs@telerad.vn					Không		i [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]
Núi	nui	Nam			nui@telerad.vn					Không		i [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]
Chiến	chien	Nam			chien@telerad.vn					Không		i [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

<

1

2

3

4

5

>

Go to

Chức năng **Bác sĩ** là chức năng quản lý tài khoản của các bác sĩ gồm có:

2.2.2.1 Tìm kiếm

Gồm có tìm kiếm theo tên, tài khoản của bác sĩ, KTV, và tìm kiếm theo nhóm quyền.

Vrpacs Admin

Keyword

Tất cả

Tìm kiếm

Thêm mới

Quản lý quyền

Thêm mới nhanh

Thống kê

Bác Sĩ

Bệnh Nhân

Dịch Vụ Kỹ Thuật

Loại Dịch Vụ

Mẫu Kết Quả

Tên tài khoản	Tên Đăng Nhập	Giới Tính	Địa chỉ	Ngày Sinh	Email	Điện Thoại	Chữ ký	Ảnh đại diện	Vị trí	Mô tả	Thứ tự ưu tiên	
his-upload	his-upload	Nam			abc@gmail.com	03544234252				Không		i [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]
		Nam								Không		i [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]
		Nam								Không		i [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]
		Nam								Không		i [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]
		Nam								Không		i [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]
Giao Ban	giaoban	Nam			giaoban@telerad.vn					Không		i [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

<

1

2

3

4

5

>

Go to

2.2.2.2 Thêm mới

Thêm mới tài khoản cho Bác sĩ, KTV : Nhấn vào nút **thêm mới**

Tìm kiếm	Thêm mới	Quản lý quyền	Thêm mới nhanh
----------	----------	---------------	----------------

6

THÊM MỚI BÁC SĨ

Họ tên:

Giới tính:
☒ Nam
☐ Nữ

Địa chỉ:

Ngày sinh:
07/07/2022

Email:

Số điện thoại:

Vị trí:

Mô tả:

Thứ tự ưu tiên:
Không

userHis:

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Nhập lại mật khẩu:

Quyền:
Chọn một quyền

Chữ ký:

+
Upload

LAN Only:
☐ Chỉ cho phép trong LAN

Signature Serial Number:

Signature User:

Signature Password:

Thêm mới

Điền đầy đủ thông tin cần thiết của Bác sĩ → Sau đó ấn **Thêm mới**
Lưu ý: Những chỗ có dấu “x” là bắt buộc phải điền.

2.2.2.3 Quản lý quyền:

Tìm kiếm
Thêm mới
Quản lý quyền
Thêm mới nhanh

* Các chức năng trong **Quản lý quyền** :

Thêm mới		
Tên quyền	Mô tả	
DoctorOnlyRead	Doctor only can read	 
DoctorApproved	Doctor can read and Approved	 
Technician	X-ray technician, CT technician, MRI technician, etc..	 
SuperAdmin	Role for Super Admin	 
Hội chẩn	Hội chẩn	 
View Only	Chỉ xem	 
AABBCC	Test	 
SuperDoctor	Super doctor	 
Admin	Administrator role	 
DoctorsConsultation	Role for Doctor Consultation	 

+ Thêm mới

+ Tên quyền

+ Mô tả

+ Chỉnh sửa

+ Xóa quyền

* **Thêm mới quyền:** Điền tên quyền, mô tả → Ấn **Thêm mới**

THÊM MỚI QUYỀN

Tên Quyền:

Mô tả:

Thêm mới

* **Chỉnh sửa quyền:** Điền nội dung cần chỉnh sửa → Ấn **Lưu lại**

SỬA QUYỀN

Tên quyền:

Mô tả:

Lưu lại

* **Xóa quyền:** Chọn quyền cần xóa ấn nút hình  → Click **OK**

AABBCC
Test
 

Xác nhận xóa AABBCCC

Cancel
Ok

* **Thêm mới nhanh:** Chọn **Thêm mới nhanh**

Tìm kiếm
Thêm mới
Quản lý quyền
Thêm mới nhanh

* Click vào nút **Upload** → Chọn file Excel danh sách → Click **Thêm mới**.

THÊM MỚI BÁC SĨ



Upload:  Upload


Thêm mới

2.2.2.4 Chỉnh sửa tài khoản

* Thông tin tài khoản:



* Chỉnh sửa thông tin tài khoản: Click nút Sửa → sửa những thông tin cần thiếu rồi ấn **Lưu lại**

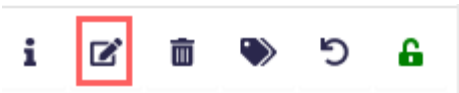

SỬA THÔNG TIN BÁC SĨ



Họ tên: demo

Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ

Địa chỉ:

Ngày sinh: 06/12/2021

Email: demo@telerad.vn

Số điện thoại:

Vị trí:

Mô tả:

Thứ tự ưu tiên: Không

userHis:

Chữ ký:


+
Upload

Ảnh đại diện:


+
Upload

Lưu lại


* Xóa tài khoản: Click nút  → Ấn OK

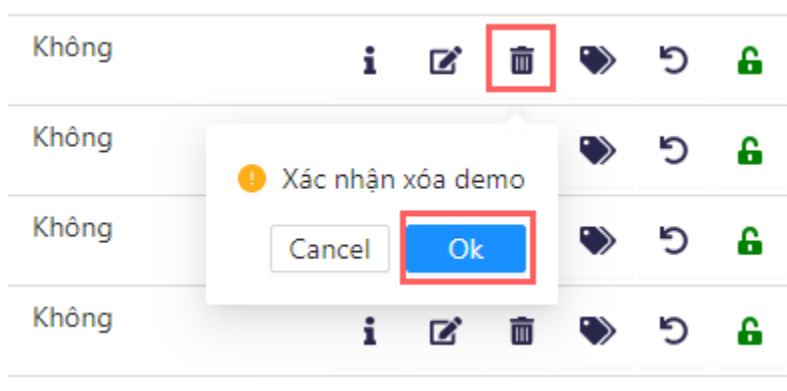

* Sửa quyền : Click nút  → Tích quyền cần thêm → Ấn nút x.

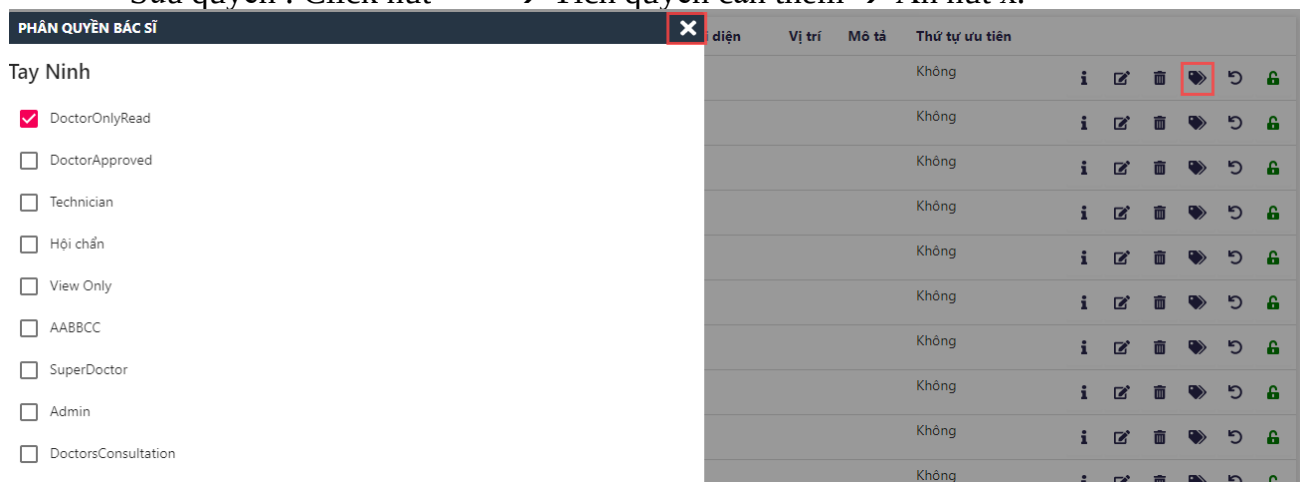

* Reset mật khẩu: Click vào nút  Chọn **OK** → Mật khẩu reset về Abc@123

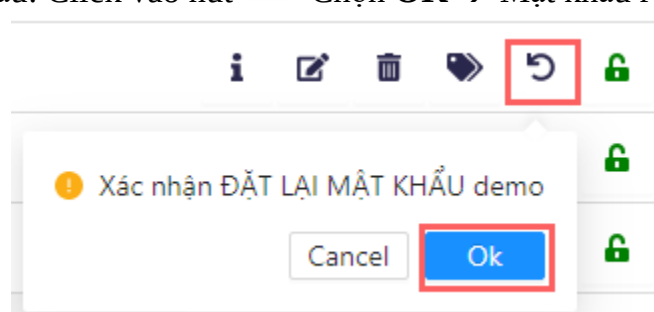

2.2.3 Bệnh nhân



- + Tìm kiếm theo tên và email bệnh nhân
- + Tìm kiếm theo tuổi
- + Tìm kiếm theo giới tính
- + Nút **Tìm kiếm**
- + Nút **chỉnh sửa**

2.2.4 Dịch vụ kỹ thuật:

* Mở bảng danh sách các chức năng → Chọn chức năng **Dịch vụ kỹ thuật**

Vrprocs Admin

Tên dịch vụ: 01/01/2015 30/08/2021 **Tìm kiếm**

Mã dịch vụ	Tên dịch vụ	Thời gian tạo	Thời gian cập nhật	Kết quả	Trạng thái	Kỹ thuật	Mô tả	Thời gian duyệt
1		09/05/2021	09/05/2021		1			01/01/1970
1		09/05/2021	09/05/2021		0			09/05/2021
1		09/05/2021	09/05/2021		1			01/01/1970
946XQIPTKTS	Tim phổi thang KTS	09/05/2021	09/05/2021	Hình ảnh chụp X quang tim phổi bình thường	2		- Phế trường phổi hai bên không có nốt hay khối mờ. - Không thấy tràn dịch, tràn khí - Góc sườn hoành 2 bên sáng. - Hình tim không to, trung thất không rộng. - Không thấy bất thường xương lồng ngực.	09/05/2021
1		09/05/2021	09/05/2021		0			09/05/2021
1		09/05/2021	09/05/2021		2	Đo loãng xương	Không thấy dấu hiệu loãng xương	09/05/2021
908SATHAI	Sieu am thai doppler mau	09/05/2021	09/05/2021		1			09/05/2021
917XQCOCKTS	X quang co chan trai (T-N) KTS	09/05/2021	09/05/2021	Hình ảnh thoái hóa xương gót chân trái	2		Hình ảnh gai xương gót chân bên trái	09/05/2021
945SATQ	Sieu am o bung	09/05/2021	09/05/2021	Hình ảnh ứ nước thận trái do sỏi niệu quản 1/3 dưới	2		- Gan: Kích thước không to, nhu mô gan đều, cấu trúc âm đồng nhất, không thấy khối bất thường. - Đường mật trong và ngoài gan không giãn, không thấy sỏi. - Túi mật không to, thành mỏng, không có sỏi, dịch mật.	09/05/2021

* Trong chức năng **Dịch vụ kỹ thuật** gồm: **Tìm kiếm** và **chỉnh sửa**, xóa dịch vụ kỹ thuật.

2.2.5 Loại dịch vụ

* **Loại dịch vụ** gồm có: **Tìm kiếm**, **Thêm mới**, **Chỉnh sửa** và **Xóa**

Vrprocs Admin

Từ khóa: **Tìm kiếm** **Thêm mới**

Tên	Rút gọn	Mã	Trạng thái	
0	0		☒	☐ ☐
Nội soi	Nội soi	EO	☒	☐ ☐
Siêu Âm	SA	SA_001	☒	☐ ☐
XQ	XQ	XQ	☒	☐ ☐
CT	CT	CT	☒	☐ ☐

< 1 > Go to

* **Tìm kiếm:** Nhập dịch vụ cần tìm vào ô **Từ khóa** → Click **Tìm kiếm**

Tìm kiếm **Thêm mới**

* **Thêm mới:**

- Click vào nút **Thêm mới**
- Nhập đầy đủ thông tin dịch vụ gồm có :
 - + **Tên, Rút gọn**(Là tên rút gọn của dịch vụ),
 - + **Mã** (Là mã của dịch vụ),
 - + **Trạng thái** : Có 2 trạng thái là tích vào dấu xanh để hoạt động và tắt dấu tích để không hoạt động.

THÊM LOẠI DỊCH VỤ	
Tên:	
Rút gọn:	
Mã:	
Trạng thái:	☒
Thêm mới	

* **Chỉnh sửa** : Click vào nút  → Điền đầy đủ thông tin → **Lưu lại**

Tên:	0
Rút gọn:	0
Mã:	
Trạng thái:	☒
Lưu lại	

* **Xóa dịch vụ**: Click vào nút  → ấn **OK**



 Xác nhận xóa 0

2.2.6 Mẫu kết quả

* **Mẫu kết quả** gồm có các tính năng:

Tên	Tên dịch vụ	Kỹ thuật	Kết quả	Trạng thái	Mô tả
Nội Soi Dạ Dày	Nội soi		Hiện tại chưa phát hiện hình ảnh tổn thương.	☒	- Thực quản: Bình thường, không thấy u loét, không giãn tĩnh mạch thực quản. - Dạ dày: - Dịch dạ dày: trong - Nhu động dạ dày: bình thường - Thần vị, phình vị: bình thường - Bờ cong lớn, bờ cong nhỏ: Không thấy loét - Hàng vi và tiền môn vị: Nhiễm mạc phù nề xung huyết, không thấy loét, không thấy u. - Môn vị: Phù nề, không có dịch tá tràng trào ngược - Hành tá tràng và tá tràng: không thấy loét, tá tràng bình thường - Test HP: - Sinh thiết: Không.
Nội soi	Nội soi		Bình Thường	☒	- Thực quản: Bình thường, không thấy u loét, không giãn tĩnh mạch thực quản. - Dạ dày: - Dịch dạ dày: trong - Nhu động dạ dày: bình thường - Thần vị, phình vị: bình thường - Bờ cong lớn, bờ cong nhỏ: Không thấy loét - Hàng vi và tiền môn vị: Nhiễm mạc phù nề xung huyết, không thấy loét, không thấy u. - Môn vị: Phù nề, không có dịch tá tràng trào ngược - Hành tá tràng và tá tràng: không thấy loét, tá tràng bình thường - Test HP: - Sinh thiết: Không.
SA, Cổ Chân P	Nội soi	Siêu âm khớp cổ chân phải bằng đầu dò tần số cao 12Mhz	Hình ảnh siêu âm khớp cổ chân phải hiện tại không phát hiện thấy bất thường	☒	- Tu dịch khe khớp: không - Màng hoạt dịch: hình ảnh bình thường - Vỏ xương đầu dưới xương chày (mặt cả trong): hình ảnh bình thường - Vỏ xương đầu dưới xương mác (mặt cả ngoài): hình ảnh bình thường - Gân gót (Achilles): hình ảnh bình thường - Phần mềm quanh khớp: cấu trúc đồng nhất

* **Tìm kiếm** : Tìm kiếm theo **Từ khóa** và tìm kiếm theo tên **Loại dịch vụ**

Từ khóa

Nội soi
Siêu Âm
XQ
CT

Tìm kiếm Thêm mới

* **Thêm mới**: Điền thông tin vào các ô bên dưới → Click **Thêm mới**

THÊM MỚI MẪU KẾT QUẢ

Tên:

Dịch vụ:

Kỹ thuật:

Mô tả:

Paragraph

B *I* U

Kết quả:

Khuyến nghị:

Giá:

Thêm mới

* **Chỉnh sửa** : Click vào nút → Điền thông tin cần sửa lại → **Lưu lại**

CHỈNH SỬA MẪU KẾT QUẢ

Tên: Nội Soi Dạ Dày

Dịch vụ: Nội soi

Kỹ thuật:

Mô tả:

Choose heading

B

I

U

- Thực quản: Bình thường, không thấy u loét, không giãn tĩnh mạch thực quản.
- Dạ dày:
- Dịch dạ dày: trong
- Nhu động dạ dày: bình thường
- Thân vị, phình vị: bình thường
- Bờ cong lớn, bờ cong nhỏ: Không thấy loét
- Hàng vị và tiền môn vị: **Niêm mạc phù nề xung huyết**, không thấy loét, không thấy u.
- Môn vị: **Phù nề**, không có dịch tá tràng trào ngược
- Hành tá tràng và tá tràng: không thấy loét, tá tràng bình thường
- Test HP:
- Sinh thiết: Không.


Kết quả: Hiện tại chưa phát hiện hình ảnh tổn thương.

Khuyến nghị:

Giá:


Lưu lại

* **Xóa dịch vụ:** Click vào nút  → ấn **OK**

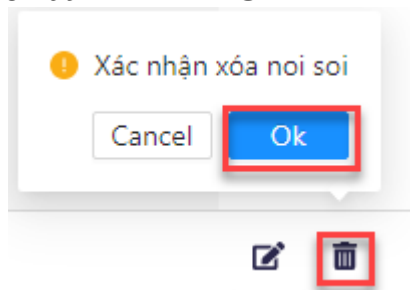

2.2.7 Backup

- * Mở bảng danh sách các chức năng → Chọn chức năng **Backup** (Chức năng này giúp quản lý các thư mục lưu trữ hình ảnh.)
- * Trong chức năng **Backup** gồm: **Tìm kiếm**, **thêm mới** và **chỉnh sửa**, **xóa**.

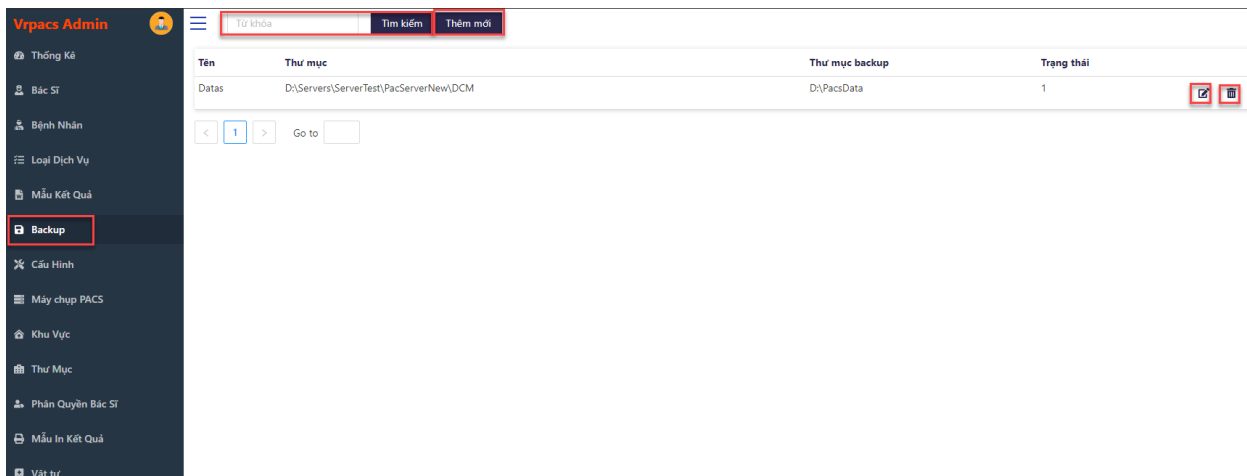

* **Tìm kiếm:** Nhập **Từ khóa** cần tìm kiếm → **Tìm kiếm**

* **Thêm mới:** Click vào nút **Thêm mới** → Điền thông tin gồm : **Tên**, **Thư mục** và **Thư mục backup** → Click **Thêm mới**

THÊM MỚI THÔNG TIN BACKUP

Tên:

Thư mục:

Thư mục Backup:

* **Chỉnh sửa :** Click vào nút → Điền thông tin cần sửa lại → **Lưu lại**


SỬA THÔNG TIN BACKUP

Tên:

Thư mục:


Thư mục backup:

* **Xóa** : Click vào nút  → ấn OK

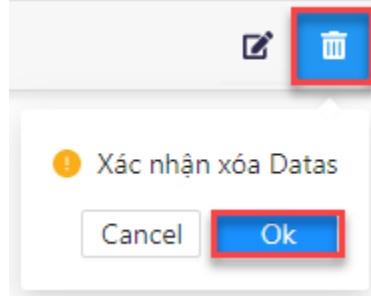

2.2.8 Cầu hình

* Mở bảng danh sách các chức năng → Chọn chức năng Cầu hình (Chức năng giúp hiển thị tên bệnh viện, địa chỉ số điện thoại cho trang RIS).

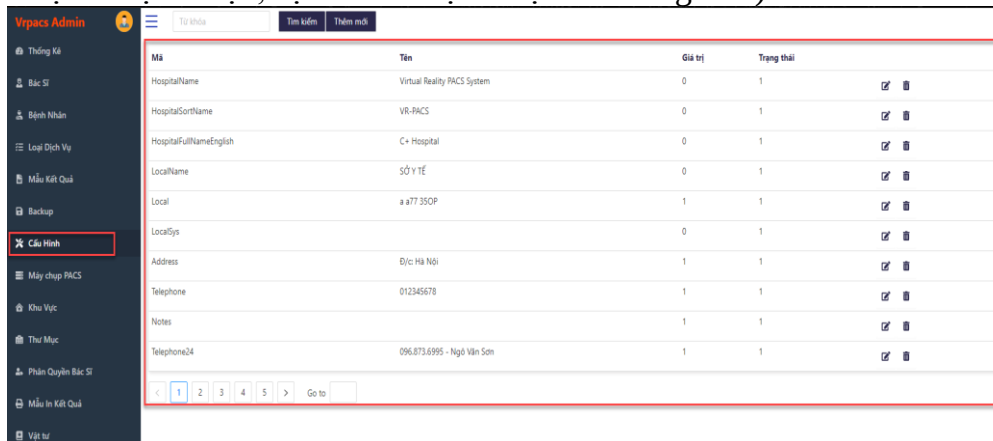

Mã	Tên	Giá trị	Trạng thái		
HospitalName	Virtual Reality PACS System	0	1		
HospitalSortName	VR-PACS	0	1		
HospitalFullNameEnglish	C+ Hospital	0	1		
LocalName	SỐ Y TẾ	0	1		
Local	a 877 350P	1	1		
LocalSys		0	1		
Address	Đ/c Hà Nội	1	1		
Telephone	012345678	1	1		
Notes		1	1		
Telephone24	096.873.6995 - Ngô Văn Sơn	1	1		

* **Tìm kiếm**: Nhập **Từ khóa** cần tìm kiếm → **Tìm kiếm**



* **Thêm mới**: Click vào nút **Thêm mới** → Điền thông tin gồm : **Mã**, **Tên** và **Giá trị** → Click **Thêm mới**



* **Chỉnh sửa** : Click vào nút  → Điền thông tin cần sửa lại → **Lưu lại**


SỬA THÔNG TIN CẤU HÌNH

Tên: Virtual Reality PACS System

Giá trị: 0

Lưu lại

* **Xóa** : Click vào nút  → ấn OK

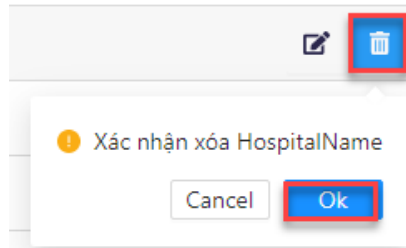

2.2.9 Máy chụp Pacs

* Mở bảng danh sách các chức năng → Chọn chức năng **Máy chụp Pacs** (Chức năng này giúp quản lý các máy khi được kết nối DICOM, thêm mới máy chụp (dành cho Non-dicom), phân mẫu kết quả, phân mẫu in, cơ sở cho các máy được kết nối.)

* Trong chức năng **Máy chụp Pacs** gồm: **Tìm kiếm**, **thêm mới**, **Phân mẫu cho máy chụp** và **Chỉnh sửa**, **Xóa** máy chụp Pacs.

Tên	Tên đầy đủ	Thư mục lưu trữ	StartMode	State	RequestFromIP	RequestFor	ApplyFor	IsStore	WLResultAll	Tên thư mục	Tên mẫu
Default	Default	E:\Servers\ServerTest\PacServerNew\DCM\SCP_DATA\SCP_1	0	0	10.0.41.8	1	1	☐	0	AAA	
Liên Khoa	Bệnh Viện TW Thái Nguyên - CT - TESTTELE	E:\VRPACS_V2\VR_TELERAD\Servers\PacServer\DICOM\SCP_01	0	0	Share	1	1	☐		NỘI VIỆN	AAA
Tiểu hóa	BỆNH VIỆN PHỐI TW - CR - TESTTELE	E:\VRPACS_V2\VR_TELERAD\Servers\PacServer\DICOM\SCP_02	0	0	Share	1	1	☐		NGOẠI VIỆN	AAA
Tim Mạch	BỆNH VIỆN TW QUAN DOI 108 - CT - TESTTELE	E:\VRPACS_V2\VR_TELERAD\Servers\PacServer\DICOM\SCP_03	0	0	Share	1	1	☐		NGOẠI VIỆN	AAA
Ngoại	BỆNH VIỆN PHỐI TW - CR - TESTTELE1	E:\VRPACS_V2\VR_TELERAD\Servers\PacServer\DICOM\SCP_04	0	0	Share	1	1	☐		NGOẠI VIỆN	AAA
Upload	admin-upload	E:\VRPACS_V2\VR_TELERAD\Servers\PacServer\DICOM\SCP_05	0	0	*	1	1	☐		admin-Upload	AAA
XIBNzchL999bQv6/pGo-	XIBNzchL999bQv6/pGo- - DX - admin-upload	E:\VRPACS_V2\VR_TELERAD\DCM\SCP_DATA\DV_56	0	0	*	3	1	☒		Invisible	AAA
BV Tây Ninh 2	kTC54ZhDIdluE3bsQz98LgWol - MR - admin-upload	E:\VRPACS_V2\VR_TELERAD\Servers\PacServer\DICOM\SCP_06	0	0	*	2	0	☐		NGOẠI VIỆN	AAA
HỘI CHẨN	HoiChan	E:\VRPACS_V2\VR_TELERAD\DCM\SCP_DATA\DV_58	0	0	Share	0	0	☐		NỘI VIỆN	AAA
Upload	bschau-upload	E:\VRPACS_V2\VR_TELERAD\Servers\PacServer\DICOM\SCP_07	0	0	*	1	1	☐		bschau-Upload	AAA

* **Tìm kiếm**: Điền thông tin cần tìm kiếm gồm có tìm theo **Từ khóa**, theo **Dịch vụ** và theo **Loại** → Click **Tìm kiếm**

Từ khóa

Dịch vụ:

Tất cả

Loại:

Tất cả

Tìm kiếm

Thêm mới

Phân mẫu cho máy chủ

Tên	Tên đầy đủ	Thư mục	StartMode	State
Default	Default	E:\Servers\ServerTest\PacServerNew\DCM\SCP_DATA\SCP_1	0	0

* **Thêm mới:** Click vào nút **Thêm mới** → Điền đầy đủ thông tin cần thiết (Những ô bôi đỏ) → Click **Lưu lại**.

* **Chú ý:** Dấu * là bắt buộc. Phần **Chọn bệnh viện(18)**, dịch vụ được **tạo** từ chức năng **Thư mục**, nếu khi gán bệnh viện mà **không** có loại dịch vụ theo yêu cầu, vui lòng xem mục **2.2.13 để tạo mới**. Phần **Chọn mẫu in(19)**, dịch vụ được **tạo** từ chức năng **Mẫu in kết quả**, nếu khi gán mẫu in mà **không** có loại dịch vụ theo yêu cầu, vui lòng xem mục **2.2.15 để tạo mới**.

THÊM MỚI MÁY CHỤP

* Tên: 1

* Tên đầy đủ: 2

* Đường dẫn: 3

LoginName: 4

Password: 5

StartMode: 6

State: 7

ErrorCode: 8

* RequestFromIP: 9

* Modality: 10

ModalityType: 11

* Map Modality: 12

MachineCode: 13

RequestFor: 14

ApplyFor: 15

IsStore: 16

WLRResultAll: 17

* Chọn Bệnh viện: CT 18

* Chọn Mẫu in: CLVT 19

Lưu lại 20

* **Chỉnh sửa :** Click vào nút  → Điền thông tin cần sửa lại → **Lưu lại**

SỬA THÔNG TIN SERVERPACS

* Tên: Default

* LoginName: DX

* requestFromIP: 10.0.41.8

* applyFor: 1

* Chọn thư mục lưu: E:\Servers\ServerTest\PacServerNew\DCM\SCP_DATA\SCP_1

* Modality:

* ModalityType:

* Map Modality:


MachineCode:

* Chọn Bệnh viện: --- - 0

* Chọn Mẫu in: 0

Lưu lại

* **Xóa :** Click vào nút  → ấn OK

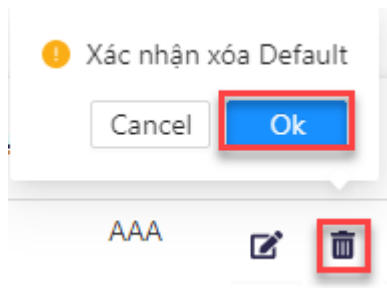

* **Phân mẫu cho máy chụp:** Click vào nút

Phân mẫu cho máy chủ

Đối với **Máy chủ mới** → Chọn **Phân mẫu mới**

Tìm kiếm Tim kiếm Phân mẫu mới

Tên	Tên đầy đủ	Mẫu	
Tim Mạch	BENH VIEN TW QUAN DOI 108 - CT - TESTTELE	Nội soi, Siêu Âm, XQ.	
Liên Khoa	Benh Vien TW Thai Nguyen - CT - TESTTELE	Nội soi, Siêu Âm, XQ.	
Tiểu hóa	BENH VIEN PHOI TW - CR - TESTTELE	Nội soi, Siêu Âm, XQ.	
Ngoại	BENH VIEN PHOI TW - CR - TESTTELE1	Nội soi, Siêu Âm, XQ.	
Upload	giaoban-upload	Nội soi, Siêu Âm, XQ.	
Upload	adminnam-upload	Nội soi, Siêu Âm, XQ.	

- Chọn máy chủ → Chọn mẫu kết quả (có thể chọn 1 hoặc nhiều mẫu)

PHÂN MẪU TEMPLATE
✕

☐ Nội soi -- Nội soi
 ☐ SA -- Siêu Âm
 ☐ XQ -- XQ
 ☒ CT -- CT


US - 207 -- null
 US - 308 -- null
 PET-CT 108 -- null
 EO-103 -- null
 MAMMO 105 -- null
CT 64 CS02 -- null
 MRI 3.0 Tesla -- null
 ADMIN-Upload -- ADMIN-Upload

- Đối với **Máy chủ cần phân lại mẫu** → Chọn **Chỉnh sửa**

Từ khóa Tìm kiếm Phân mẫu mới		
Tên	Tên đầy đủ	Mẫu
XQ 2	DXWORKS02	KẾT QUẢ NỘI SOI, Chọn chỉnh sửa ➡ 
CT	UN_CTAWP78387	KẾT QUẢ NỘI SOI, 
EFILM	EFILM	KẾT QUẢ NỘI SOI, 
21312	Haha	KẾT QUẢ NỘI SOI, 
ADMIN-Upload	ADMIN-Upload	KẾT QUẢ NỘI SOI, 
DUCTEST	DUCTEST	KẾT QUẢ NỘI SOI, PHIẾU CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH, 
admin-AET	5c96bcd7-3258-4a52-847b-9a64a75ffc2b-AET	KẾT QUẢ X-QUANG, PHIẾU CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH, 

- Chọn máy chủ → Chọn mẫu kết quả (có thể chọn 1 hoặc nhiều mẫu)

1. Chọn máy chủ

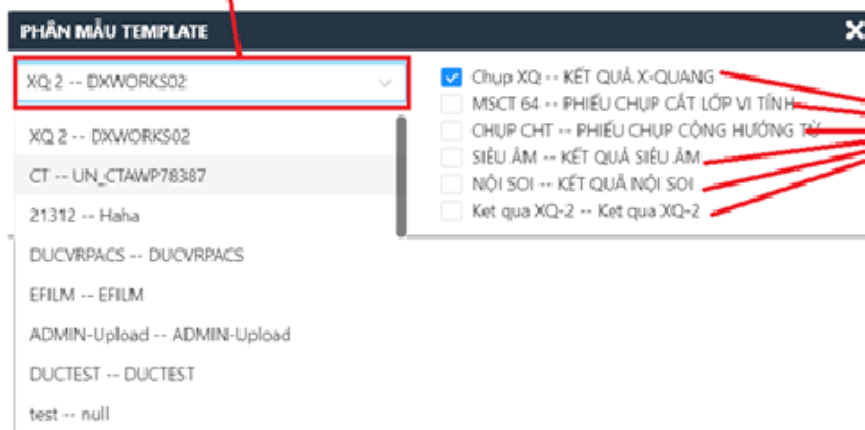

2. Chọn 1 hoặc nhiều mẫu kết quả

2.2.10 Khu vực

* Mở bảng danh sách các chức năng → Chọn chức năng **Khu vực** (Chức năng này giúp quản lý các cơ sở của bệnh viện. Chức năng này tương ứng với thư mục cấp cao nhất ở trang RIS).

Vrpacs Admin

Thống Kê

Bác Sĩ

Bệnh Nhân

Loại Dịch Vụ

Mẫu Kết Quả

Backup

Cấu Hình

Máy chụp PACS

Khu Vực

Thư Mục

Phân Quyền Bác Sĩ

Mẫu In Kết Quả

Vật tư

Keyword

Tìm kiếm

Thêm mới

Cơ sở	Mô tả	Thứ tự	Trạng thái		
CDHA	CDHA	999	☐		
Upload	USER-UPLOAD	950	☒		
HỘI CHẨN (TeleHealth)	Share	900	☒		
BV Đa Khoa	Upload	950	☐		
BV TỈNH QUẢNG NINH	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh	1	☒		
BV SẢN NHI	Bệnh viện Sản nhi Tỉnh Quảng Ninh	2	☒		
BV BÃI CHÁY	BV Bãi Cháy	3	☒		
TTYT CỎ TỎ	Trung tâm y tế Huyện Cỏ Tỏ	4	☒		
BV PHCN	Bệnh viện Phục hồi chức năng Tỉnh Quảng Ninh	30	☒		
BV BVSX TÂM THẦN	BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN	6	☒		

<

1

2

3

4

>

Go to

* **Tìm kiếm:** Nhập từ khóa cần tìm → **Ấn Tìm kiếm**

Keyword

* **Thêm mới:** Click vào ô **Thêm mới** → Nhập thông tin vào ô cần thiết → Click nút **Thêm mới**

THÊM MỚI CƠ SỞ ✕

Tên:

Mô tả:

Thứ tự:

Cơ sở:

* **Chỉnh sửa :** Click vào nút  → Điền thông tin cần sửa lại → **Lưu lại**

CẬP NHẬT THÔNG TIN ✕

Tên:

Mô tả:

Thứ tự:

Cơ sở:


* Vô hiệu hóa khu vực: Click vào nút  → Click **OK**.

 Xác nhận vô hiệu hóa Test123

1

☒

* **Xóa :** Click vào nút  → ấn **OK**

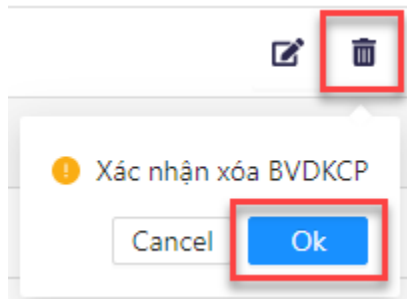

2.2.11 Thư mục

* Mở bảng danh sách các chức năng → Chọn chức năng **Thư mục** (Chức năng này giúp quản lý các thư mục nằm bên trong của các cơ sở. Chức năng này tương ứng với thư mục cấp 2 ở trang RIS).

Vrpacs Admin

Keyword: Tất cả Tất cả **Tìm kiếm** **Thêm mới**

Tên thư mục	Địa chỉ	Loại thư mục	Cơ sở	Thứ tự	Trạng thái		
0	0	Bình thường		0	☒		
ADMIN	Upload of admin	Bình thường		0	☒		
CHT (MRI) CS 03		Bình thường	TT CDHA CƠ SỞ 03	0	☒		
Invisible	Invisible	Bình thường		0	☐		
admin-Upload	User admin upload folder	Bình thường	Upload	1	☒		
adminduc-Upload	User adminduc upload folder	Bình thường	Upload	1	☒		
adminnam-Upload	User adminnam upload folder	Bình thường	Upload	1	☒		
bschau-Upload	User bschau upload folder	Bình thường	Upload	1	☒		
BV TỈNH	Quảng Ninh	Share	CHUYỂN VIỆN	1	☒		
CDHA	HÀ NỘI	Bình thường	BVDKHN	1	☒		

< 1 2 3 4 5 ... 13 > 10 / page Go to

* **Tìm kiếm:** Tìm kiếm theo từ khóa, theo loại thư mục và tên Khu vực

Keyword: Tất cả Tất cả **Tìm kiếm** **Thêm mới**

Tên thư mục	Loại
0	Bình

Tất cả **Tất cả**

Tất cả **Upload** **HỘI CHẨN (TeleHealth)**

Normal **Favorite** **Share**

* **Thêm mới:** Click nút **Thêm mới** → Nhập đủ thông tin → Click **Thêm mới**

Tất cả

Tìm kiếm
Thêm mới

THÊM MỚI THƯ MỤC

Tên:

Vị trí:

Loại thư mục:

Normal

Thứ tự:

0

Cơ sở:

Upload

Thêm mới

- * **Lưu ý:** Thư mục có 3 loại :
- + **Normal** → Số thứ tự để bình thường.
 - + **Share** → Số thứ tự để **900**
 - + **Upload** → Số thứ tự để **950**

* **Chỉnh sửa :** Click vào nút  → Điền thông tin cần sửa lại → **Lưu lại**

CẬP NHẬT THÔNG TIN THƯ MỤC

Tên:

0

Vị trí:

0

Loại thư mục:

Normal


Cơ sở:

Thứ tự:


0

Lưu lại

* Vô hiệu hóa khu vực: Click vào nút  → Click **OK**.

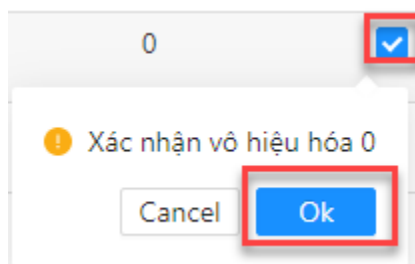

* **Xóa** : Click vào nút  → ấn **OK**

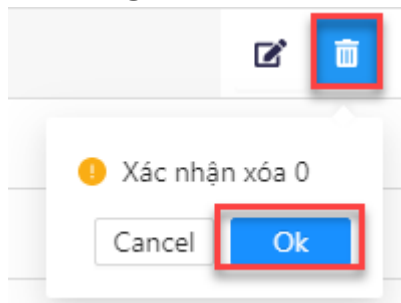

2.2.12 Phân quyền Bác sĩ

* Mở bảng danh sách các chức năng → Chọn chức năng **Phân quyền bác sĩ** (Chức năng này giúp quản lý các quyền của người dùng(bác sĩ,KTV) ở trang RIS). Các quyền bao gồm:

- Chỉ xem
- Đọc kết quả
- Duyệt kết quả
- Hội chẩn
- Hủy hội chẩn
- Chính sửa kết quả
- Xóa ca chụp
- Cập nhật thông tin từ HIS
- Chia sẻ ca chụp
- Thông kê báo cáo
- Hủy duyệt ca bất kỳ

Tên	Cơ sở	Thư mục	Máy chụp	Chỉ xem	Đọc	Duyệt	Hội chẩn	Hủy hội chẩn	Chính sửa	Xóa	Cập nhật từ HIS	Chia sẻ	Thông kê	Hủy duyệt
HỘI CHẨN (TeleHealth)	NGOẠI VIỆN	Tiểu hóa	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
HỘI CHẨN (TeleHealth)	NỘI VIỆN	Liên Khoa	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
HỘI CHẨN (TeleHealth)	NỘI VIỆN	HỘI CHẨN	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Hiển thị thêm														
HỘI CHẨN (TeleHealth)	NGOẠI VIỆN	Tiểu hóa	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
HỘI CHẨN (TeleHealth)	NỘI VIỆN	Liên Khoa	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
HỘI CHẨN (TeleHealth)	NỘI VIỆN	HỘI CHẨN	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Hiển thị thêm														
HỘI CHẨN (TeleHealth)	NGOẠI VIỆN	Tiểu hóa	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
HỘI CHẨN (TeleHealth)	NỘI VIỆN	Liên Khoa	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
HỘI CHẨN (TeleHealth)	NỘI VIỆN	HỘI CHẨN	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Hiển thị thêm														

* **Tìm kiếm** : Nhập email hoặc họ tên của Bác sĩ cần tìm, hoặc theo nhóm quyền → Click **Tìm kiếm**

Email & Họ tên

Tất cả

Tìm kiếm

Thêm mới

Phân quyền theo nhóm

Tất cả

DoctorOnlyRead

DoctorApproved

Technician

SuperAdmin

Hội chẩn

View Only

AABBCC

	Máy chụp	Chỉ xem	Đọc	Duyệt	Hội c
CT1		☒	☐	☐	☒
MR1		☒	☐	☐	☒
CTBCQN		☒	☐	☐	☒
CT1		☐	☒	☒	☒
MR1		☐	☒	☒	☒

* **Thêm mới:** Click vào nút thêm mới → Chọn quyền cần phân quyền → **Cột bên phải** là các **máy chụp**, hàng trên là các **quyền của người dùng**. Nếu muốn **chọn tất cả** một cột hoặc một hàng, **chọn vào tên** của quyền hoặc tên của máy chụp đó.

Tất cả

Tìm kiếm

Thêm mới

Phân quyền theo nhóm

THÊM QUYỀN CHO BÁC SĨ

Khu vực	Thư mục	Tên	Chỉ xem	Đọc	Duyệt	Hội chẩn	Hủy hội chẩn	Chỉnh sửa	Cập nhật từ HIS	Xóa	Chia sẻ	Thống kê	Hủy duyệt
TRUNG TÂM CDHA	CHT (MRI)	MRI 3.0 Tesla	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TRUNG TÂM CDHA	CHT (MRI)	MRI 1.5 Tesla	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TRUNG TÂM CDHA	CLVT (CT Scanner)	CT 128	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TRUNG TÂM CDHA	CLVT (CT Scanner)	CT 16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TRUNG TÂM CDHA	Nội Soi (Endoscopy)	EO-103	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TRUNG TÂM CDHA	Siêu Âm (UltraSound)	US - 308	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TRUNG TÂM CDHA	Siêu Âm (UltraSound)	US - 207	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TRUNG TÂM CDHA	Siêu Âm (UltraSound)	US - 104	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TRUNG TÂM CDHA	X-QUANG (X-Ray)	MAMMO 105	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TRUNG TÂM CDHA	X-QUANG (X-Ray)	X-Ray 105	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TRUNG TÂM CDHA	X-QUANG (X-Ray)	X-Ray 101	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TRUNG TÂM CDHA	YHHN (Nuclear medicine)	PET-CT 108	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TT CDHA CƠ SỞ 02	CLVT (CT Scanner) CS 02	CT 64 CS02	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Save

* **Chỉnh sửa :** Click vào nút  → Tích vào ô quyền cần sửa lại → **Lưu lại**

2.2.13 Mẫu in kết quả

* Mở bảng danh sách các chức năng → Chọn chức năng **Mẫu in kết quả** (Chức năng này giúp quản lý các mẫu in của bệnh viện).

* **Tìm kiếm** : Nhập từ khóa cần tìm → Click **Tìm kiếm**.



A search bar with a light gray background and a red border. Inside the bar is the placeholder text "Từ khóa". To the right of the bar is a dark blue button with white text that says "Tìm kiếm".

* **Thêm mới** : Click nút **Thêm mới** → Nhập thông tin mẫu in mới vào các ô tương ứng → Ấn **Thêm mới**.



A form titled "THÊM MỚI MẪU IN" with a close button (X) in the top right corner. The form contains several input fields, each with a red border, and an "Upload" button. The fields are labeled as follows: "Tên:", "Tiêu đề 1:", "Tiêu đề 2:", "Bệnh viện:", "Khoa phòng:", "Địa chỉ:", "Điện thoại:", "Ghi chú:", and "Mẫu Layout:". The "Logo:" field has an "Upload" button next to it. At the bottom right of the form is a blue button labeled "Thêm mới".

* **Chỉnh sửa** : Click vào nút  → Điền vào ô thông tin cần sửa lại → **Lưu lại**

SỬA THÔNG TIN BÁC SĨ

Tên: AAA

Tiêu đề 1: KẾT QUẢ

Tiêu đề 2:

Bệnh viện: Công ty cổ phần Công nghệ C+

Khoa phòng: Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Địa chỉ: Số 1, ngõ 31, đường 18M, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông.

Điện thoại:


Ghi chú:

Mẫu Layout: Template

Logo: Upload

Lưu lại

* **Xóa** : Click vào nút  → ấn OK

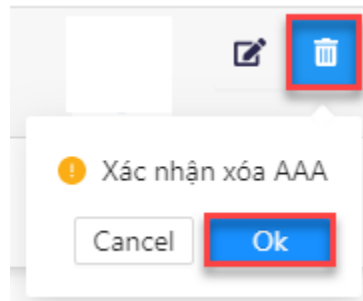

2.2.14 ICD

* Mở bảng danh sách các chức năng → Chọn chức năng **ICD** (Chức năng này giúp quản lý các chỉ định từ HIS và các mẫu kết quả ở Pacs. Khi có một chỉ định được gửi lên từ HIS, bác sĩ thực hiện đọc kết quả trên RIS, chỉ định sẽ được gán mẫu kết quả tương ứng với loại chỉ định đó).

Vypacs Admin

Bệnh nhân

Chỉ định

Dịch vụ kỹ thuật

Loại dịch vụ

Mẫu kết quả

Backup

Cấu hình

Máy chủ Pacs

Khu vực

Thư mục

Phân quyền

Mẫu in kết quả

ICD

Từ khóa

Chọn dịch vụ

Tìm kiếm

Thêm mới

Quản lý mẫu ICD

Mã	Tên	Loại dịch vụ	Mẫu	Trạng thái
1	CHỤP CT SCANNER 64 DÂY	PHIẾU CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH	Tim phổi, 1521351,	☒
2	SIÊU ÂM TIM	KẾT QUẢ X-QUANG	Tim phổi, Ổ bụng,	☒
CT0045	CHỤP CT SCANNER 128 DÂY	PHIẾU CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH		☒
đdđđđđ	★ ★ ★ ★ ★	KẾT QUẢ X-QUANG		☒
đdđđđđ	đdđđđđ	KẾT QUẢ X-QUANG		☒
XQ260	CHỤP VÀ CÁN THIẾP ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC DƯỚI XQUANG TẮNG SÁNG	KẾT QUẢ X-QUANG	Tim phổi,	☒
XQ062	CHỤP VÀ NÚT MẠCH ĐIỀU TRỊ U GAN SỐ HÓA XÓA NÉN	KẾT QUẢ X-QUANG		☐
YC5A046	SIÊU ÂM TUYẾN GIÁP sdsd	KẾT QUẢ X-QUANG	Nội Soi Đại Trĩng,	☐

<

1

>

Go to

* **Tìm kiếm** : Tìm kiếm theo từ khóa, theo Dịch vụ → Click **Tìm kiếm**

Từ khóa

Chọn dịch vụ

Nội soi

Siêu Âm

XQ

CT

Tìm kiếm

Thêm mới

Quản lý mẫu ICD

Tên

Mẫu

0 > Go to

* **Thêm mới** : Chọn **Thêm mới**

Từ khóa

Chọn dịch vụ

Tìm kiếm

Thêm mới

Quản lý mẫu ICD

Mã	Tên	Loại dịch vụ	Mẫu	Trạng thái
1	CHỤP CT SCANNER 64 DÂY	Chọn Thêm mới	Tim phổi, 1521351,	☒
2	SIÊU ÂM TIM	KẾT QUẢ X-QUANG	Tim phổi, Ổ bụng,	☒
CT0045	CHỤP CT SCANNER 128 DÂY	PHIẾU CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH		☒
dsfdfd	☆☆☆	KẾT QUẢ X-QUANG		☒
dsfdfds	dsfdsf	KẾT QUẢ X-QUANG		☒
XQ060	CHỤP VÀ CÁN THIẾP ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC DƯỚI XQUANG TẮNG SÁNG	KẾT QUẢ X-QUANG	Tim phổi,	☒
XQ062	CHỤP VÀ NÚT MẠCH ĐIỀU TRỊ U GAN SỐ HÓA XÓA NỀN	KẾT QUẢ X-QUANG		☐
YCSA046	SIÊU ÂM TUYẾN GIÁP sdsd	KẾT QUẢ X-QUANG	Nội Soi Đại Tràng,	☐

< 1 > Go to

- Nhập các thông tin cần thiết để tạo một mẫu kết quả mới → Bấm **Thêm mới**

Chú ý: Dấu * là bắt buộc. Phần **Loại dịch vụ**, dịch vụ được tạo từ chức năng **Loại dịch vụ**, nếu khi chọn loại dịch vụ mà không có loại dịch vụ theo yêu cầu, vui lòng xem lại mục **2.2.2.7 để tạo mới**.

THÊM MỚI ICD

* Mã:

* Tên:

* Loại dịch vụ: Chọn dịch vụ

Thêm mới

* **Phân mẫu kết quả cho ICD** : Chọn vào icon  để chỉnh sửa ICD

Mã	Tên	Loại dịch vụ	Mẫu	Trạng thái
1	CHỤP CT SCANNER 64 DÂY	PHIẾU CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH	Chọn Phân mẫu cho ICD	
2	SIÊU ÂM TIM	KẾT QUẢ X-QUANG		
CT0045	CHỤP CT SCANNER 128 DÂY	PHIẾU CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH		
dsfd	★ ☆ ◆ ◇ ☆	KẾT QUẢ X-QUANG		
dsfd	dsfd	KẾT QUẢ X-QUANG		
XQ060	CHỤP VÀ CÁN THIẾP ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC DƯỚI XQUANG TĂNG SÁNG	KẾT QUẢ X-QUANG	Tim phổi,	
XQ062	CHỤP VÀ NÚT MẠCH ĐIỀU TRỊ U GAN SỐ HÓA XÓA NỀN	KẾT QUẢ X-QUANG		
YCSA046	SIÊU ÂM TUYẾN GIÁP sdsd	KẾT QUẢ X-QUANG	Nội Soi Đại Tràng,	

1. Chọn lọc theo nhóm dịch vụ

Thêm mẫu kết quả mới trực tiếp

PHÂN MẪU ICD

KẾT QUẢ SIÊU ÂM

2 - SIÊU ÂM TIM

2. Chọn mẫu kết quả

Chọn mẫu

Tim phổi

Ổ bụng

Xóa bỏ gán mẫu kết quả

Chỉnh sửa trực tiếp mẫu kết quả

*** Chỉnh sửa ICD:** Chọn vào icon để chỉnh sửa ICD

Mã	Tên	Loại dịch vụ	Mẫu	Trạng thái
1	CHỤP CT SCANNER 64 DÂY	PHIẾU CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH	Chọn Chỉnh sửa ICD	
2	SIÊU ÂM TIM	KẾT QUẢ X-QUANG	Tim phổi, Ổ bụng,	
CT0045	CHỤP CT SCANNER 128 DÂY	PHIẾU CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH		
dsfd	★ ☆ ◆ ◇ ☆	KẾT QUẢ X-QUANG		
dsfd	dsfd	KẾT QUẢ X-QUANG		
XQ060	CHỤP VÀ CÁN THIẾP ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC DƯỚI XQUANG TĂNG SÁNG	KẾT QUẢ X-QUANG	Tim phổi,	
XQ062	CHỤP VÀ NÚT MẠCH ĐIỀU TRỊ U GAN SỐ HÓA XÓA NỀN	KẾT QUẢ X-QUANG		
YCSA046	SIÊU ÂM TUYẾN GIÁP sdsd	KẾT QUẢ X-QUANG	Nội Soi Đại Tràng,	

- Bảng thông tin sẽ hiện thị và thực hiện chỉnh sửa thông tin, sau khi chỉnh sửa các thông tin hoàn thành → Chọn **Cập nhật**

CẬP NHẬT ICD



Tên: SIÊU ÂM TIM

1

Loại dịch vụ: KẾT QUẢ X-QUANG

2

Cập nhật

3

*** Vô hiệu hóa ICD:** Chọn vào icon để chỉnh sửa ICD

Mã	Tên	Loại dịch vụ	Mẫu	Trạng thái
1	CHỤP CT SCANNER 64 DÂY	PHIẾU CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH	Tim	Chọn Vô hiệu hóa ICD >
2	SIÊU ÂM TIM	KẾT QUẢ X-QUANG	Tim phổi, Ổ bụng,	☒
CT0045	CHỤP CT SCANNER 128 DÂY	PHIẾU CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH		☒
dsfd	★ ☆ ◆ ◇ ☆	KẾT QUẢ X-QUANG		☒
dsfd	dsfd	KẾT QUẢ X-QUANG		☒
XQ060	CHỤP VÀ CAN THIẾP ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC DƯỚI XQUANG TẮNG SÁNG	KẾT QUẢ X-QUANG	Tim phổi,	☒
XQ062	CHỤP VÀ NÚT MẠCH ĐIỀU TRỊ U GAN SỐ HÓA XÓA NỀN	KẾT QUẢ X-QUANG		☐
YCSA046	SIÊU ÂM TUYẾN GIÁP sdsd	KẾT QUẢ X-QUANG	Nội Soi Đại Tràng,	☐

- Chọn **Ok** để ngừng hoạt động

Ngừng hoạt động CT0045?

Cancel

Ok

*** Quản lý mẫu ICD:**

Mã	Tên	Loại dịch vụ	Mẫu	Trạng thái
1	CHỤP CT SCANNER 64 DÂY	PHIẾU CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH	Tim	Chọn quản lý mẫu ICD >
2	SIÊU ÂM TIM	KẾT QUẢ X-QUANG	Tim phổi, Ổ bụng,	☒
CT0045	CHỤP CT SCANNER 128 DÂY	PHIẾU CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH		☒
dsfd	★ ☆ ◆ ◇ ☆	KẾT QUẢ X-QUANG		☒
dsfd	dsfd	KẾT QUẢ X-QUANG		☒
XQ060	CHỤP VÀ CAN THIẾP ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC DƯỚI XQUANG TẮNG SÁNG	KẾT QUẢ X-QUANG	Tim phổi,	☒
XQ062	CHỤP VÀ NÚT MẠCH ĐIỀU TRỊ U GAN SỐ HÓA XÓA NỀN	KẾT QUẢ X-QUANG		☐
YCSA046	SIÊU ÂM TUYẾN GIÁP sdsd	KẾT QUẢ X-QUANG	Nội Soi Đại Tràng,	☐

- Đối với ICD mới tạo → Chọn Phân mẫu mới

PHÂN MẪU ICD

Chọn dịch vụ

Chọn một ICD

Chọn mẫu

1. Chọn lọc nhóm dịch vụ

2. Chọn ICD cần phân mẫu

3. Chọn mẫu kết quả

Mã	Tên	Mẫu kết quả
1	CHỤP CT SCANNER 64 DÂY	Tim phổi, 1521351,
XQ060	CHỤP VÀ CAN THIẾP ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC DƯỚI XQUANG TẮNG SÁNG	Tim phổi,
2	SIÊU ÂM TIM	Tim phổi, Ổ bụng,

KẾT QUẢ X-QUANG
PHIẾU CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH
PHIẾU CHỤP CỘNG HƯỚNG TỬ
KẾT QUẢ SIÊU ÂM
KẾT QUẢ NỘI SOI
Ket qua XQ-2

CHỤP CT SCANNER 128 DÂY
dfsdfs
★ ☆ ◆ ◇ ☆

Tim phổi
Ổ bụng
Nội Soi Đại Tràng
1521351
dinhdt test111
dinhdt test

- Đối với ICD đã được phân mẫu kết quả → Chọn Chỉnh sửa

PHÂN MẪU ICD

PHIẾU CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH

CHỤP CT SCANNER 64 DÂY

Chọn mẫu

1. Chọn lọc nhóm dịch vụ

2. Chọn ICD cần phân mẫu

3. Chọn mẫu kết quả

Chọn chỉnh sửa →

Mã	Tên	Mẫu kết quả
1	CHỤP CT SCANNER 64 DÂY	Tim phổi, 1521351,
XQ060	CHỤP VÀ CAN THIẾP ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC DƯỚI XQUANG TẮNG SÁNG	Tim phổi,
2	SIÊU ÂM TIM	Tim phổi, Ổ bụng,

KẾT QUẢ X-QUANG
PHIẾU CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH
PHIẾU CHỤP CỘNG HƯỚNG TỬ
KẾT QUẢ SIÊU ÂM
KẾT QUẢ NỘI SOI
Ket qua XQ-2

CHỤP CT SCANNER 128 DÂY
dfsdfs
★ ☆ ◆ ◇ ☆

Tim phổi
Ổ bụng
Nội Soi Đại Tràng
1521351
dinhdt test111
dinhdt test

2.2.15 Vật tư

* **Nhập từ khóa** → Click **Tìm kiếm**

* **Thêm mới vật tư** → Click nút **Thêm mới** → Điền thông tin cần thiết → Ấn **Thêm mới**.

THÊM MỚI VẬT TƯ

Tên:

Loại:

Giá:

* **Chỉnh sửa** : Click vào nút → Điền vào ô thông tin cần sửa lại → **Lưu lại**

CẬP NHẬT THÔNG TIN

Tên:

Loại:

Giá:

Trạng thái: ☒

- Nếu muốn vô hiệu hóa click vào nút ☒ để vô hiệu hóa **Vật tư**

* **Xóa** : Click vào nút → ấn **OK**

 Xác nhận xóa Thuốc cản quang