



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ C+

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VRPACS (V.2)

Địa chỉ: Số 1, ngõ 31, đường 18M, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84) 982.603.805 **Email:** contact@vrpacs.com
Website: <http://www.vrpacs.com>

Contents

1. BỘ LỌC VÀ TÌM KIẾM	3
2. ĐỔI MẶT KHẨU	4
3. ĐỔI NGÔN NGỮ	5
4. ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ	5
5. QUẢN LÝ MẪU KẾT QUẢ	6
5.1 ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG	6
5.2 Tìm kiếm-Thêm -Sửa- Xóa cho Mẫu Kết Quả	7
5.2.1 Tìm kiếm	7
5.2.2 Thêm mới	7
5.2.3 Sửa mẫu kết quả	8
5.2.4 Xóa mẫu kết quả	9
6. BÁO CÁO THỐNG KÊ	10
7. ĐĂNG XUẤT TÀI KHOẢN	11
8. TRẢ KẾT QUẢ	11
9. QUY TRÌNH TRẢ KẾT QUẢ	12
Làm lần lượt theo số thứ tự như trong ảnh	12
10. XỬ LÝ ĐỒNG BỘ HIS	14
10.1 Cập nhật ca chụp từ His	14
10.2 Gửi kết quả sang His	16
11. TẢI ẢNH	17
11.1 Tải ảnh của bệnh nhân, tải chuẩn DICOM, tải chuẩn JPEG	17
11.2 Tải toàn bộ danh sách	18
12. QUY TRÌNH HỦY KẾT QUẢ	19
Dùng trong trường hợp (Bệnh nhân đã chụp và gửi hình ảnh lên PACS)	19
13. XÓA CA CHỤP	20
14. CÁC CHẾ ĐỘ CHIA MÀN HÌNH TRONG VRPACS	21
14.1 Chia màn hình Tổng hợp	21
14.2 Chế độ chia 2 màn hình	22
15. THÊM BỆNH NHÂN	28
16. CHIA SẺ CA CHỤP	29
17. XEM LỊCH SỬ KHÁM	30
18. CẬP NHẬT THÔNG TIN LÂM SÀNG	31
19. THÊM CHỈ ĐỊNH	32

1. BỘ LỌC VÀ TÌM KIẾM

The screenshot displays the VRPACS-RIS interface with the following components:


- 1. BỘ LỌC (Filter):** Located at the top left, it includes options for 'ALL Modality', 'CDHA', and 'PACS-AUTOSEN'.
- 2. DANH SÁCH MÁY CHỤP (Scan list):** A sidebar on the left showing a list of scans with status icons (e.g., 'Chưa đọc', 'Đang đọc', 'Đang duyệt').
- 3. TRẠNG THÁI CA CHỤP (Scan status):** A section below the scan list showing a summary of scan counts by status.
- 4. THÔNG TIN CA CHỤP (Scan info):** A section at the bottom left providing details about the selected scan.
- 5. Mã bệnh nhân (Patient ID):** A search field at the top for entering the patient's ID.
- 6. Họ tên bệnh nhân (Patient name):** A search field at the top for entering the patient's name.
- 7. Ngày tháng năm (Date):** A date range selector at the top for filtering scans by date.
- 8. Chi tiết (Details):** A table of scan results with columns for patient ID, name, age, sex, scan type, and status.

#	Mã	Họ tên	Tuổi	Giới tính	Bộ phận chụp	Chẩn đoán	Khoa chỉ định	Bác sĩ chỉ định
1	22015905	THÁI THỊ VỊ PHƯƠNG	48	Nữ	CR -	Cấp Cứu	Hỏa Kim Thư	
2	21033302	ĐOÀN NGỌC ANH THƯ	7	Nữ	JPG -	Răng Trẻ Em	Đỗ Ngọc Anh	
3	22014736	ĐỖ KIM QUYÊN	62	Nữ	CT -	Khám Tổng Hợp - Lão Nha	Lâm Thị Hạnh Đi	
4	22019313	NGUYỄN THỊ KIỀU MY	28	Nữ	PX - SKULL	Cấp Cứu	Lê Thị Thu Trang	
5	22015845	LÊ NGUYỄN PHƯƠNG QUYÊN	20	Nữ	DX - HEAD	Phẫu Thuật Hàm Mặt	La Tấn Hoàng	
6	22018087	NGUYỄN TRẦN KIM HUNG	34	Nữ	JPG -	Khám Tổng Hợp	Huỳnh Nguyễn T	
7	22015845	LÊ NGUYỄN PHƯƠNG QUYÊN	20	Nữ	PX - SKULL	Phẫu Thuật Hàm Mặt	La Tấn Hoàng	
8	21033302	ĐOÀN NGỌC ANH THƯ	7	Nữ	JPG -	Răng Trẻ Em	Đỗ Ngọc Anh	
9	22016236	TRẦN THỊ NGỌC NƯƠNG	63	Nữ	JPG -	Khám Tổng Hợp - Lão Nha	Lâm Thị Hạnh Đi	
10	22018030	PHẠM THỊ KIM CÚC	47	Nữ	JPG -	Khám Tổng Hợp	Khám tổng hợp	
11	22013669	LƯU BÉ BA	41	Nam	CR -	Phẫu Thuật Hàm Mặt	Phòng Khám Hà	
12	22012933	NGUYỄN TRƯƠNG DUC HIẾP	27	Nam	PX - SKULL		Trần Thanh Thái	
13	22015905	THÁI THỊ VỊ PHƯƠNG	48	Nữ	CR -	Cấp Cứu	Hỏa Kim Thư	
14	22018055	LÂM THỊ KIM THANH	53	Nữ	JPG -	Khám Tổng Hợp	Khám tổng hợp	
15	22015079	BUI ĐỨC TUẤN	30	Nam	CT -	Khám Tổng Hợp	Nguyễn Văn Trơ	
16	22010680	NGUYỄN MINH THANH	58	Nam	JPG -	Khám Tổng Hợp	Lê Thị Thu Trang	
17	22013875	NGUYỄN ANH KHA	26	Nam	CR -	Khám Tổng Hợp	Nguyễn Văn Trơ	
18	22012333	LÊ THỊ HỒNG	60	Nữ	JPG -	Khám Tổng Hợp - Lão Nha	Lâm Thị Hạnh Đi	
19	22012045	NGUYỄN LÂM THIAN PHAT	23	Nam	DX - SKULL	Khám Tổng Hợp	Nguyễn Văn Trơ	

- (1) - Tổng số ca chụp
- (2) - Danh S Máy chụp
- (3) - Trạng thái ca chụp
- (4) - Thông tin ca chụp
- (5) - Tìm kiếm Mã bệnh nhân
- (6) - Tìm kiếm Họ tên bệnh nhân
- (7) - Tìm kiếm theo ngày tháng năm
- (8) - Tìm kiếm chi tiết

2. ĐỔI MẬT KHẨU

Bước 1: click vào **biểu tượng hình nhân** góc phải màn hình

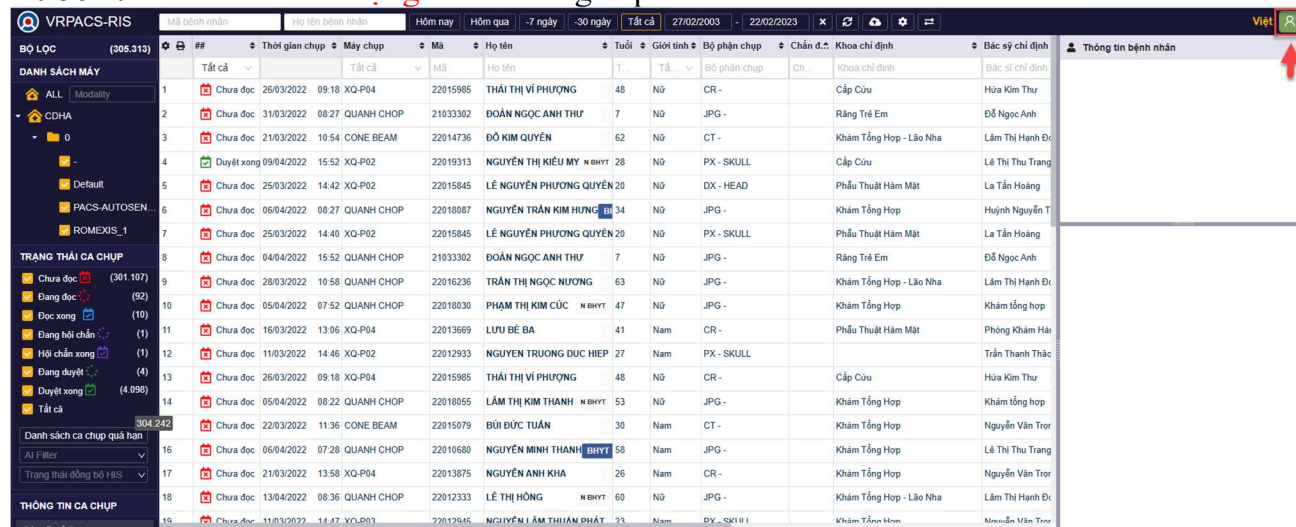

Bước 2: Click vào **đổi mật khẩu**




3. ĐỔI NGÔN NGỮ



B1: Click vào biểu tượng hình nhân

B2: Click chọn “Đổi ngôn ngữ”

4. ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

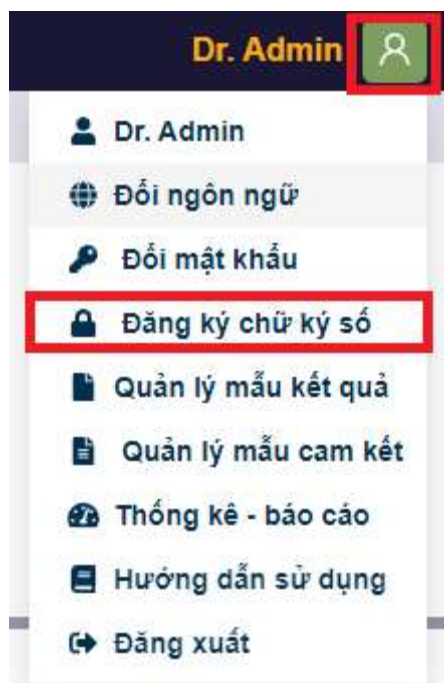A screenshot of a form titled 'Đăng ký chữ ký số' (Register digital signature) with a close button (X) in the top right corner. The form contains two input fields: the first is labeled 'Appld' and the second is labeled 'Secret'. Below the input fields, there are two buttons: a blue button labeled 'Đăng ký' (Register) and a light blue button labeled 'Thay đổi' (Change). The 'Đăng ký' button is highlighted with a red rectangular box.

B1: Click vào biểu tượng hình nhân

B2: Click “Đăng ký chữ ký số”

B3: Điền thông tin rồi chọn “Đăng ký”

5. QUẢN LÝ MẪU KẾT QUẢ

5.1 ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

B1: Click chuột trái vào Thông tin tài khoản.

B2: Click chọn mục “Quản lý mẫu kết quả”



Tại trang **Quản lý mẫu kết quả** sẽ hiển thị

Quản lý mẫu kết quả

1. Từ khóa 2. Chọn dịch vụ 3. Tìm kiếm 4. Thêm mới 5.

Tên	Tên dịch vụ	Kỹ thuật	Kết quả	Trạng thái	Mô tả
CT_Bụng_Cổ Tiêm	CẮT LỚP VI TINH MED	Chụp cắt lớp vi tính (C.T scanner) ổ bụng, từ vòm hoành đến tiểu khung, độ dày lớp cắt 5mm. Có tiêm thuốc cản quang	Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ổ bụng hiện tại không thấy dấu hiệu bất thường.	☒	- Gan: kích thước bình thường, bờ đều. Nhu mô gan đồng nhất. Không thấy khối cholan chỗ. - Tĩnh mạch cửa: đường kính bình thường, không thấy huyết khối. - Đường mật trong gan: không giãn, thành đều, không thấy sỏi cản quang, không thấy khối bất thường. - Đường mật ống mật chủ: không giãn, thành đều, không thấy sỏi cản quang, không thấy khối bất thường. - Túi mật: kích thước bình thường, thành đều, không thấy khối cholan chỗ. Trong lòng không thấy sỏi cản quang. Xung quanh túi mật không tụ dịch, không thấy thâm nhiễm mỡ. - Tụy: kích thước đầu tụy, thân tụy, đuôi tụy trong giới hạn bình thường. Nhu mô đồng nhất, không thấy khối cholan chỗ, không thấy vôi hóa. Ống tụy không giãn, không có sỏi cản quang. Bờ tụy đều, xung quanh không tụ dịch, không thấy thâm nhiễm mỡ. - Lách: kích thước bình thường, bờ đều. Nhu mô lách đồng nhất. Xung quanh lách không tụ dịch. - Tuyến thượng thận phải: hình dạng và kích thước bình thường. Không thấy khối cholan chỗ. - Thận phải: kích thước bình thường, bờ đều. Nhu mô thận đồng nhất, không thấy khối cholan chỗ. Đài bể thận không giãn, không có sỏi cản quang. Nhiều quai không giãn, không thấy sỏi cản quang. - Tuyến thượng thận trái: hình dạng và kích thước bình thường. Không thấy khối cholan chỗ. - Thận trái: kích thước bình thường, bờ đều. Nhu mô thận đồng nhất, không thấy khối cholan chỗ. Đài bể thận không giãn, không có sỏi cản quang. Nhiều quai không giãn, không thấy sỏi cản quang. - Bàng quang: thành đều, không thấy khối cholan chỗ. Trong lòng không thấy sỏi cản quang. - Động mạch chủ bụng: đường kính bình thường, không thấy phồng giãn động mạch, không thấy bóc tách nội mạc. Các động mạch chậu hai bên không thấy bất thường. - Các quai ruột: không giãn, không thấy dịch giữa các quai ruột. - Không thấy hạch to trong ổ bụng và khoang sau phúc mạc. - Không có dịch, khí tự do ổ bụng.
CT_Bụng_Cổ Tiêm	CẮT LỚP VI TINH MED	Chụp cắt lớp vi tính (MSCT) ổ bụng, độ dày 1.5mm. Có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch	Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ổ bụng hiện tại không thấy dấu hiệu bất thường.	☒	- Gan: kích thước bình thường, bờ đều. Nhu mô gan đồng nhất. Không thấy khối cholan chỗ. - Tĩnh mạch cửa: đường kính bình thường, không thấy huyết khối. - Đường mật trong gan: không giãn, thành đều, không thấy sỏi cản quang, không thấy khối bất thường. - Đường mật ống mật chủ: không giãn, thành đều, không thấy sỏi cản quang, không thấy khối bất thường.

1. Nhập “Từ khóa”
2. Chọn “Chọn dịch vụ”
3. Chọn **Tìm kiếm**
4. Thêm mới **Mẫu kết quả**
5. Danh sách các **mẫu kết quả** được gán theo tài khoản

5.2 Tìm kiếm-Thêm -Sửa- Xóa cho Mẫu Kết Quả

5.2.1 Tìm kiếm

- Tìm kiếm theo từ khóa

B1: Nhập từ khóa cần tìm kiếm

B2: Click chọn mục “Tìm kiếm”

Sau đó danh sách sẽ hiển thị các thông tin lọc được.

Quản lý Mẫu kết quả

1 2 3

Tên	Tên dịch vụ	Kỹ thuật	Kết quả	Trạng thái	Mô tả
Cổ tay chấn thương	Kết quả MRI	Chụp CHT cổ tay trái với các chuỗi xung: T1 SE coronal và axial, T2 PD FS 3 mặt phẳng.	Hình ảnh đáp-rạch sụn sợi tam giác và dập xương mỏm trâm trụ. Không thấy mảnh xương rời.	☒	- Sụn sợi tam giác: không thấy vỡ dập. - Mỏm trâm trụ và đầu dưới xương trụ: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Mỏm trâm quay và đầu dưới xương quay: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Nhóm xương thuyền, nguyệt, tháp, đầu: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Nhóm xương thang, thể, cầ, móc: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Các xương bàn ngón: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Các nhóm gân dưới: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Các nhóm gân gấp: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Không thấy dập-tu máu các cơ vùng cổ tay. - Không thấy tràn dịch trong khớp cổ tay.
Cổ tay	Kết quả MRI	Chụp CHT khớp cổ chân phải với các chuỗi xung: T1 SE sagittal, T2 PD FS coronal, sagittal và axial. Không tiêm thuốc đối quang từ.	Chấn thương	☒	- Xương: không thấy vỡ dập xương. - Khớp chày-sén: các sụn khớp vòm sên và trần chày: còn tốt. - Các khớp dưới sên trước và sau: không thấy tổn thương. - Các khớp khác: sên-ghe, gót-hộp không thấy tổn thương. - Xoang cổ chân: còn tốt. - Các dây chằng chày mác: còn tốt. - Phức hợp dây chằng bên: Dây chằng sên mác trước: còn tốt. Dây chằng sên mác sau: còn tốt. Dây chằng mác gót: còn tốt. - Phức hợp dây chằng Delta: dây chằng chày gót: bình thường. Bó sấu (dây chằng chày sên trước, dây chằng chày sên sau: còn tốt. - Các gân mác dài, mác ngắn: không thấy tổn thương. - Các gân chày sau, gân gấp dài ngón cái và gân gấp dài các ngón chân: không thấy tổn thương. - Các gân chày trước, gân duỗi dài ngón cái và gân duỗi dài các ngón chân: không thấy tổn thương. - Gân Achilles: còn tốt. - Cân gan bàn chân: bình thường. - Dịch khớp cổ chân: ít dịch mỏng. - Phần mềm: không thấy khối bất thường.

- Tìm kiếm theo dịch vụ

B1: Chọn 1 trong danh sách các dịch vụ có sẵn

B2: Click chọn tìm kiếm

Sau đó danh sách sẽ hiển thị các thông tin lọc được.

Quản lý Mẫu kết quả

1 2 3

Từ khóa

Chọn dịch vụ

Kết quả MRI
Kết quả Siêu âm
Kết quả X-Quang
Mẫu kết quả đo loãng xương
Kết Quả Nội soi

Tên	Tên dịch vụ	Kỹ thuật	Kết quả	Trạng thái	Mô tả
Cổ tay chấn thương	Kết quả MRI	Chụp CHT cổ tay trái với các chuỗi xung: T1 SE coronal và axial, T2 PD FS 3 mặt phẳng.	Hình ảnh đáp-rạch sụn sợi tam giác và dập xương mỏm trâm trụ. Không thấy mảnh xương rời.	☒	- Sụn sợi tam giác: không thấy vỡ dập. - Mỏm trâm trụ và đầu dưới xương trụ: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Mỏm trâm quay và đầu dưới xương quay: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Nhóm xương thuyền, nguyệt, tháp, đầu: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Nhóm xương thang, thể, cầ, móc: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Các xương bàn ngón: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Các nhóm gân dưới: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Các nhóm gân gấp: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Không thấy dập-tu máu các cơ vùng cổ tay. - Không thấy tràn dịch trong khớp cổ tay.
Cổ tay	Kết quả MRI	Chụp CHT khớp cổ chân phải với các chuỗi xung: T1 SE sagittal, T2 PD FS coronal, sagittal và axial. Không tiêm thuốc đối quang từ.	Chấn thương	☒	- Xương: không thấy vỡ dập xương. - Khớp chày-sén: các sụn khớp vòm sên và trần chày: còn tốt. - Các khớp dưới sên trước và sau: không thấy tổn thương. - Các khớp khác: sên-ghe, gót-hộp không thấy tổn thương. - Xoang cổ chân: còn tốt. - Các dây chằng chày mác: còn tốt. - Phức hợp dây chằng bên: Dây chằng sên mác trước: còn tốt. Dây chằng sên mác sau: còn tốt. Dây chằng mác gót: còn tốt. - Phức hợp dây chằng Delta: dây chằng chày gót: bình thường. Bó sấu (dây chằng chày sên trước, dây chằng chày sên sau: còn tốt. - Các gân mác dài, mác ngắn: không thấy tổn thương. - Các gân chày sau, gân gấp dài ngón cái và gân gấp dài các ngón chân: không thấy tổn thương. - Các gân chày trước, gân duỗi dài ngón cái và gân duỗi dài các ngón chân: không thấy tổn thương. - Gân Achilles: còn tốt. - Cân gan bàn chân: bình thường. - Dịch khớp cổ chân: ít dịch mỏng. - Phần mềm: không thấy khối bất thường.

5.2.2 Thêm mới

B1: Chọn mục Thêm mới

Sau đó sẽ hiển thị form thông tin để thêm mới

Quản lý Mẫu kết quả

Từ khóa: Chọn dịch vụ:

Tên

Tên dịch vụ

Cổ tay chấn thương

Kết quả MRI

C

F

Tên

Tên dịch vụ

Cổ tay

Kết quả MRI

C

F

Tên

Tên dịch vụ

khớp cổ tay

Kết quả MRI

C

F

Tên:

Dịch vụ:

Kỹ thuật:

Mô tả:

Kết quả:

- Mổm trầm quay và đầu dưới xương quay: bình thường
- Nhóm xương thuyền, nguyệt, thấp, đầu: không thấy tổn thương xương
- Nhóm xương thang, thể, cá, móc: không thấy tổn thương xương
- Các xương bàn ngón: còn tốt

1. Nhập tên mẫu kết quả
2. Chọn 1 loại dịch vụ có sẵn (chú ý: mũi trỏ xuống trong phần ô vuông)
3. Nhập Kỹ thuật
4. Nhập Mô tả
5. Nhập Kết quả
6. Click chọn “Thêm mới”

5.2.3 Sửa mẫu kết quả

B1: Chọn vào phần đã được đánh dấu như ảnh dưới

Tên	Tên dịch vụ	Kỹ thuật	Kết quả	Trạng thái	Mô tả
Cổ tay chấn thương	Kết quả MRI	Chụp CHT cổ tay trái với các chuỗi xung: T1 SE coronal và axial, T2 PD FS 3 mặt phẳng	Hình ảnh đáp-rạch sụn sợi tam giác và dập xương móm trầm trụ. Không thấy mảnh xương rời.	☒	- Sụn sợi tam giác: không thấy vỡ dập. - Mổm trầm trụ và đầu dưới xương trụ: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Mổm trầm quay và đầu dưới xương quay: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Nhóm xương thuyền, nguyệt, thấp, đầu: không thấy tổn thương xương. - Nhóm xương thang, thể, cá, móc: không thấy tổn thương xương. - Các xương bàn ngón: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp. - Các nhóm gân dưới: không thấy tổn thương và sụn khớp. - Các nhóm gân gấp: không thấy tổn thương và sụn khớp. - Không thấy dập-tụ máu các cơ vùng cổ tay - Không thấy tràn dịch trong khớp cổ tay
Cổ tay	Kết quả MRI	Chụp CHT khớp cổ chân phải với các chuỗi xung: T1 SE sagittal, T2 PD FS coronal, sagittal và axial. Không tiêm thuốc đối quang từ.	Chấn thương	☒	- Xương: không thấy vỡ dập xương. - Khớp chày-sén: các sụn khớp vòm sên và trần chày: còn tốt - Các khớp dưới sên trước và sau: không thấy tổn thương - Các khớp khác: sên-ghe, gót-hộp: không thấy tổn thương - Xoang cổ chân: còn tốt

Sau đó sẽ xuất hiện form thông tin

B2: Chỉnh sửa theo mong muốn

Sửa mẫu kết quả

Tên : Cổ tay chấn thương

Dịch vụ : Kết quả MRI

Kỹ thuật : Chụp CHT cổ tay trái với các chuỗi xung: T1 SE coronal và axial, T2 PD FS 3 mặt phẳng.

Mô tả :

- Sụn sợi tam giác: không thấy vỡ dập.
- Mỏm trám trụ và đầu dưới xương trụ: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp.
- Mỏm trám quay và đầu dưới xương quay: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp.
- Nhóm xương thuyền, nguyệt, thấp, đầu: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp.
- Nhóm xương thang, thê, cầ, móc: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp.
- Các xương bàn ngón: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp.
- Các nhóm gân duỗi: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp.
- Các nhóm gân gấp: không thấy vỡ dập xương và sụn khớp.
- Không thấy dập-tụ máu các cơ vùng cổ tay.
- Không thấy tràn dịch trong khớp cổ tay.

Kết quả: Hình ảnh đáp-rạch sụn sợi tam giác và dập xương mỏm trám trụ. Không thấy mảnh xương rời.

Lưu lại

B3: Click chọn “**Lưu lại**” để lưu các thông tin đã thay đổi

5.2.4 Xóa mẫu kết quả

Từ khóa

Chọn dịch vụ

Tìm kiếm

Thêm mới

Quản lý Mẫu kết quả

Xác nhận xóa Cốt tay chấn thương

Cancel

OK

Tên	Tên dịch vụ	Kỹ thuật	Kết quả	Trạng thái	Mô tả
Cốt tay chấn thương	Kết quả MRI	Chụp CHT cổ tay trái với các chuỗi xung: T1 SE coronal và axial, T2 PD FS 3 mặt phẳng	Hình ảnh đáp-rách sụn sụn tam giác và đáp xương móm trâm trư. Không thấy mảnh xương rời.	☒	Sụn sụn tam giác: không thấy vỡ đáp. Móm trâm trư và đầu dưới xương trư: không thấy vỡ đáp xương và sụn khớp. Móm trâm quay và đầu dưới xương quay: không thấy vỡ đáp xương và sụn khớp. Nhóm xương thuyền, nguyệt, tháp, đầu: không thấy vỡ đáp xương và sụn khớp. Nhóm xương thang, thê, cầ, móc: không thấy vỡ đáp xương và sụn khớp. Các xương bàn ngón: không thấy vỡ đáp xương và sụn khớp. Các nhóm gân duỗi: không thấy vỡ đáp xương và sụn khớp. Các nhóm gân gấp: không thấy vỡ đáp xương và sụn khớp. Không thấy đáp-tụ máu các cơ vùng cổ tay. Không thấy tràn dịch trong khớp cổ tay.
Cốt tay	Kết quả MRI	Chụp CHT khớp cổ chân phải với các chuỗi xung: T1 SE sagittal, T2 PD FS coronal, sagittal và axial. Không tiêm thuốc đối quang từ.	Chấn thương....	☒	Xương: không thấy vỡ đáp xương. Khớp chày-sên: các sụn khớp vòm sên và trâm chày: còn tốt. Các khớp dưới sên trước và sau: không thấy tổn thương. Các khớp khác: sên-ghe, gót-hóp không thấy tổn thương. Xoang cổ chân: còn tốt. Các dây chằng chày mào: còn tốt. Phức hợp dây chằng bên: dây chằng sên mào trước: còn tốt. Dây chằng sên mào sau: còn tốt. Dây chằng mào gót: còn tốt. Phức hợp dây chằng Delta: dây chằng chày gót: bình thường. Bò sấu (dây chằng chày sên trước, dây chằng chày sên sau): còn tốt. Các gân mào dài, mào ngắn: không thấy tổn thương.

B1: Chọn mẫu cần xóa

B2: Sau đó hiển thị thông báo

Chọn “OK” để xác nhận xóa

Chọn “**Cancel**” để không xóa

6. BÁO CÁO THỐNG KÊ



B1: Click vào biểu tượng hình nhân

B2: Click chọn “Thống kê báo cáo”

Từ 11/07/2022 00:00 Đến 11/07/2022 23:59 **Hôm nay** Hôm qua Tuần 29 Tháng 7 Năm 2022 Tìm theo Thời gian chụp

Chi nhánh: Tất cả Nhóm dịch vụ: Tất cả Vị trí thực hiện: Tất cả Chẩn đoán: Chẩn đoán Bác sĩ duyệt: Tất cả Kỹ thuật viên: Tất cả

Dịch vụ ICD: Tất cả Kết luận: Kết luận Trạng thái: Tất cả Loại đối tượng: Tất cả ☐ Ca chụp quá hạn

Search

[Thống kê chung](#) [Thống kê bác sĩ](#) [Thống kê KTV](#) [Thống kê theo thời gian](#) [Thống kê theo biểu đồ](#) [Thống kê chi tiết](#)

Từ 11/07/2022 đến 11/07/2022

I. Thống kê chung					Xuất Excel	In phiếu
Name	CDHA		Upload	Tổng		
CT	12	0		12		
MIRI	31	0		31		
Tổng	43	0		43		

1. Search


- Cột thời gian
- Chi nhánh
- Nhóm dịch vụ
- Vị trí thực hiện
- Chẩn đoán
- Bác sĩ duyệt
- Kỹ thuật viên
- Dịch vụ ICD
- Kết luận
- Trạng thái
- Loại đối tượng
- Ca chụp quá hạn

3. Xuất Excel, in phiếu

2. Thống Kê

- Thống kê chung
- Thống kê bác sĩ
- Thống kê KTV
- Thống kê theo thời gian
- Thống kê chi tiết

7. ĐĂNG XUẤT TÀI KHOẢN

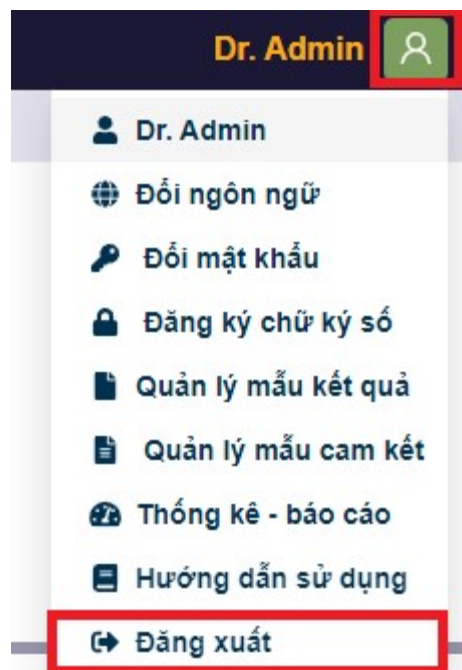


B1: Click vào biểu tượng hình nhân

B2: Click chọn “Đăng xuất”

8. TRẢ KẾT QUẢ

Cách 1: Click chuột phải vào bệnh nhân cần trả kết quả chọn “Nhận đọc”

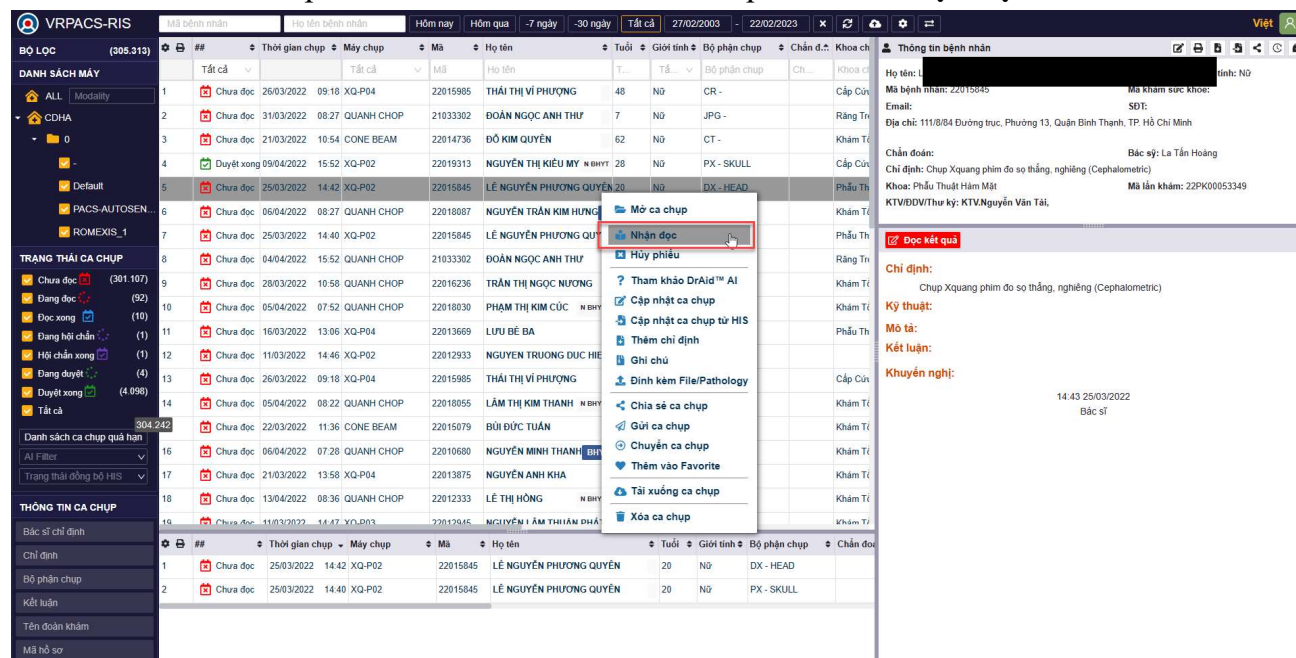

Cách 2: Click chuột phải vào bệnh nhân cần trả kết quả chọn “Mở ca chụp”

1 **Đang đọc** 2 Đọc xong 3 Đang hỏi c 4 Hỏi chẩn x 5 Đang duyệt 6 Duyệt xong

Danh sách chỉ định

Kỹ thuật viên

Chọn chỉ định

Chọn kỹ thuật viên

Chọn vật tư

Mẫu kết quả ☒ Chỉ định ☒ Cá nhân

Chọn mẫu

Kết quả bác sĩ đọc khác

Kỹ thuật thăm khám

Chẩn đoán :

Mô tả hình ảnh

AI **B** *I* U Paragraph

|

I

Chọn ảnh

Lưu (đọc)

Đọc xong

Duyệt

Hủy phiếu

Sau khi điền đầy đủ thông tin người dùng chọn **Duyệt** -> in phiếu (in thường hoặc in gọn)

Sửa (duyet)

Ký số

✓

In

In Gọn

Copy kết quả

Gộp kết quả

Hủy duyệt

10. XỬ LÝ ĐỒNG BỘ HIS

10.1 Cập nhật ca chụp từ His

B1: Click chuột phải vào bệnh nhân -> chọn cập nhật ca chụp từ His

Mã bệnh nhân	Họ tên bệnh nhân	Hôm nay	Hôm qua	-7 ngày	-30 ngày	Tất cả	27/02/2023	-	22/02/2023	x	↺
#	Thời gian chụp	Máy chụp	Mã	Họ tên	Tuổi	Giới tính	Bộ phận chụp	Chẩn đ.	Khoa ch		
Tất cả		Tất cả	Mã	Họ tên	T...	Tổ...	Bộ phận chụp	Ch...	Khoa ch		
1	Chưa đọc	26/03/2022 09:18	XQ-P04	22015985	THÁI THỊ VĨ PHƯƠNG	48	Nữ	CR -	Cấp Cứu		
2	Chưa đọc	31/03/2022 08:27	QUANH CHOP	21033302	ĐOÀN NGỌC ANH THƯ	7	Nữ	JPG -	Răng Tr		
3	Chưa đọc	21/03/2022 10:54	CONE BEAM	22014736	ĐỖ KIM QUYÊN	62	Nữ	CT -	Khám T		
4	Duyệt xong	09/04/2022 15:52	XQ-P02	2201931	NGUYỄN THỊ THUẬN	30	Nữ	PX - SKULL	Cấp Cứu		
5	Chưa đọc	25/03/2022 14:42	XQ-P02	2201584	NGUYỄN THỊ THUẬN	30	Nữ	DX - HEAD	Phẫu Th		
6	Chưa đọc	06/04/2022 08:27	QUANH CHOP	2201808	NGUYỄN THỊ THUẬN	30	Nữ	JPG -	Khám T		
7	Chưa đọc	25/03/2022 14:40	XQ-P02	2201584	NGUYỄN THỊ THUẬN	30	Nữ	PX - SKULL	Phẫu Th		
8	Chưa đọc	04/04/2022 15:52	QUANH CHOP	2103330	NGUYỄN THỊ THUẬN	30	Nữ	JPG -	Răng Tr		
9	Chưa đọc	28/03/2022 10:58	QUANH CHOP	2201623	NGUYỄN THỊ THUẬN	30	Nữ	JPG -	Khám T		
10	Chưa đọc	05/04/2022 07:52	QUANH CHOP	2201803	NGUYỄN THỊ THUẬN	30	Nữ	JPG -	Khám T		
11	Chưa đọc	16/03/2022 13:06	XQ-P04	2201366	NGUYỄN THỊ THUẬN	30	Nam	CR -	Phẫu Th		
12	Chưa đọc	11/03/2022 14:46	XQ-P02	2201293	NGUYỄN THỊ THUẬN	30	Nam	PX - SKULL			
13	Chưa đọc	26/03/2022 09:18	XQ-P04	2201598	NGUYỄN THỊ THUẬN	30	Nữ	CR -	Cấp Cứu		
14	Chưa đọc	05/04/2022 08:22	QUANH CHOP	2201805	NGUYỄN THỊ THUẬN	30	Nữ	JPG -	Khám T		
242	Chưa đọc	22/03/2022 11:36	CONE BEAM	2201507	NGUYỄN THỊ THUẬN	30	Nam	CT -	Khám T		
16	Chưa đọc	06/04/2022 07:28	QUANH CHOP	2201068	NGUYỄN THỊ THUẬN	30	Nam	JPG -	Khám T		
17	Chưa đọc	21/03/2022 13:58	XQ-P04	2201387	NGUYỄN THỊ THUẬN	30	Nam	CR -	Khám T		
18	Chưa đọc	13/04/2022 08:36	QUANH CHOP	2201233	NGUYỄN THỊ THUẬN	30	Nữ	JPG -	Khám T		
19	Chưa đọc	11/03/2022 14:47	XQ-P03	2201294	NGUYỄN THỊ THUẬN	30	Nam	PX - SKULL	Khám T		

Mở ca chụp

Nhận đọc

Hủy duyệt

Cho phép sửa kết quả

Tham khảo DrAid™ AI

Cập nhật ca chụp

Cập nhật ca chụp từ HIS

Thêm chỉ định

Ghi chú

Đính kèm File/Pathology

Chia sẻ ca chụp

Gửi ca chụp

Chuyển ca chụp

Thêm vào Favorite

Tải xuống ca chụp

Xóa ca chụp

Thông tin	Cập nhật	In phiếu	Thêm chỉ định	Cập nhật ca chụp từ HIS	Chia sẻ	Lịch sử	Lâm sàng
Họ tên: NGUYỄN THỊ KIỀU MY				Tuổi: 28		Giới tính: Nữ	
Mã bệnh nhân: 22019313				Mã khám sức khỏe:			
Email:				SĐT:			
Địa chỉ: 90/2 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 09, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh							
Chẩn đoán:				Bác sỹ: Lê Thị Thu Trang			
Chỉ định: Chụp Xquang răng toàn cảnh							
Khoa: Cấp Cứu				Mã lần khám: 22PK00066195			
KTV/ĐDV/Thư ký: KTV.Nguyễn Văn Tài,							

B2: Nhập mã chỉ định -> Tìm kiếm -> Cập nhật

Cập nhật ca chụp từ HIS



Mã chỉ định

Tìm kiếm

10.2 Gửi kết quả sang His

Thông tin

Cập nhật

In phiếu

Thêm chỉ định

Cập nhật ca chụp từ HIS

Chia sẻ

Lịch sử

Lâm sàng

Họ tên:

Tuổi: 28

Giới tính: Nữ

Mã bệnh nhân: 22019313

Mã khám sức khỏe:

Email:

SĐT:

Địa chỉ: S

g 09, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chẩn đoán:

Bác sỹ: Lê Thị Thu Trang

Chỉ định: Chụp Xquang răng toàn cảnh

Mã lần khám:

Khoa: Cấp Cứu

KTV/ĐDV/Thư ký: KTV.Nguyễn Văn Tài,

Duyệt kết quả

Hủy duyệt

Gửi kết quả sang HIS

In có chữ ký

In

Thêm kết luận

Chỉ định:

Chụp Xquang răng toàn cảnh

Kỹ thuật:

PANOREX

Mô tả:

Hình ảnh mất liên tục XHD vùng cằm

Hình ảnh mất liên tục XHD CỔ LÒI CẦU (T)

Kết luận:

GẤY XHD VÙNG CĂM + CỔ LÒI CẦU (T)

Khuyến nghị:

06:57 12/04/2022

Bác sĩ

Phạm Văn Minh

Phạm Văn Minh

lúc 06:57 12/04/2022

11. TẢI ẢNH

11.1 Tải ảnh của bệnh nhân, tải chuẩn DICOM, tải chuẩn JPEG

B1: click chuột phải vào bệnh nhân cần tải ảnh:

Hôm nay Hôm qua -7 ngày -30 ngày Tất cả 27/02/2022

#	##	Thời gian chụp	Máy chụp	Mã	Họ tên	Tuổi	Giới tính
1		26/03/2022 09:18	XQ-P04	22015985	THÁI THỊ VĨ PHƯƠNG	48	Nữ
2		31/03/2022 08:27	QUANH CHOP	21033302	ĐOÀN NGỌC ANH THƯ	7	Nữ
3		21/03/2022 10:54	CONE BEAM	22014736	ĐỖ KIM QUYÊN	62	Nữ
4		09/04/2022 15:52	XQ-P02	22019313	NGUYỄN THỊ KIỀU MY N BHYT	28	Nữ
5		25/03/2022 14:42	XQ-P02	22015845	LÊ N		Ư
6		06/04/2022 08:27	QUANH CHOP	22018087	NGU		Ư
7		25/03/2022 14:40	XQ-P02	22015845	LÊ N		Ư
8		04/04/2022 15:52	QUANH CHOP	21033302	ĐOÀ		Ư
9		28/03/2022 10:58	QUANH CHOP	22016236	TRÁ		Ư
10		05/04/2022 07:52	QUANH CHOP	22018030	PHẠ		Ư
11		16/03/2022 13:06	XQ-P04	22013669	LƯU		am
12		11/03/2022 14:46	XQ-P02	22012933	NGU		am
13		26/03/2022 09:18	XQ-P04	22015985	THÁ		Ư
14		05/04/2022 08:22	QUANH CHOP	22018055	LÂM		Ư
42		22/03/2022 11:36	CONE BEAM	22015079	BÙI		am
16		06/04/2022 07:28	QUANH CHOP	22010680	NGU		am
17		21/03/2022 13:58	XQ-P04	22013875	NGU		am
18		13/04/2022 08:36	QUANH CHOP	22012333	LÊ T		Ư
19		11/03/2022 14:47	XQ-P03	22012945	NGU		am

Mở ca chụp

Nhận đọc

Hủy duyệt

Cho phép sửa kết quả

Tham khảo DrAid™ AI

Cập nhật ca chụp

Cập nhật ca chụp từ HIS

Thêm chỉ định

Ghi chú

Đính kèm File/Pathology

Chia sẻ ca chụp

Gửi ca chụp

Chuyển ca chụp

Thêm vào Favorite

Tải xuống ca chụp

Xóa ca chụp

Bước 2: Chọn tải ảnh (chọn tích xanh để mã hóa thông tin)

Tải xuống ca chụp

☒ Mã hóa thông tin ☒ Ảnh JPG kèm thông tin


Tải chuẩn Dicom

Tải ảnh của bệnh nhân

Tải chuẩn JPEG

11.2 Tải toàn bộ danh sách

B1: Click chuột trái vào **biểu tượng bánh răng cưa** -> Chọn Tải toàn bộ danh sách

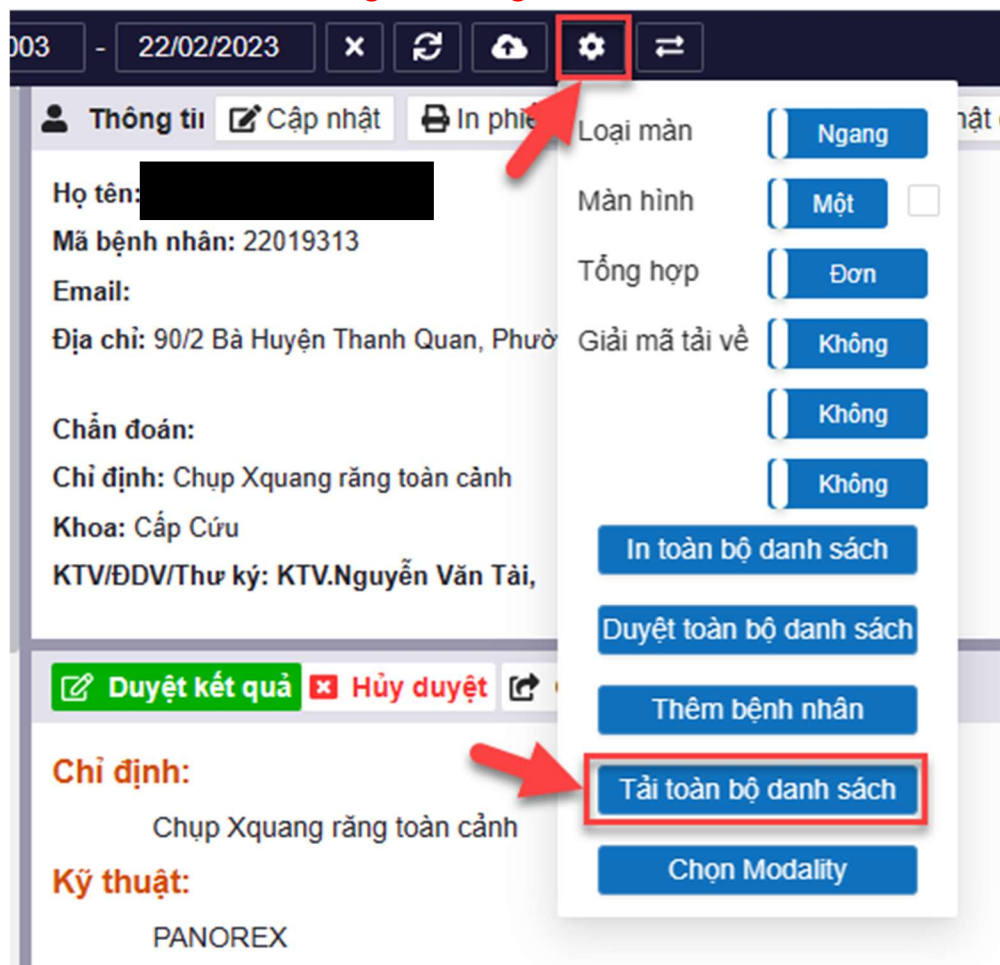

B2: Chọn Tải ảnh (chọn tích xanh để mã hóa thông tin)



12. QUY TRÌNH HỦY KẾT QUẢ

Dùng trong trường hợp (Bệnh nhân **đã chụp** và gửi hình ảnh lên PACS)

B1: Hủy duyệt kết quả trên PACS. Click chuột phải vào bệnh nhân rồi chọn “Hủy duyệt”

Hoặc click chuột vào “Hủy duyệt”

The screenshot displays the PACS interface. On the left, a table lists patients with columns for status, date, time, machine, ID, name, age, and gender. Patient 4, NGUYEN THUKIEU MY, is highlighted. A right-click context menu is open over this patient, with the 'Hủy duyệt' option selected and highlighted by a red box and an arrow. The main panel on the right shows patient details for NGUYEN THUKIEU MY, including age (28), gender (Female), and examination details. At the bottom of the main panel, there are buttons for 'Duyệt kết quả' (Approve result), 'Hủy duyệt' (Cancel review), and 'Gửi kết quả sang HIS' (Send result to HIS). The 'Hủy duyệt' button is also highlighted with a red box and an arrow.

B2: Hủy duyệt trên HIS

B3: Thông báo cho Bác sĩ đọc lại kết quả.

13. XÓA CA CHỤP

Lưu ý: Chức năng “Xóa ca chụp” áp dụng cho ca chụp ở trạng thái “Chưa đọc”, nếu ca chụp đang ở trạng thái khác hãy hủy về trạng thái chưa đọc.

B1: Click chuột phải vào ca chụp cần xóa

B2: Chọn “Xóa ca chụp”

The screenshot displays a medical imaging software interface. At the top, there are search filters for patient ID, name, and date ranges. Below this is a table of scan records. The first record is highlighted with a red box around its status 'Chưa đọc' (Not read). A right-click context menu is open over the table, listing various actions. The 'Xóa ca chụp' (Delete scan) option at the bottom of the menu is highlighted with a red box and a mouse cursor.

##	Thời gian chụp	Máy chụp	Mã	Họ tên	Tuổi	Giới tính
1	26/03/2022 09:18	XQ-P04	22015985	THÁI THI VÍ PHƯỢNG	48	Nữ
2	31/03/2022 08:27	QUANH CH		ANH THU	7	Nữ
3	21/03/2022 10:54	CONE BEA		N	62	Nữ
4	09/04/2022 15:52	XQ-P02		KIỀU MY N BHYT	28	Nữ
5	25/03/2022 14:42	XQ-P02		HƯƠNG QUYÊN	20	Nữ
6	06/04/2022 08:27	QUANH CH		N KIM HƯNG B	34	Nữ
7	25/03/2022 14:40	XQ-P02		HƯƠNG QUYÊN	20	Nữ
8	04/04/2022 15:52	QUANH CH		ANH THU	7	Nữ
9	28/03/2022 10:58	QUANH CH		ĐOC NƯƠNG	63	Nữ
10	05/04/2022 07:52	QUANH CH		I CÚC N BHYT	47	Nữ
11	16/03/2022 13:06	XQ-P04			41	Nam
12	11/03/2022 14:46	XQ-P02		ONG DUC HIEP	27	Nam
13	26/03/2022 09:18	XQ-P04		HƯƠNG	48	Nữ
14	05/04/2022 08:22	QUANH CH		THANH N BHYT	53	Nữ
242	22/03/2022 11:36	CONE BEA		N	30	Nam

- Mở ca chụp
- Nhận đọc
- Hủy phiếu
- Tham khảo DrAid™ AI
- Cập nhật ca chụp
- Cập nhật ca chụp từ HIS
- Thêm chỉ định
- Ghi chú
- Đính kèm File/Pathology
- Chia sẻ ca chụp
- Gửi ca chụp
- Chuyển ca chụp
- Thêm vào Favorite
- Tải xuống ca chụp
- Xóa ca chụp**

14. CÁC CHẾ ĐỘ CHIA MÀN HÌNH TRONG VRPACS


14.1 Chia màn hình Tổng hợp.



Chế độ này cho phép hiển thị giao diện **Worklist** và giao diện **Viewer** hiển thị trên cùng 1 cửa sổ giao diện.

Chọn **Tổng hợp** để chuyển sang chế độ chia màn hình

B1: Chọn mục **cài đặt**.

B2: Tại mục **Tổng hợp** đang ở chế độ **Đơn** (mặc định) chuyển sang chế độ **Tổng hợp**

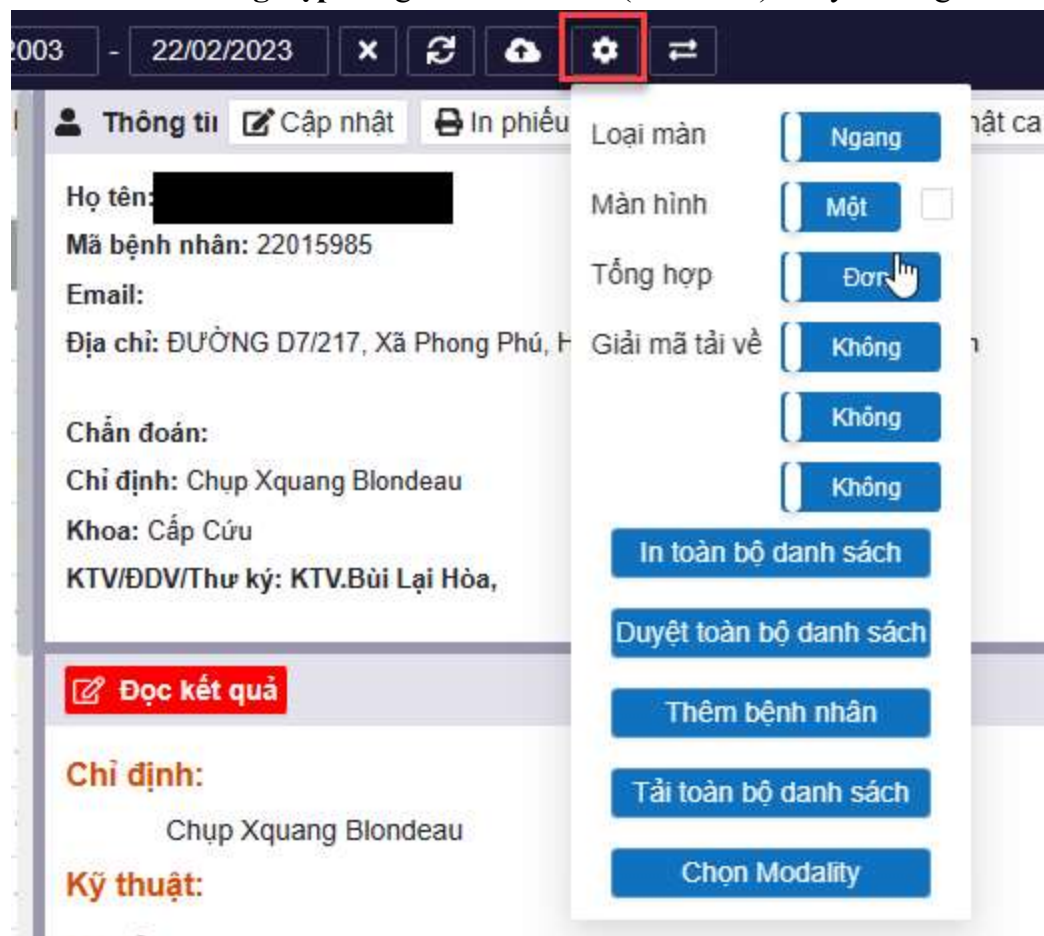

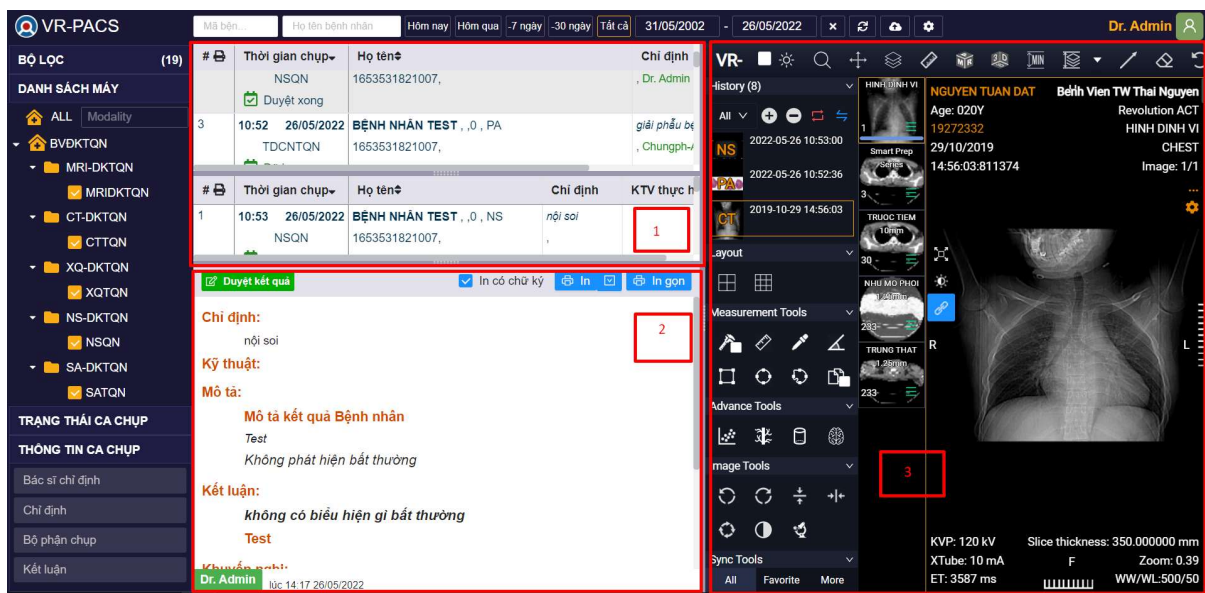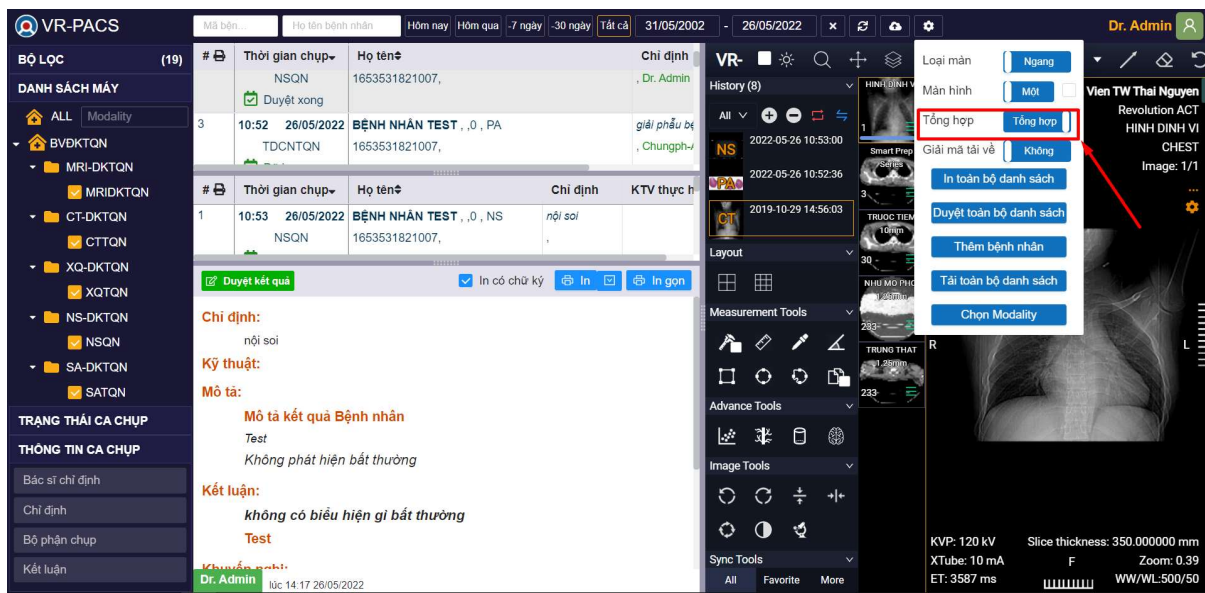

Lúc này màn hình chia thành 3 khu vực:

1. Danh sách bệnh nhân
2. Phần đọc-trả kết quả bệnh nhân
3. View ảnh bệnh nhân

Click chuột trái vào tên bệnh nhân để mở ảnh bệnh nhân bên phải.

Lưu ý: Khi chọn cấu hình **Tổng hợp** ta không thể chọn các chế độ **Loại Màn**, **Màn Hình**

14.2 Chế độ chia 2 màn hình

Chế độ này cho phép hiển thị giao diện **worklist** và giao diện **Viewer** hiển thị trên 2 màn hình khác nhau.

VR-PACS

Mã bệnh nhân

Họ tên bệnh nhân

Hiện nay

Hiện qua

- 7 ngày

- 30 ngày

Tất cả

31/05/2022

26/05/2022

Dr. Admin

BỘ LỌC (19)

DANH SÁCH MÁY

ALL Modality

BVĐKTON

MIR-DKTON

MIRIDKTON

CT-DKTON

CTTON

XIQ-DKTON

XQTON

NS-DKTON

NSQN

SA-DKTON

SATON

TRẠNG THÁI CA CHỤP

THÔNG TIN CA CHỤP

Bác sĩ chỉ định

Chỉ định

Bộ phận chụp

Kết luận

#	Thời gian chụp	Họ tên	Chỉ định
1	14:35 26/05/2022	Live TEST HÀ NỘI , Nữ , 22 , DX	Test
		CT2 2255372400516, TEST	Test, Dx, A
		test	CDHA
2	10:53 26/05/2022	BỆNH NHÂN TEST , Đ , NS	nội soi
		NSQN 1653531821007,	, Dr. Admin
		Duyệt xong	
3	10:52 26/05/2022	BỆNH NHÂN TEST , Đ , PA	giải phẫu
		TDKNTON 1653531821007,	, Chung cư
		Đã in	
4	10:27 26/05/2022	Live LÊ XUAN CAN , Nam , 67 , DX	Điện tim
		TDKNTON 1653534210207,	, Dr. Admin
		Đang đọc	
5	16:39 24/05/2022	██████████ Nam , 48 , DX	
		XQTON 1653388979287, CHEST	
		Chưa đọc	
6	09:38 17/05/2022	BỆNH NHÂN TEST , Đ , ED	
		TDKNTON 1653531821007	

#	Thời gian chụp	Họ tên	Chỉ định	KTV thực
1	10:53 26/05/2022	BỆNH NHÂN TEST , Đ , NS	nội soi	
		NSQN 1653531821007,		
		Duyệt xong		
2	10:52 26/05/2022	BỆNH NHÂN TEST , Đ , PA	giải phẫu bệnh	
		TDKNTON 1653531821007		

Thông tin bệnh nhân

Loại màn

Ngang

Khảm

Lưu ảnh

Màn hình

MIX

Tổng hợp

Đem

Giải mã tài về

không

In toàn bộ danh sách

Duyệt toàn bộ danh sách

Thêm bệnh nhân

Tải toàn bộ danh sách

Chọn Modality

Chi định:

Kỹ thuật:

Mô tả:

Kết luận:


Khuyến nghị:

14:17 26/05/2022

Bác sĩ


Dr. Admin

Để bật được chế độ 2 màn hình cần có 2 màn hình được kết nối vào cùng 1 CPU.
Sau khi kết nối cần thực hiện các bước cài đặt sau:

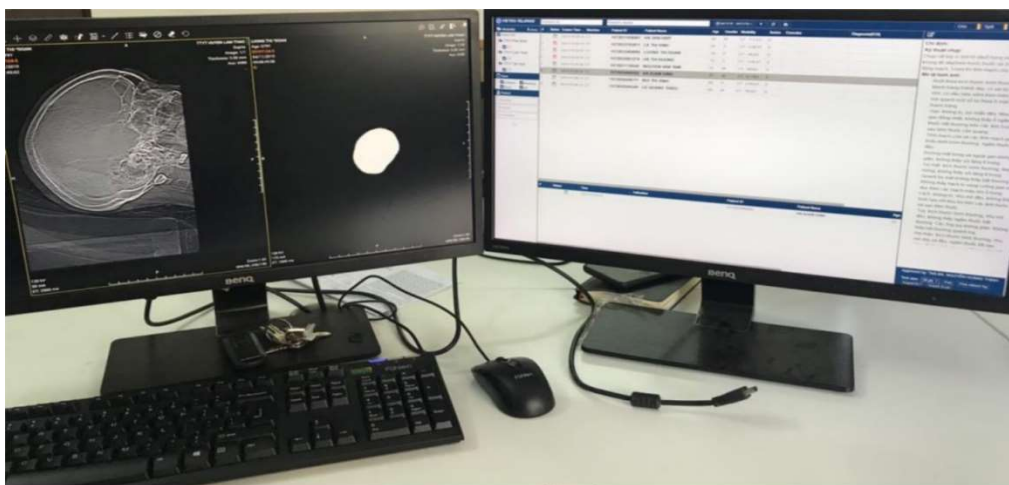

Bước 1: Ấn tổ hợp phím **Windows + P**.


Bước 2: Chọn Extend.

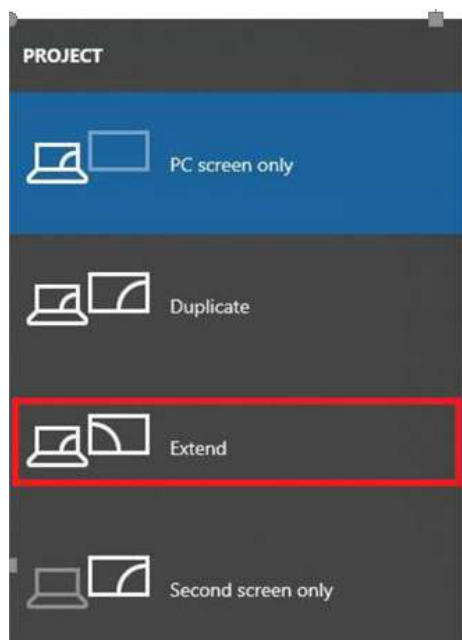

Bước 3: Click vào **Màn hình** để chuyển sang chế độ 2 màn hình.

The screenshot shows the VR-PACS interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'BỘ LỌC', 'DANH SÁCH MÁY', and 'TRẠNG THÁI CA CHỤP'. The main area displays a table of exams with columns for '#', 'Thời gian chụp', 'Họ tên', 'Chỉ định', and 'KTV thực'. A settings menu is open on the right, with the 'Màn hình' option highlighted. The menu also includes options like 'Loại màn', 'Ngang', 'khám', 'Lâm sàng', 'Tổng hợp', 'Đơn', 'Giải mã tài về', 'Không', 'In toàn bộ danh sách', 'Duyệt toàn bộ danh sách', 'Thêm bệnh nhân', 'Tải toàn bộ danh sách', and 'Chọn Modality'.

Chế độ 2 màn hình sẽ hiển thị như sau:

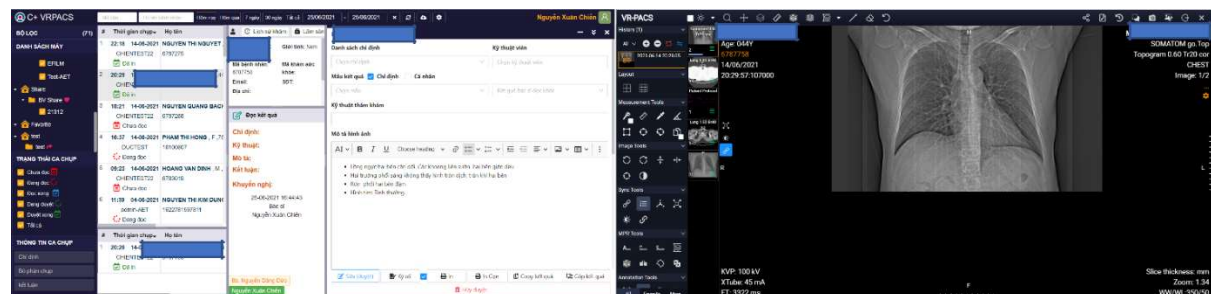

Màn hình 1


Màn hình 2

Bước 4: Mở và xem ảnh.


Note: Mở ảnh sau đó kéo sang màn hình thứ 2. Chỉ cần mở ảnh của bệnh nhân tiếp theo để xem ảnh (không tắt cửa sổ viewer ảnh).

14.3 Chế độ chia bố cục ngang-dọc.


Cách mở loại màn hình ngang:

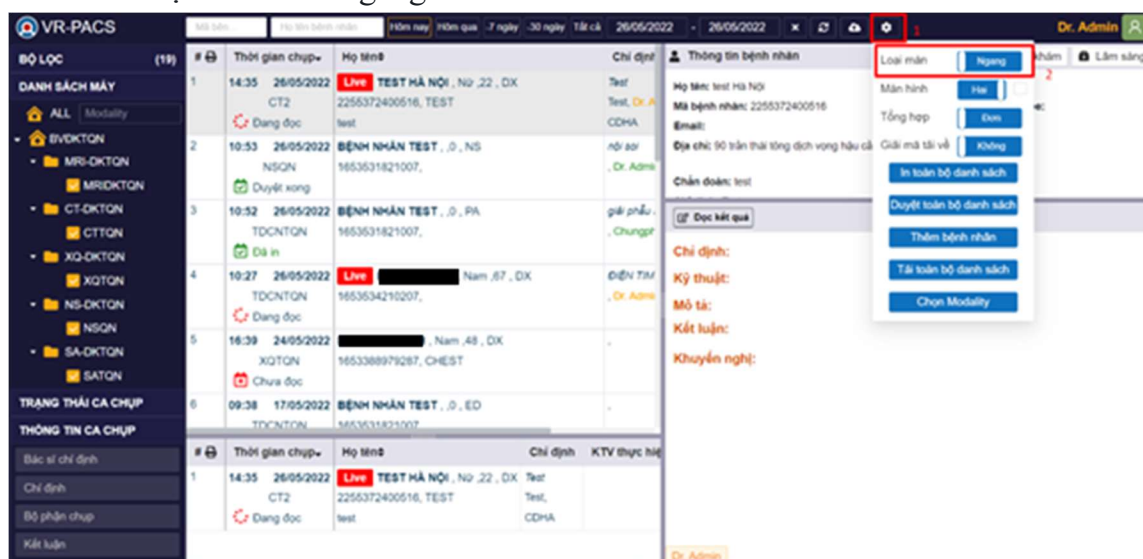


Bố cục giao diện sẽ là:

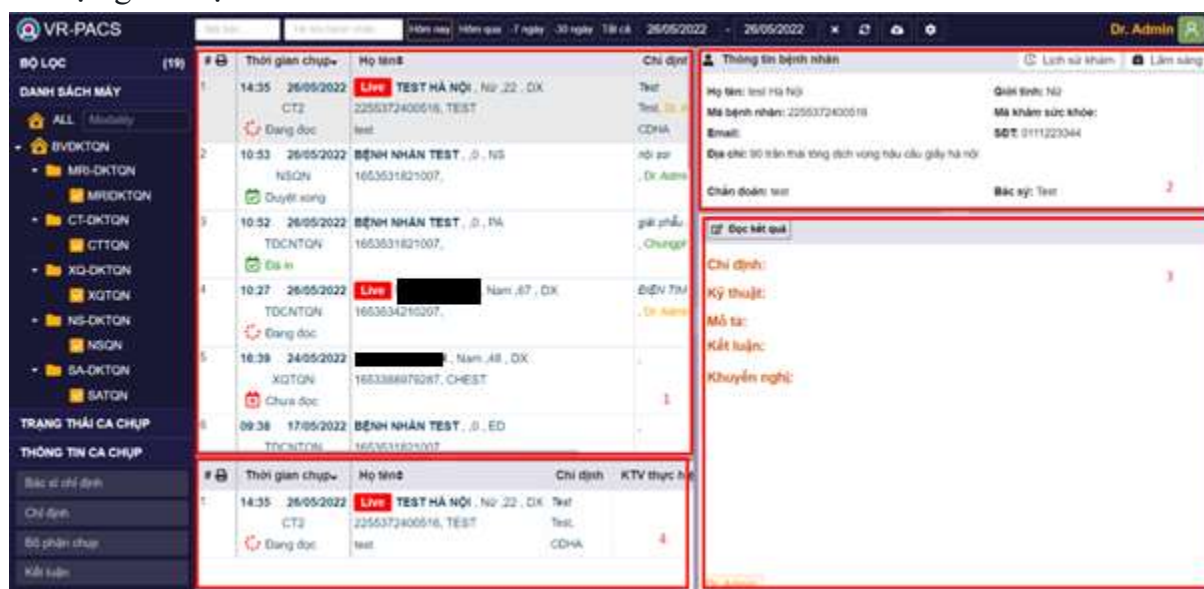

- 1: Danh sách bệnh nhân
 - 2: thông tin hành chính của bệnh nhân
 - 3: Phần Đọc -Trả kết quả cho bệnh nhân
 - 4: Lịch sử khám của bệnh nhân
- Ở loại màn hình dọc:

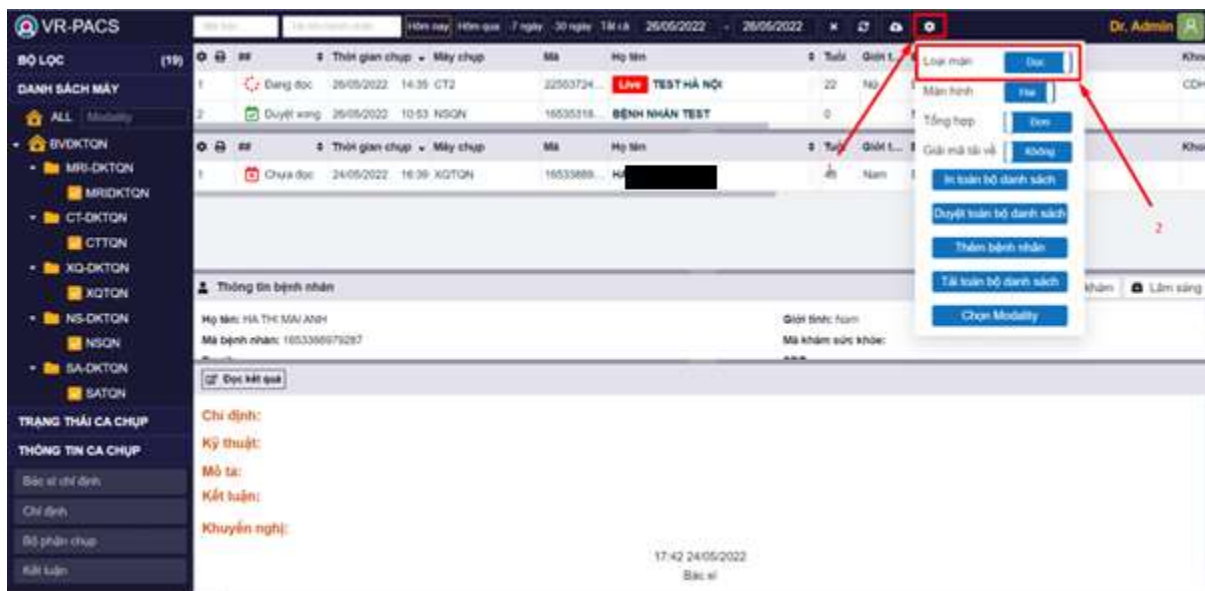


Bố cục giao diện sẽ là:

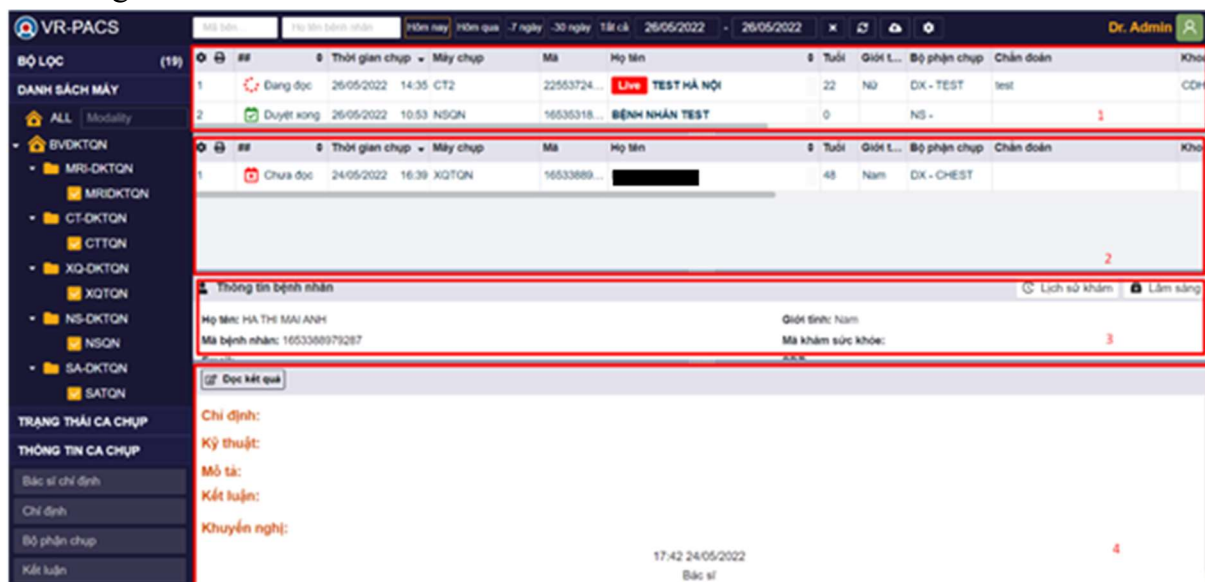

- 1: Danh sách bệnh nhân
- 2: Lịch sử khám của bệnh nhân
- 3: thông tin hành chính của bệnh nhân
- 4: Phần Đọc -Trả kết quả cho bệnh nhân

15. THÊM BỆNH NHÂN

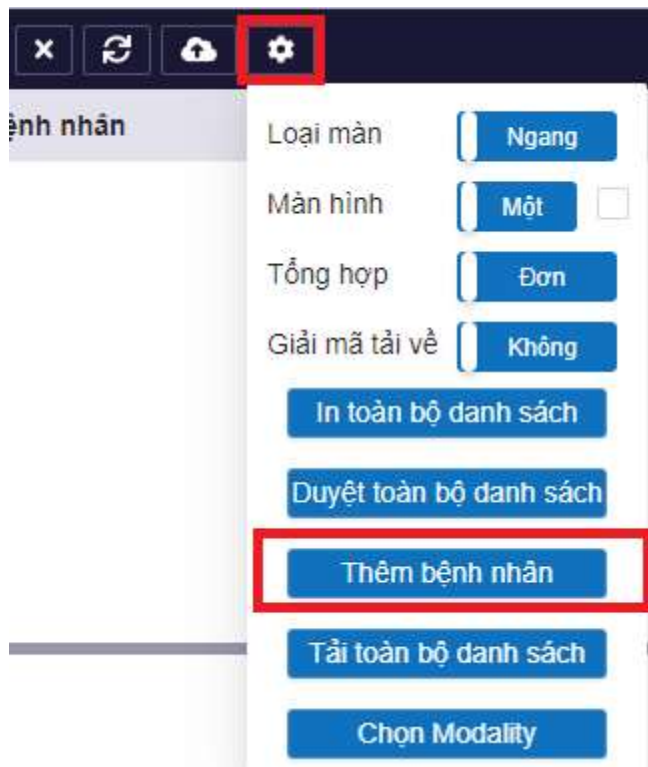

B1: Click vào biểu tượng bánh răng của
B2: chọn “Thêm bệnh nhân”

THÊM CA CHỤP ×

Thêm mới: ☒

Mã:

Họ tên: Tuổi: Giới tính:

BHXX: Địa chỉ: Điện thoại:

Bộ phận chụp: Chẩn đoán ban đầu:

Khoa chỉ định: Bác sỹ chỉ định:


Buồng: Giường: Tên chỉ định:

Máy chụp:

B3: Điền thông tin rồi chọn “Create”


16. CHIA SẺ CA CHỤP

B1: Chọn “Chia sẻ”

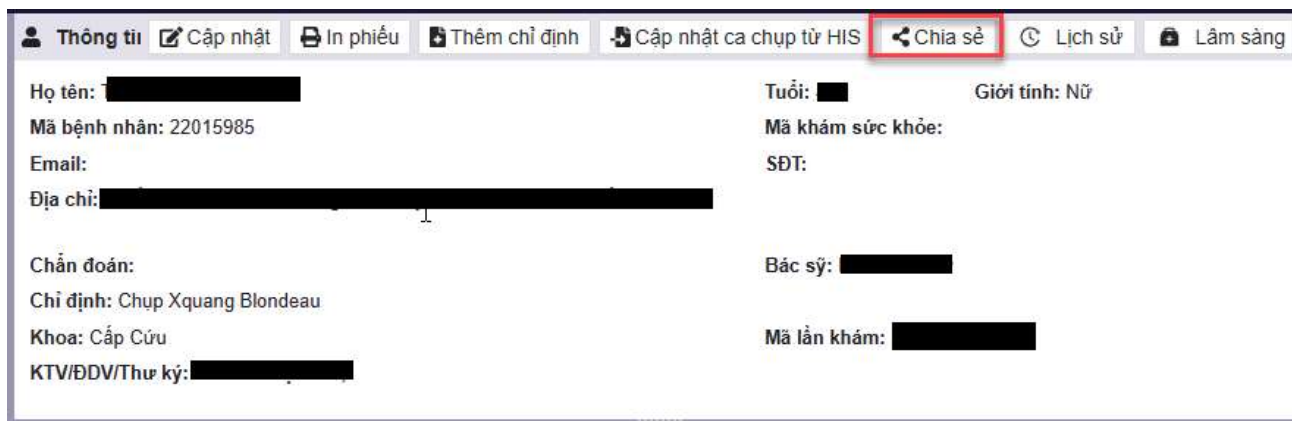

The screenshot shows a medical record interface with a top navigation bar containing buttons: Thông tin, Cập nhật, In phiếu, Thêm chỉ định, Cập nhật ca chụp từ HIS, Chia sẻ (highlighted with a red box), Lịch sử, and Lâm sàng. The main area displays patient information:
Họ tên: [redacted] Tuổi: [redacted] Giới tính: Nữ
Mã bệnh nhân: 22015985 Mã khám sức khỏe:
Email: SĐT:
Địa chỉ: [redacted]
Chẩn đoán: Bác sỹ: [redacted]
Chỉ định: Chụp Xquang Blondeau Mã lần khám: [redacted]
Khoa: Cấp Cứu
KTV/ĐDV/Thư ký: [redacted]

B2: chọn thời gian và mật khẩu -> **Tạo liên kết**

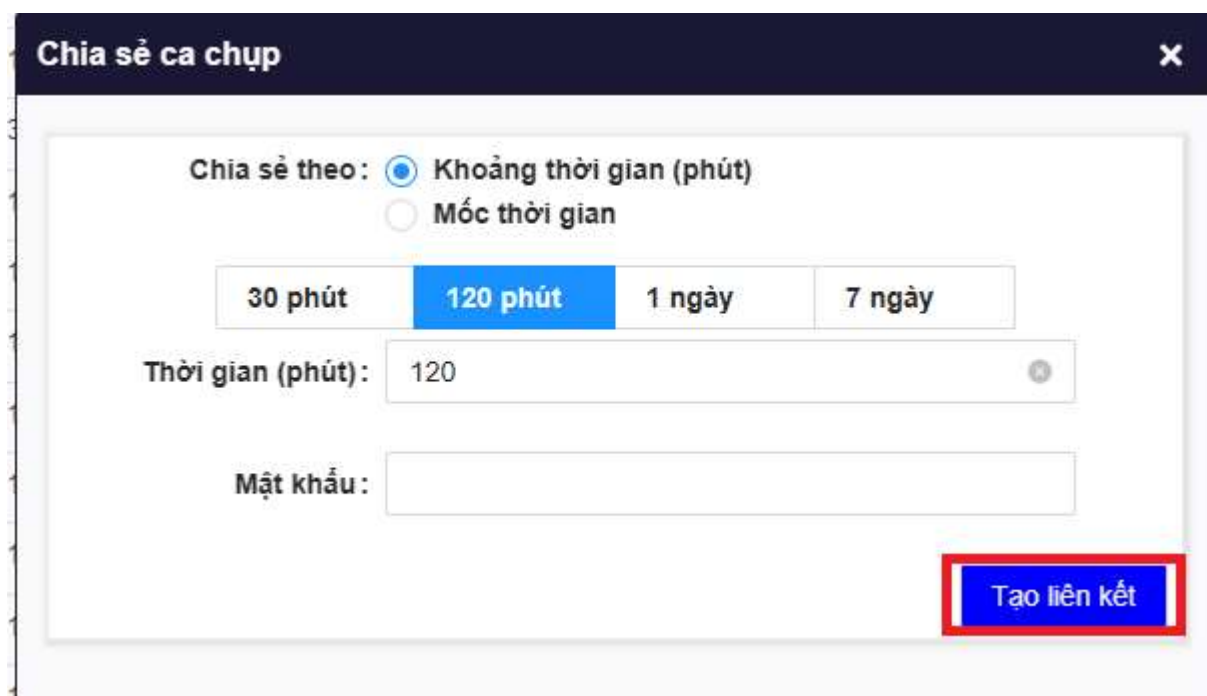

The screenshot shows a dialog box titled "Chia sẻ ca chụp" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are two radio buttons under "Chia sẻ theo":
☒ Khoảng thời gian (phút)
☐ Mốc thời gian
Below these are four buttons: 30 phút, 120 phút (highlighted in blue), 1 ngày, and 7 ngày.
There is a text input field labeled "Thời gian (phút):" containing the value "120".
Below that is a text input field labeled "Mật khẩu:".
At the bottom right, there is a blue button labeled "Tạo liên kết" (highlighted with a red box).

Chia sẻ ca chụp

URL:

http://telerad.vn:1234/?
auth=3zTRPmKyHX06dHIXBtnmdT0sd8RD+TZ
vw4MQF6Iy4qU=¶meters=MMFQHDjlwMT
U5ODUmNjM4MTI2ODI0MzkxMTY2NTY4&tim
e=V2VkiEZiYiAyMiAyMDIzIDE3OjA1OjE0IEdN

Mật khẩu

17. XEM LỊCH SỬ KHÁM

Chọn “lịch sử”

Thông tin

Cập nhật

In phiếu

Thêm chỉ định

Cập nhật ca chụp từ HIS

Chia sẻ

Lịch sử

Lâm sàng

Họ tên:

Tuổi:

48

Giới tính:

Nữ

Mã bệnh nhân:

22015985

Mã khám sức khỏe:

Email:

SĐT:

Địa chỉ:

Chẩn đoán:

Bác sỹ:

Chỉ định:

Chụp Xquang Blondeau

Mã lần khám:

Khoa:

Cấp Cứu

KTV/ĐDV/Thư ký:

Lịch sử khám [Tải hồ sơ bệnh nhân](#) [Tải hồ sơ ca chụp](#)

26/03/2022 Chụp Xquang Blondeau

Tải hồ sơ ca chụp

Mô tả :

Kết luận :

Hình ảnh :

Chi tiết

26/03/2022 Chụp Xquang Hirtz

Tải hồ sơ ca chụp

Mô tả :

Kết luận :

Hình ảnh :

Chi tiết

26/03/2022

Tải hồ sơ ca chụp

Mô tả :

Kết luận :

Hình ảnh :

18. CẬP NHẬT THÔNG TIN LÂM SÀNG

B1: Chọn “cập nhật”

Thông tin

Cập nhật

In phiếu

Thêm chỉ định

Cập nhật ca chụp từ HIS

Chia sẻ

Lịch sử

Lâm sàng

Họ tên:

Mã bệnh nhân: 22015985

Email:

Địa chỉ:

Chẩn đoán:

Chỉ định: Chụp Xquang Blondeau

Khoa: Cấp Cứu

KTV/ĐDV/Thư ký: KTV.Bùi Lại Hòa,

Tuổi: 48

Giới tính: Nữ

Mã khám sức khỏe:

SĐT:

Bác sỹ: Hứa Kim Thư

Mã lần khám:

B2: Thêm thông tin rồi chọn “Lưu”

Cập nhật ca chụp

Trường thông tin	Thông tin hiện tại	Thông tin cập nhật
Mã	22015985	22015985 ☐ Thêm mới
Họ tên		
Tuổi	48	48
Giới tính	F	F
Địa chỉ		
Số điện thoại		
BHXX		
Chẩn đoán ban đầu		
Bộ phận chụp		
Khoa chỉ định	Cấp Cứu	Cấp Cứu
Bác sỹ chỉ định		
Buồng	Khoa Cấp Cứu	Khoa Cấp Cứu
Giường		
Yêu cầu chụp	Chụp Xquang Blondeau	

Lưu

19. THÊM CHỈ ĐỊNH

B1: Chọn “Thêm chỉ định”

B2: điền tên chỉ định rồi “Thêm mới”

Thông tin

Cập nhật

In phiếu

Thêm chỉ định

Cập nhật ca chụp từ HIS

Chia sẻ

Lịch sử

Lâm sàng

Họ tên:

Mã bệnh nhân:

22015985

Email:

Địa chỉ:

Chẩn đoán:

Chỉ định:

Chụp Xquang Blondeau

Khoa:

Cấp Cứu

KTV/ĐDV/Thư ký:

Tuổi:

48

Giới tính:

Nữ

Mã khám sức khỏe:

SĐT:

Bác sỹ:

Hứa Kim Thư

Mã lần khám:

Thêm chỉ định

Không tìm thấy chỉ định, tạo chỉ định mới?

Tên chỉ định

Tên chỉ định

Thêm mới