



MQ Solutions

Điện thoại: 091 449 77 46

Email: mqsoftvn@gmail.com

Website: mqsoft.vn

XÉT NGHIỆM Nhận mẫu bệnh phẩm

Mục lục

Nhận mẫu bệnh phẩm.....	1
1. Vào màn hình “Nhận mẫu” bệnh phẩm.....	1
2. Quy trình “Nhận mẫu”.....	3
3. Hủy nhận mẫu.....	5
Lưu ý:.....	5

Nhận mẫu bệnh phẩm

1. Vào màn hình “Nhận mẫu” bệnh phẩm

1. Mở phần mềm MQ Main




2. Chọn vào phần Xét nghiệm (MQ LIS)



3. Nhập tài khoản, mật khẩu được cung cấp



4. Vào “A. Cập nhật” → “Xác nhận mẫu”

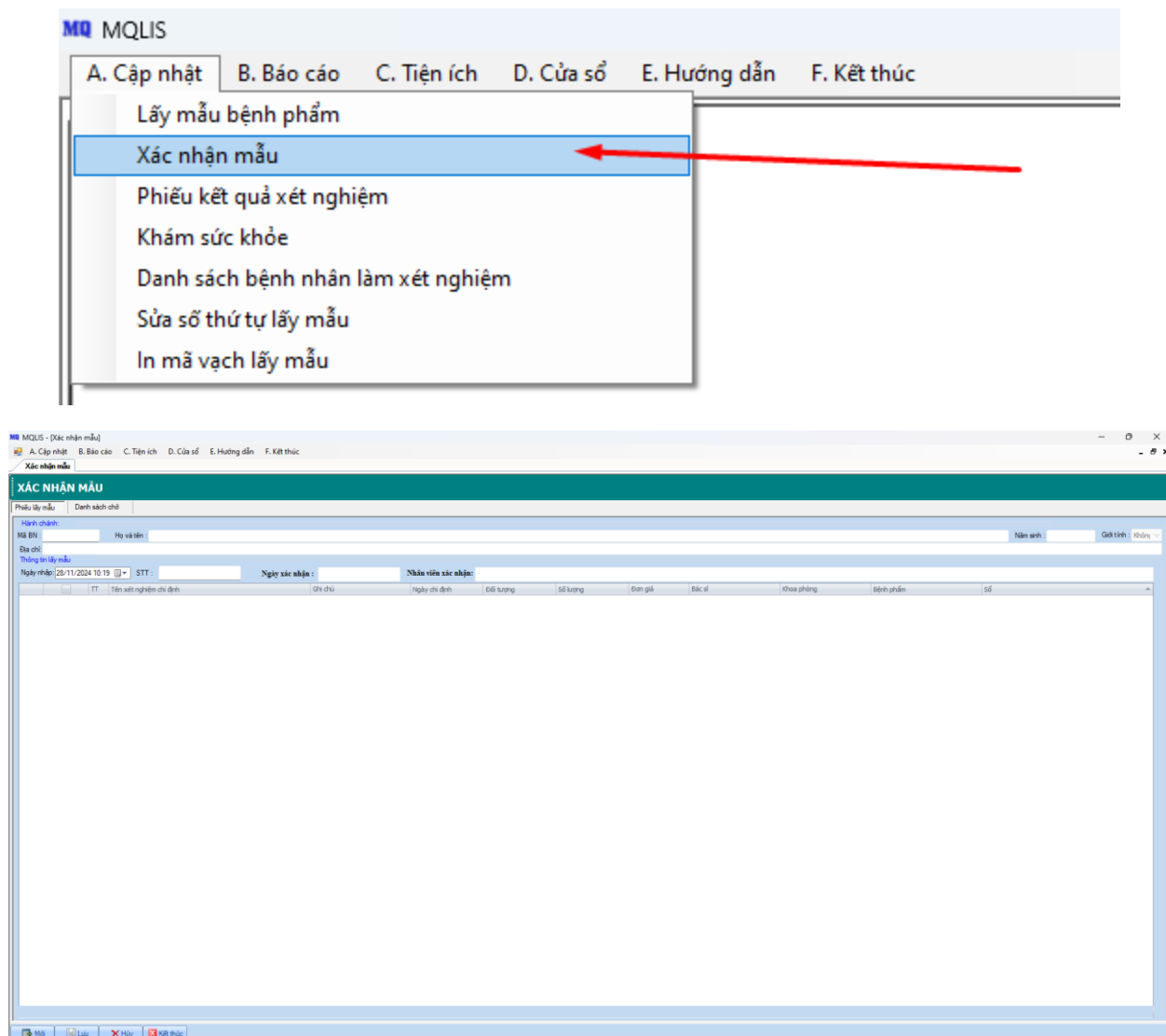

2. Quy trình “Nhận mẫu”

Trên màn hình xác nhận mẫu

1. Vào “Danh sách chờ” → Nhấn “Xem”

Danh sách chờ các BN được lấy mẫu tại khoa/phòng nội trú

Chọn	Ngày lấy mẫu	Barcode	Khoa	Hồ BN	Họ tên	Ngày nhận mẫu	Nhân viên xác nhận
☐	28/11/2024 06:45		Phòng CẤP CỨU 115	24910863	CẤP CỨU RA VỀ		
☐	28/11/2024 08:59		KHOA NỘI TIM MẠCH	24067491	TEST PK NHẬP VIỆN		
☐	28/11/2024 08:59		KHOA NỘI TIM MẠCH	24067491	TEST PK NHẬP VIỆN		
☐	28/11/2024 08:59		KHOA NỘI TIM MẠCH	24067944	BH CÓ BẢO LÃNH 01		
☐	28/11/2024 08:59		KHOA NỘI TIM MẠCH	24067944	BH CÓ BẢO LÃNH 01		
☐	28/11/2024 08:59		KHOA NỘI TIM MẠCH	24067944	BH CÓ BẢO LÃNH 01		
☐	28/11/2024 08:59		KHOA NỘI TIM MẠCH	24067438	BẢO HIỂM ĐANG KHÁM		
☐	28/11/2024 08:59		KHOA NỘI TIM MẠCH	24067897	TRÍ TEST XÉT NGHIỆM		

2. Nhấn vào biểu tượng chức năng  để chọn BN

Chọn	Ngày lấy mẫu	Barcode	Khoa	Hồ BN	Họ tên	Ngày nhận mẫu	Nhân viên xác nhận
☐	28/11/2024 06:45		Phòng CẤP CỨU 115	24910863	CẤP CỨU RA VỀ		
☐	28/11/2024 08:59		KHOA NỘI TIM MẠCH	24067491	TEST PK NHẬP VIỆN		
☐	28/11/2024 08:59		KHOA NỘI TIM MẠCH	24067491	TEST PK NHẬP VIỆN		
☒	28/11/2024 08:59		KHOA NỘI TIM MẠCH	24067944	BH CÓ BẢO LÃNH 01		
☐	28/11/2024 08:59		KHOA NỘI TIM MẠCH	24067944	BH CÓ BẢO LÃNH 01		
☐	28/11/2024 08:59		KHOA NỘI TIM MẠCH	24067944	BH CÓ BẢO LÃNH 01		
☐	28/11/2024 08:59		KHOA NỘI TIM MẠCH	24067438	BẢO HIỂM ĐANG KHÁM		
☐	28/11/2024 08:59		KHOA NỘI TIM MẠCH	24067897	TRÍ TEST XÉT NGHIỆM		

3. Sau khi chọn BN, kiểm tra lại thông tin XN BN
4. Nhấn “Lưu” để xác nhận đã lấy mẫu

MQSIS - [Xác nhận mẫu]

Trang chủ | Báo cáo | Tệp ích | Cửa sổ | Hướng dẫn | Kết thúc

XÁC NHẬN MẪU

Phẫu lấy mẫu: Danh sách chờ

Mã BN: 24067944 Họ và tên: BHI CỎ BẢO LINH 01 Năm sinh: 1996 Giới tính: Nữ

Địa chỉ: Phường Phú Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Thông tin lấy mẫu

Ngày nhập: 28/11/2024 08:59 STT: 4 Ngày xác nhận: Nhân viên xác nhận:

STT	Tên xét nghiệm chi tiết	Chỉ chỉ	Ngày chi định	Đến lượng	Số lượng	Đơn giá	Giá trị	Khoa phòng	Sinh phẩm	Số
1	Sắc Đông máu									
	Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm)		28/11/2024 08:55	BHIT-BHGL	1	40200	Bs Hoàng Quốc Anh	KHOA NỘI TÂM MẠCH	Máu ống (EDTA)	Đông máu
										(Count=1)
2	Sắc Hóa sinh									
	En hoạt độ ALT (GPT) [Hau]		28/11/2024 08:55	BHIT-BHGL	1	23800	Bs Hoàng Quốc Anh	KHOA NỘI TÂM MẠCH	Máu ống (heparin)	Hóa sinh
	En hoạt độ AST (GOT) [Hau]		28/11/2024 08:55	BHIT-BHGL	1	23800	Bs Hoàng Quốc Anh	KHOA NỘI TÂM MẠCH	Máu ống (heparin)	Hóa sinh
										(Count=2)

Trang 1/1

Trang 1/1

Trang 1/1

Trang 1/1

5. Sau khi “Lưu” BN sẽ được hiển thị trong “Danh sách chờ” trạng thái “Đã xác nhận” có thông tin ngày, giờ nhận mẫu

MQSIS - [Xác nhận mẫu]

Trang chủ | Báo cáo | Tệp ích | Cửa sổ | Hướng dẫn | Kết thúc

XÁC NHẬN MẪU

Phẫu lấy mẫu: Danh sách chờ

Từ: 28/11/2024 Đến: 28/11/2024 Chưa xác Đã xác nhận Thêm

Chợ	Ngày lấy mẫu	Barcode	Khoa	Hồ BN	Họ tên	Ngày nhận mẫu	Nhân viên xác nhận
1	28/11/2024 08:59		KHOA NỘI TÂM MẠCH	24067944	BHI CỎ BẢO LINH 01	28/11/2024 10:54	AdminHQ

3. Hủy nhận mẫu

1. Vào “Danh sách chờ” chọn trạng thái “Đã xác nhận”

Chọn	Ngày lấy mẫu	Barcode	Khoa	P&B BN	Họ tên	Ngày nhận mẫu	Nhân viên xác nhận
☐	28/11/2024 08:59		KHỎA NỘI TÂM MẠCH	24067944	BHY CỐ BẢO LÃNH 01	28/11/2024 10:54	AdminMQ

2. Chọn BN muốn hủy nhận mẫu
3. Nhấn “Hủy”

Lưu ý:

Không ràng buộc việc BN nội trú đã lấy mẫu tại khoa nhưng chưa xác nhận “Nhận mẫu” thì không thực hiện XN được.

Trong danh sách chờ của “Phiếu kết quả XN” vẫn sẽ hiển thị tên BN nội trú dù chưa xác nhận đã nhận mẫu