



MQ Solutions

Điện thoại: 091 449 77 46

Email: mqsoftvn@gmail.com

Website: mqsoft.vn

XÉT NGHIỆM

Trả kết quả

Mục lục

Phiếu kết quả XN.....	2
1. Vào màn hình “Phiếu kết quả XN”	2
2. Chọn người duyệt kết quả	4
4. Quy trình “Trả kết quả XN” tại khoa XN.....	6
5. Quy trình “Trả kết quả XN” tại giường.....	7
6. Sửa phiếu kết quả XN.....	8
7. Kết quả máy.....	9
8. Khai báo viết tắt kết quả XN	10
8.1 Khai báo	10
8.2 Cách sử dụng.....	11
9. Hoá chất XN	12
9.1 Thêm	12
9.2 Chỉnh sửa đối tượng hoá chất	13
9.3 Xoá.....	13
10. Xem tồn tủ trực	13
11. Xem tồn kho.....	14
12. Xem HSBA BN.....	14


Phiếu kết quả XN

1. Vào màn hình “Phiếu kết quả XN”

1. Mở phần mềm MQ Main




2. Chọn vào phần Xét nghiệm (MQ LIS)

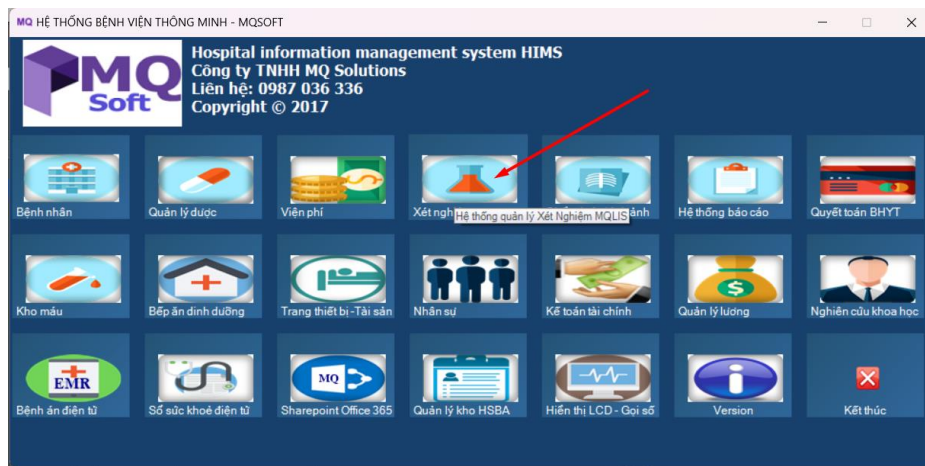

3. Nhập tài khoản, mật khẩu được cung cấp




4. Vào “A. Cập nhật” → “Phiếu kết quả xét nghiệm”

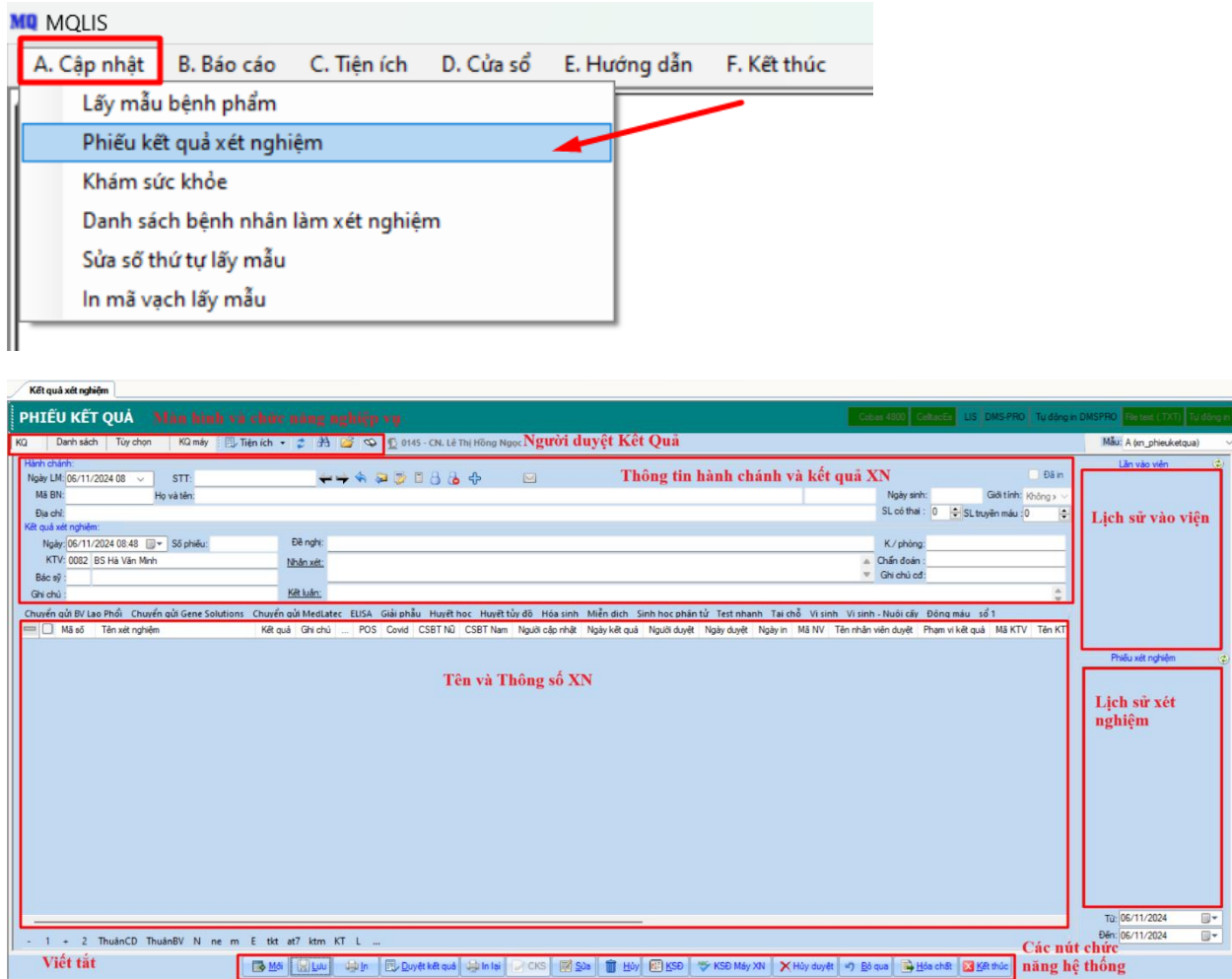

Hình 1: Màn hình "Phiếu kết quả xét nghiệm"

2. Chọn người duyệt kết quả

Sau khi vào màn hình “Phiếu kết quả XN”

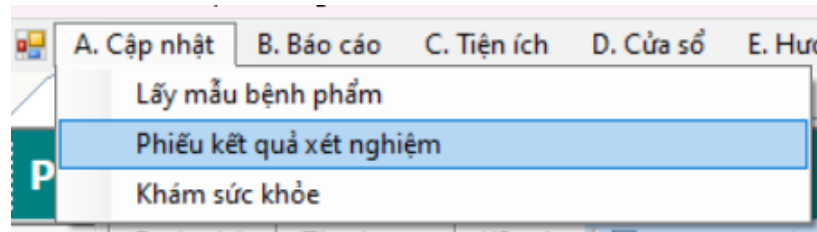

PHIẾU KẾT QUẢ

Hành chính: Ngày LM: 12/02/2023 15 STT: Mã BN: Địa chỉ: Kết quả xét nghiệm: Ngày: 12/02/2023 15:30 Sô phiếu: KTV: Bác sỹ: Ghi chú: K/phòng: Chẩn đoán: Ghi chú cũ:

HUYẾT HỌC SINH HÓA VI SINH Xét Nghiệm Tai Khoa GIẢI PHUỒ BỆNH LÝ SINH HỌC PHÂN TỬ MIỄN DỊCH NƯỚC TIỂU NH-TDCH

Mã số Tên xét nghiệm Kết quả Ghi chú POS Covid CSBT NG CSBT Nam Người cấp xét Ngày kết quả Người duyệt Ngày in Mã RV Tên nhân viên duyệt Phạm vi kết quả Mã KTV Tên KTV thực hiện Mã công thức Đơn vị KG Máy Máy Ngày chỉ định

Chọn nhân viên duyệt

Nhân viên: 0138 Phạm Thị Lan Chi

Mật khẩu: [mã]

Đồng ý Ghi chú

Khi trả kết quả bằng chức năng phiếu trả kết quả thì sẽ đăng nhập nhân viên có thẩm quyền duyệt và chịu trách nhiệm cho kết quả đó

Khi duyệt thì sẽ hiện thông tin nhân viên duyệt

PHIẾU KẾT QUẢ


Hành chính: Ngày LM: 08/02/2023 11 STT: 10 Mã BN: 23000115 Địa chỉ: Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Kết quả xét nghiệm: Ngày: 08/02/2023 11:00 Sô phiếu: 0 KTV: 0138 Phạm Thị Lan Chi Bác sỹ: 0002 Bui Hữu Phước Ghi chú: K/phòng: Phòng Khám Cấp Cứu Chẩn đoán: Bệnh tăng huyết áp vô căn (nguyên) Ghi chú cũ: Màu

HUYẾT HỌC SINH HÓA VI SINH Xét Nghiệm Tai Khoa GIẢI PHUỒ BỆNH LÝ SINH HỌC PHÂN TỬ MIỄN DỊCH NƯỚC TIỂU NH-TDCH


Mã số	Tên xét nghiệm	Kết quả	Ghi chú	POS	Covid	CSBT NG	CSBT Nam	Người cấp xét	Ngày kết quả	Ngày duyệt	Nhân viên duyệt	Phạm vi kết quả	Mã KTV	Tên KTV thực hiện	Mã công thức	Đơn vị	KG	Máy	Ngày chỉ định
001	Tổng phân tích tế bào máu bân...	2	L			4.00-10.00	5.00-10.00	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
002W	WBC	2	L			41-76	41-76	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
021LN	1%LEUT	2	L			21-50	21-50	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
021LYM	1%LYMPH	2	L			2.8-8.8	2.8-8.8	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
021MONO	1%MONO	2	L			0.0-0.4	0.0-0.4	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
021EOS	1%EOS	2	L			0.0-0.4	0.0-0.4	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
021BASO	1%BASO	2	H			0.0-1.0	0.0-1.0	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
021LUC	1%LUC	2	L			0.0-0.4	0.0-0.4	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
003NEU	NEUW	2	L			2.5-7.5	2.5-7.5	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
004LY	LYMF	2	L			1.0-4.0	1.0-4.0	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
005M	MONCH	2	H			0.1-0.8	0.1-0.8	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
006ED	EDS#	2	H			0.0-0.6	0.0-0.6	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
007BA	BAS#	2	H			0.0-0.15	0.0-0.15	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
03uR	LUC#	2	H			0.0-0.4	0.0-0.4	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
010RBC	RBC	2	L			3.9-5.4	4.3-5.8	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
014HGB	HGB	2	L			12.5-14.5	14.0-16.0	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
015HCT	HCT	2	L			35-47	38-50	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
016MCV	MCV	2	L			83-91	84-92	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
017MCH	MCH	2	L			27.0-31.0	28.0-32.0	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
018MCHC	MCHC	2	L			32.0-35.1	32.2-35.6	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
019R...RDW	RDW	2	L			11.5-14.5	11.5-14.5	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
CHC001	CHCM	2	L			32.0-36.0	32.0-36.0	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
020CH	CH	2	L			27.0-32.0	27.0-32.0	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
020HGB	HGB	2	L			2.2-3.2	2.2-3.2	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
020PLT	PLT	2	L			150-400	150-400	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							
020PLT	PLT	2	L			150-400	150-400	Adm-MQ	08/02/2023 11:01	08/02/2023 11:01	0138	Phạm Thị Lan Chi							

4. Quy trình “Trả kết quả XN” tại khoa XN

Sau khi vào màn hình “Phiếu kết quả XN”

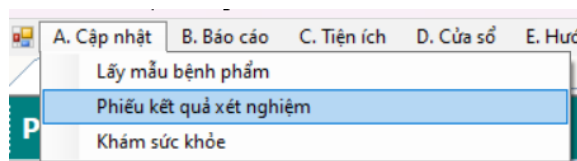


1. Nhập STT, Mã BN hoặc chọn BN từ “Danh sách”

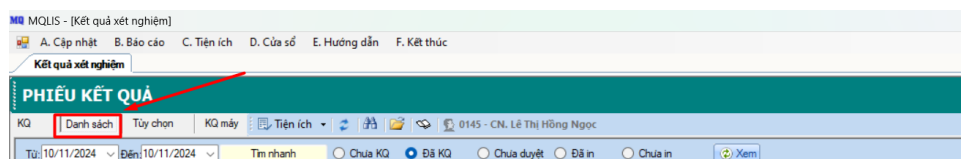

2. Nhấn “Lưu”

3. Nhấn “Duyệt kết quả” (F6) và “In” (F5) kết quả ra cho bệnh nhân.

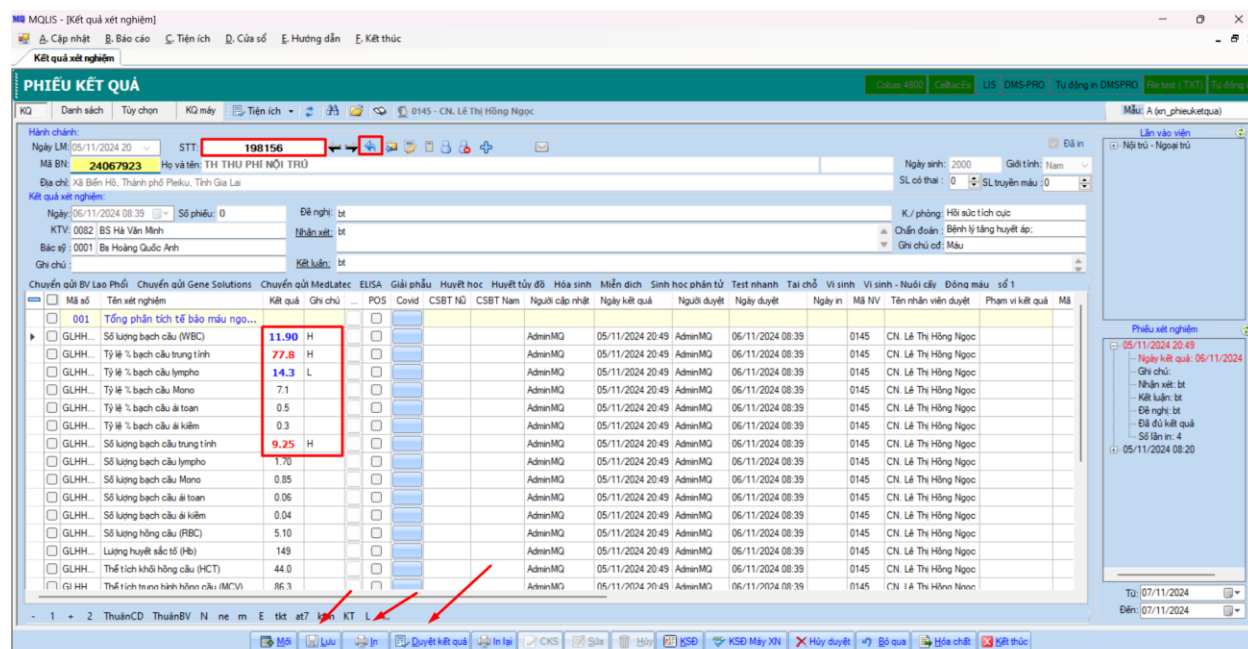

Lưu ý: Khi nhấn “In” hiện thông báo “Không có số liệu” → Chưa duyệt kết quả

Ghi chú: Những thông số kết quả nào có giá trị lớn hơn giá trị bình thường chương trình thể hiện màu đỏ, những thông số nào có giá nhỏ hơn giá trị bình thường chương trình thể hiện màu xanh.

Ở bước 1, sau khi nhập STT mà vẫn chưa thấy kết có thể nhấn vào biểu tượng  để lấy kết quả từ máy. Nếu không được nữa chuyển sang phần “5. Kết quả máy” để biết thêm.

5. Quy trình “Trả kết quả XN” tại giường

The screenshot shows the main application window with a menu open. The menu item 'Nhập kết quả xét nghiệm tại giường' (Enter test results at the bedside) is highlighted. Other visible menu items include 'Xem tên kho máu', 'Danh sách hủy', 'Hủy nhiều dòng chọn', 'Tra cứu phát đồ', 'In từng ngày', and 'In giấy cam kết phẫu thuật thủ thuật'.

The screenshot shows the 'Nhập kết quả xét nghiệm tại giường' (Enter test results at the bedside) form. The form includes fields for patient information (Name, ID, Date of Birth, Sex, Blood Type, etc.), test results (Test Name, Result, Unit, etc.), and a section for the doctor's signature and stamp. The form is titled 'PHIẾU KẾT QUẢ' (Test Result Form).

Ở phần chỉ định CLS (F7) → Chọn “Nghịệp vụ” → “Nhập kết quả xét nghiệm tại giường”

The screenshot shows the 'Nhập kết quả xét nghiệm tại giường' (Enter test results at the bedside) form with a 'PHIẾU KẾT QUẢ' (Test Result Form) overlay. The form includes fields for patient information (Name, ID, Date of Birth, Sex, Blood Type, etc.), test results (Test Name, Result, Unit, etc.), and a section for the doctor's signature and stamp. The form is titled 'PHIẾU KẾT QUẢ' (Test Result Form).

6. Sửa phiếu kết quả XN

1. Nhập lại Mã BN muốn sửa
2. Chọn Phiếu kết quả xét nghiệm muốn sửa ở phần “Lịch sử xét nghiệm”
3. Nhấn “Sửa”
4. Nhấn “Huỷ duyệt” → Hiện thông báo nhấn “Yes”
5. Chỉnh sửa phiếu kết quả (Đề nghị, Nhận xét, Kết luận, Kết quả XN, ...)
6. Nhấn “Lưu”
7. Nhấn “Duyệt kết quả”

Lưu ý: Sau khi chỉnh sửa, thông tin người chỉnh sửa sẽ được lưu ở cột “Người cập nhật”

The screenshot displays the 'PHIẾU KẾT QUẢ' (Test Result Slip) interface. At the top, there's a header with 'Kết quả xét nghiệm' and 'Danh sách bệnh nhân thực hiện'. Below this, a form contains patient details: 'Hành chính:' with 'Ngày LM: 05/11/2024 20', 'Mã BN: 24067923', 'STT: 198156', 'Họ và tên: TH THU PHI NỔI TRỞ', 'Ngày sinh: 2000', 'Giới tính: Nam', 'SL có thai: 0', 'SL truyền máu: 0'. The 'Kết quả xét nghiệm:' section shows 'Ngày: 05/11/2024 08:39', 'Số phiếu: 0', 'Đề nghị: bt', 'KTV: 0082', 'BS Hà Văn Minh', 'Bác sĩ: 0001', 'Bà Hoàng Quốc Anh', 'K/ phòng: Hồi sức tích cực', 'Chẩn đoán: Bệnh lý tăng huyết áp', 'Ghi chú cơ: Máu'. A table of test results follows, with columns for 'Mã số', 'Tên xét nghiệm', 'Kết quả', 'Ghi chú', 'POS', 'Covid', 'CSBT NQ', 'CSBT Nam', 'Người cập nhật', 'Ngày kết quả', 'Người duyệt', 'Ngày duyệt', 'Ngày in', 'Mã NV', 'Tấn nhân viên duyệt', 'Phạm vi kết quả', and 'Mã'. The table lists various blood tests like 'Tổng phần tích tế bào máu ngo...', 'Số lượng bạch cầu (WBC)', 'Tỷ lệ % bạch cầu trung tính', etc. The bottom toolbar contains buttons for 'Lưu', 'Huỷ duyệt', 'Duyệt kết quả', 'In lại', 'CXS', 'Sửa', 'Hủy', 'ESD', 'KSD Máy XN', 'Hủy duyệt', 'Bỏ qua', 'Tạo chất', and 'Đặt thức'. Red arrows point to the 'Sửa' button (4), 'Huỷ duyệt' button (3), 'Lưu' button (6), and 'Duyệt kết quả' button (7). A red box on the right highlights the 'Phiếu xét nghiệm' section with dates '05/11/2024 20:49' and '05/11/2024 08:20'.

7. Kết quả máy

Đây là màn hình tự động nhận kết quả từ máy xét nghiệm trả về khi máy tính có kết nối với máy xét nghiệm.

Tên máy	Sno	STT mẫu	STT mẫu của	Ghi chú	Họ tên	Chon
XN-1000	198063	198063				☐
XN-1000	198156	198156				☐
XN-1000	198161	198161				☐

STT	Xét nghiệm	Kết quả	LowHeight	Ghi chú	POS	Xử lý	Ngày gửi cập nhật
2	Số lượng bạch cầu (WBC)	9.39			☐		05/11/2024 20:55
3	Tỷ lệ % bạch cầu trung tính	78.6	H		☐		05/11/2024 20:55
4	Tỷ lệ % bạch cầu lympho	6.4	L		☐		05/11/2024 20:55
5	Tỷ lệ % bạch cầu Mono	14.3	H		☐		05/11/2024 20:55
6	Tỷ lệ % bạch cầu ái toan	0.5			☐		05/11/2024 20:55
7	Tỷ lệ % bạch cầu ái kiềm	0.2			☐		05/11/2024 20:55
8	Số lượng bạch cầu trung tính	7.38			☐		05/11/2024 20:55
9	Số lượng bạch cầu lympho	0.60	L		☐		05/11/2024 20:55
10	Số lượng bạch cầu Mono	1.34			☐		05/11/2024 20:55
11	Số lượng bạch cầu ái toan	0.05	H		☐		05/11/2024 20:55
12	Số lượng bạch cầu ái kiềm	0.02			☐		05/11/2024 20:55
13	Số lượng hồng cầu (RBC)	2.48			☐		05/11/2024 20:55
14	Lượng huyết sắc tố (Hb)	85			☐		05/11/2024 20:55
15	Thể tích khối hồng cầu (HCT)	23.4			☐		05/11/2024 20:55
16	Thể tích trung bình hồng cầu (MCV)	94.4			☐		05/11/2024 20:55
17	Lượng Hb trung bình hồng cầu (MCH)	34.3	H		☐		05/11/2024 20:55


Sau khi có kết quả XN, máy sẽ trả kết quả về đây. Có thể xem được danh sách XN đã có kết quả, kết quả chi tiết các thông số XN.

Nếu XN đã có kết quả mà khi nhập STT ở màn hình “Kết quả” của “Phiếu trả kết quả xét nghiệm” không thấy kết quả của BN thực hiện các bước sau:

1. Vào màn hình “KQ máy”
2. Chọn STT mẫu đã có kết quả trên danh sách
3. Nhấn “Chuyển lại” → Thông báo “Chuyển lại thành công”
4. Quay lại màn hình “KQ” (“Phiếu kết quả XN”) và trả kết quả như quy trình


8. Khai báo viết tắt kết quả XN

Vào màn hình “Phiếu kết quả XN”

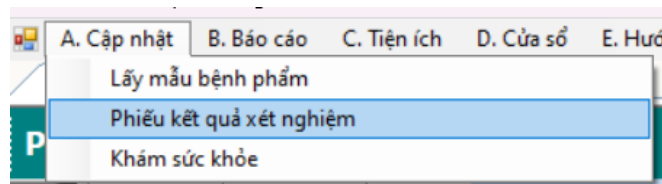

8.1 Khai báo

1. Nhấn vào “...”

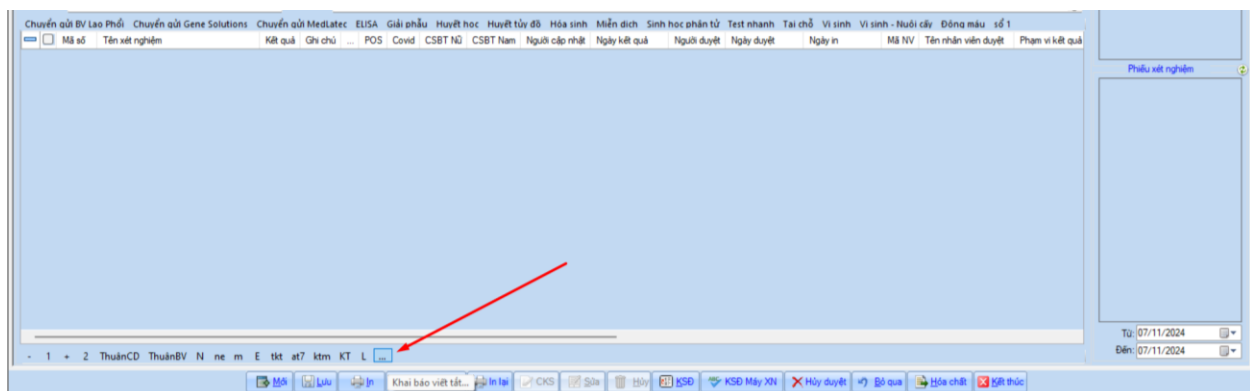

2. Kéo xuống dưới cùng, nhập thông tin các từ viết tắt như: STT, từ viết tắt, từ đầy đủ.
3. Mỗi khi hàng cuối cùng được điền thông tin, hệ thống sẽ tiếp tục cập hàng tiếp theo. Nên cứ khai báo lần lượt hết các từ viết tắt.
4. Nhấn “Luu”

Stt	Viết tắt	Đầy đủ	Readonly
1	1	HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Strip	☐
2	+	DƯƠNG TÍNH	☐
2	2	Asan Easy Test HIV 1/2	☐
3	ThuậnCD	Thuận MS CD19	☐
4	ThuậnBV	Thuận MS BV	☐
16	N	nom	☐
17	ne	neg	☐
18	m	mg/dl	☐
19	E	Ery/ul	☐
20	tkk	Tìm không thấy	☐
21	at7	âm tính sau 7 ngày nuôi cấy	☐
22	ktm	Không tìm thấy vi khuẩn	☐
23	KT	KHÔNG THUẬN	☐
24	L	Lưu/ul	☐

8.2 Cách sử dụng

Khi trả kết quả XN thông số kỹ thuật đó không có hoặc muốn ghi thêm thông tin vào ô kết quả

1. Chọn thông số kỹ thuật muốn thêm → Nhấn vào ô kết quả của thông số đó

The screenshot shows a software window with a menu bar at the top containing various test categories like 'Chuyển gửi BV Lao Phổi', 'Chuyển gửi Gene Solutions', etc. Below the menu is a table with columns for patient information and test results. The row for 'Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]' is selected. The 'Kết quả' (Result) column for this test is empty, and a red arrow points to it. The bottom of the window has a toolbar with buttons like 'Mở', 'Lưu', 'In', 'Duyệt kết quả', etc.


2. Nhấn chọn từ biết tắt muốn thêm vào ô kết quả

The top screenshot shows a close-up of the 'Kết quả' (Result) column for the test 'Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]'. The cell is empty, and a tooltip 'Tim không thấy' (Not found) is visible. The bottom screenshot shows the same window, but now the text 'Tim không thấy' has been entered into the 'Kết quả' cell. The rest of the interface remains the same.

9. Hoá chất XN

9.1 Thêm


Ở màn hình “Phiếu kết quả XN”

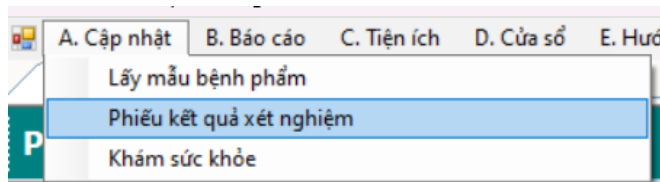

1. Nhấn “Hoá chất”



2. Chọn XN muốn thêm hoá chất
3. Tích chọn những hoá chất muốn thêm
4. Nhấn “Thêm”
5. Nhấn “Lưu”

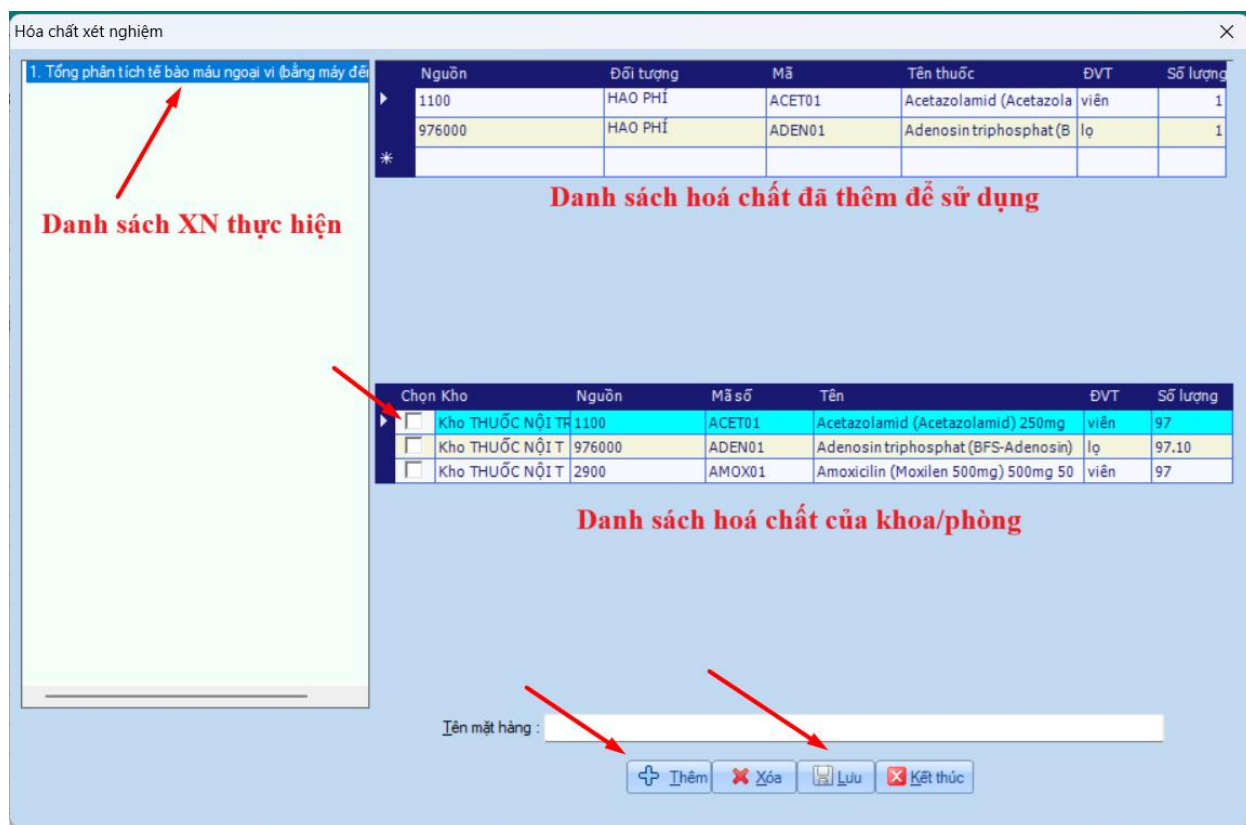

9.2 Chỉnh sửa đối tượng hoá chất

Ở phần danh sách hoá chất đã thêm → cột đối tượng (mặc định đang là hao phí).

1. Nhấn vào tên đối tượng ở cột đối tượng (mặc định là “Hao phí”)
2. Chọn đối tượng muốn thay đổi theo danh sách sổ xuống
3. Nhấn “Lưu”

Nguồn	Đối tượng	Mã	Tên thuốc	ĐVT	Số lượng
1100	HAO PHÍ	ACET01	Acetazolamid (Acetazola	viên	1
976000	BHYT	ADEN01	Adenosin triphosphat (B	lọ	1

Chọn Kho	Nguồn	Mã số	Tên	ĐVT	Số lượng
☐	Kho THUỐC NỘI TR	1100	Acetazolamid (Acetazolamid) 250mg	viên	97
☐	Kho THUỐC NỘI T	976000	Adenosin triphosphat (BFS-Adenosin)	lọ	97.10
☐	Kho THUỐC NỘI T	2900	Amoxicilin (Moxilen 500mg) 500mg 50	viên	97

9.3 Xóa

1. Chọn hoá chất muốn xóa trên danh sách đã thêm
2. Nhấn “Xóa” → Nhấn “Lưu”

10. Xem tồn trữ trực

Kết quả xét nghiệm

PHIẾU KẾT QUẢ

KQ | Danh sách | Tùy chọn | KQ máy | Tiện ích | 0145-CN. Lê Thị Hồng Ngọc

Hành chánh:


Ngày LM: 05/11/2024 20 | STT: | Mã BN: 24067923 | Họ và tên: TH TH

Xem tồn trữ trực tổng hợp
Xem tồn kho tổng hợp
Danh sách lấy mẫu

Sau khi vào màn hình “Phiếu kết quả XN” → “Tiện ích” → “Xem tồn trữ trực tổng hợp”

11. Xem tồn kho

1. Ở màn hình “Phiếu kết quả XN” → Chọn “Tiện ích” → Nhấn “Xem tồn kho tổng hợp”
2. Chọn tháng, năm và kho tương ứng muốn xem

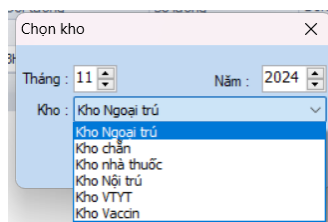

Mã số	Tên	Hoạt chất	DVT	Tồn kho
ACET01	Acetazolamid (Acetazolamid) 250mg 2	Acetazolamid	viên	915.00
ACET02	Acetyl leucin (Aleucin 500mg/5ml) 500	Acetyl leucin	ống	952.00
ACET03	Acetylsalicylic acid (Aspirin Stella 81mg	Acetylsalicylic acid (DL-lysine-acetylsalicylic acid)	viên	982.00
ACIC01	Aciclovir (Acyclovir) 50/0-250mg/5g; b	Aciclovir	tube	972.00
ACID05	Acid amin + glucose+ điện giải (Nutrifi	Acid amin + glucose+ điện giải ()	túi	982.00
ACID06	Acid amin (Acid amin 7,2o/o) 7,2o/o/2	Acid amin	chai	1,000.00
ACID07	Acid amin (Acid amin 8o/o) 8o/o/200m	Acid amin	chai	988.00
ACID08	Acid amin (Amiparen - 10) 10o/o/ 500	Acid amin	chai	1,000.00
ACID09	Acid amin (Vaminolact) 6,5o/o/100ml	Acid amin	chai	1,000.00
ADEN01	Adenosin triphosphat (BFS-Adenosin)	Adenosin triphosphat	lọ	999.00
ADRE01	Adrenalin (Adrenalin) 1mg/ml 1mg/ ml	Epinephrin (adrenalin)	ống	960.00
ALBE01	Albendazol (Alzental) 400mg 400mg	Albendazol	viên	963.00
ALBE02	Albendazol (SaVi Albendazol 200) 200	Albendazol	viên	992.00
ALBU01	Albumin (Albutin 20o/o) 20o/o/50ml	Albumin	chai	949.00
ALFU01	Alfuzosin (Alsiful S.R. Tablets 10mg) 1	Alfuzosin	viên	996.00
ALL001	Allopurinol (Darinol 300) 300mg 300m	Allopurinol	viên	986.00
ALPH01	Alpha chymotrypsin (AlphaDHG) 4,2m	Alpha chymotrypsin	viên	994.00
ALVE01	Alverin citrat + simethicon (AVARINO)	Alverin citrat + simethicon	viên	996.00
AMBR01	Ambroxol (HALDOL) 30mg 30mg	Ambroxol	viên	985.00
AMBR02	Ambroxol (Olesom) 30mg/ 5ml, 100ml	Ambroxol	chai	996.00
AMBR03	Ambroxol (SAVIBROXOL 30) 30mg 30	Ambroxol	viên	1,000.00
AMIO01	Amiodaron hydroclorid (Cordaron) 20	Amiodaron hydroclorid	viên	986.00
AMLO01	Amlodipin (Aldan Tablets 10mg) 10mg	Amlodipin	viên	992.00

Hình 2: Giao diện tồn kho

12. Xem HSBA BN

1. Sau khi vào màn hình “Phiếu kết quả XN”
2. Nhấn vào biểu tượng

Kết quả xét nghiệm

PHIẾU KẾT QUẢ

KQ Danh sách Tùy chọn KQ máy Tiện ích 0145 - CN. Lê Thị Hồng Ngọc

Hành chính:

Ngày LM: 05/11/2024 20 STT: 198156 Xem hồ sơ bệnh án

Mã BN: 24067923 Họ và tên: TH THU PHÍ NỘI TRÚ

