



MQ Solutions

Điện thoại: 091 449 77 46

Email: mqsoftvn@gmail.com

Website: mqsoft.vn

CĐHA

Khai báo sử dụng

Mục lục

Khai báo danh mục loại chẩn đoán hình ảnh.....	2
1. Vào màn hình khai báo “Loại chẩn đoán hình ảnh”	2
2. Khai báo loại chẩn đoán hình ảnh	4
3. Sửa loại chẩn đoán hình ảnh.....	4
Khai báo máy thực hiện.....	6
1. Vào màn hình khai báo “Máy thực hiện”	6
2. Khai báo máy thực hiện.....	8
3. Sửa máy thực hiện	8
Khai báo mẫu mô tả (Template)	9
1. Vào màn hình Khai báo mẫu CĐHA.....	9
2. Khai báo mẫu mô tả.....	10
3. Chỉnh sửa mẫu mô tả.....	12
4. Sử dụng mẫu mô tả đã khai báo	14

Khai báo danh mục loại chẩn đoán hình ảnh

1. Vào màn hình khai báo “Loại chẩn đoán hình ảnh”


1. Mở phần mềm MQ Main




2. Chọn vào phần Chẩn đoán hình ảnh (MQ RIS)



3. Nhập tài khoản, mật khẩu được cung cấp

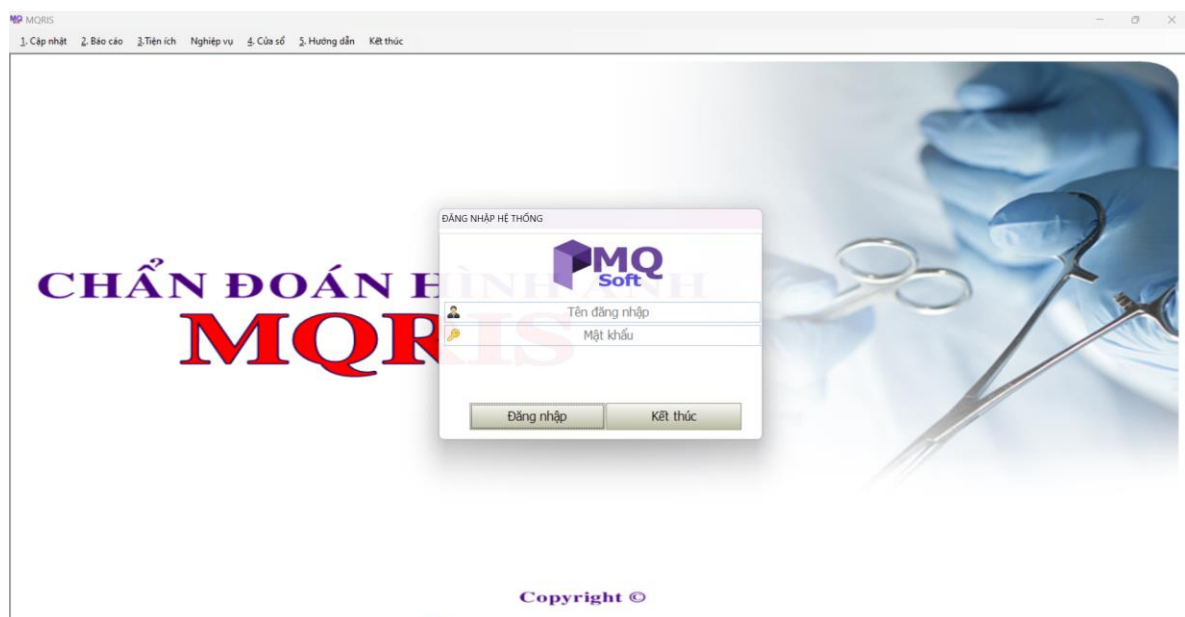

4. Vào “3. Tiện ích” → “Danh mục” → “Loại chẩn đoán hình ảnh”

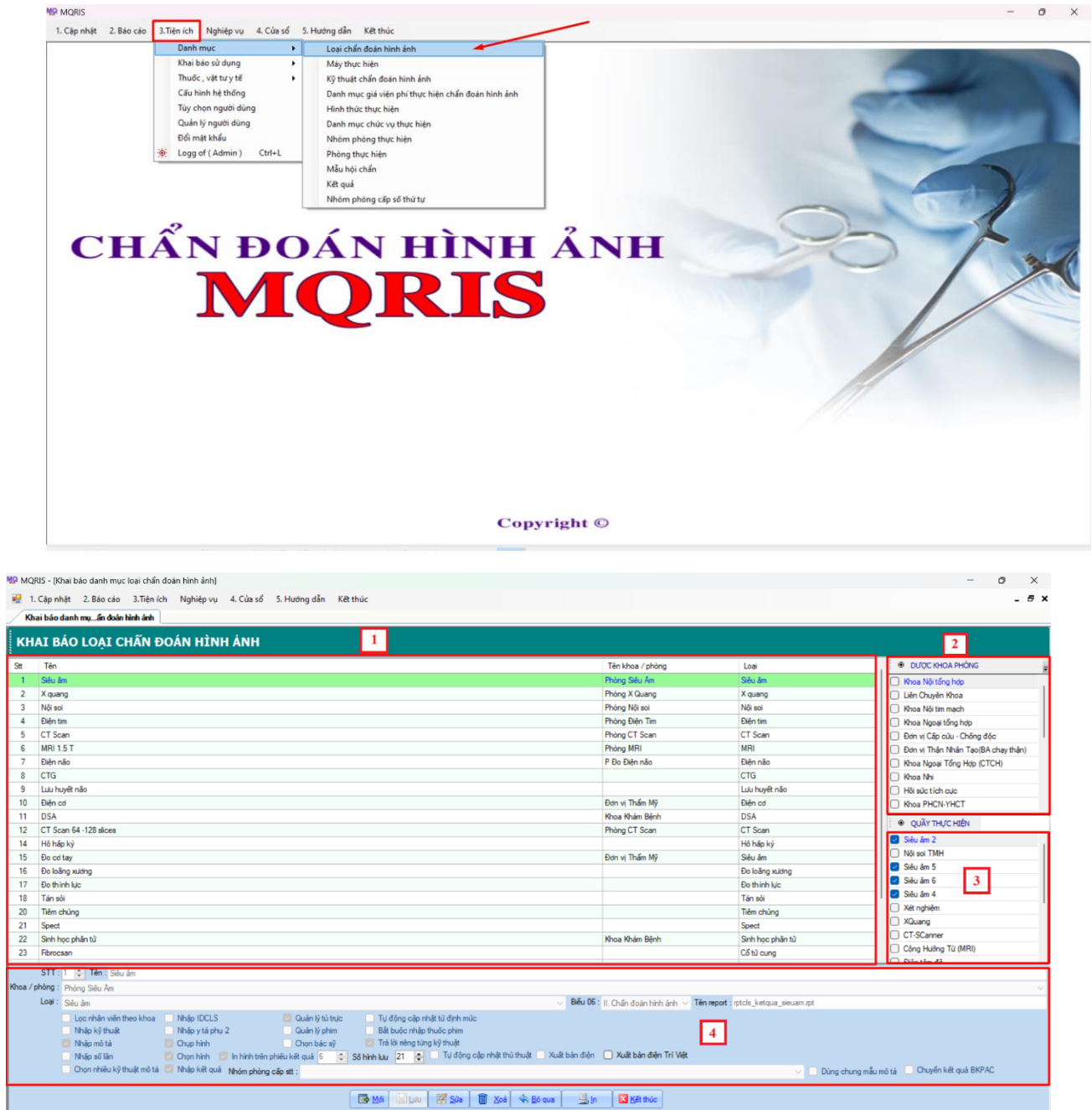

Hình 1: Màn hình khai báo "Loại chân đoán hình ảnh"

1. Danh sách các loại chẩn đoán hình ảnh
2. Dược khoa phòng
3. Quầy thực hiện
4. Thông tin và tùy chọn của loại chẩn đoán hình ảnh

2. Khai báo loại chẩn đoán hình ảnh

1. Nhấn “Mới” → Điền đầy đủ thông tin loại chẩn đoán hình ảnh: STT, Khoa/Phòng, ...
2. Tích các tùy chọn cần thiết (VD: chọn hình và chụp hình nếu mẫu báo cáo có hình)
3. Loại chẩn đoán hình ảnh đó sử dụng được của khoa phòng nào thì chọn (Khung số 2 đã tô đỏ). Không có thì không tích
4. Quay thực hiện
5. Lưu

Lưu ý:

- Ở phần “Tên report” liên hệ phòng IT để thiết kế report và cung cấp tên report
- Nếu có tích chọn “Chụp hình”, “Chọn hình” thì sẽ chọn được số lượng hình tối đa in trên report và số lượng hình tối đa lưu trên máy.

VD: Chụp CT

STT	Tên	Tên khoa / phòng	Loại
1	Siêu âm	Phòng Siêu Âm	Siêu âm
2	X quang	Phòng X Quang	X quang
3	Nội soi	Phòng Nội soi	Nội soi
4	Điện tim	Phòng Điện Tim	Điện tim
5	CT Scan	Phòng CT Scan	CT Scan
6	MRI 1.5 T	Phòng MRI	MRI
7	Điện não	P Đo Điện não	Điện não
8	CTG		CTG
9	Lưu huyết não		Lưu huyết não
10	Điện cơ	Đơn vị Thăm Mỹ	Điện cơ
11	DSA	Khoa Khám Bệnh	DSA
12	CT Scan 64-128 slices	Phòng CT Scan	CT Scan
14	Hô hấp ký		Hô hấp ký
15	Đo cơ tay	Đơn vị Thăm Mỹ	Siêu âm
16	Đo loãng xương		Đo loãng xương
17	Đo thành lực		Đo thành lực
18	Tân sỏi		Tân sỏi
20	Tiền chủng		Tiền chủng
21	Spect		Spect
22	Sinh học phân tử	Khoa Khám Bệnh	Sinh học phân tử
23	Fibroscan		Cố tử cung

- Dược khoa/phòng của phòng CT Scan
- Quầy thực hiện: CT-Scanner
- Do CT chụp hình bên ngoài nên không cần tích chụp, chọn hình trên report

3. Sửa loại chẩn đoán hình ảnh

1. Chọn loại chẩn đoán hình ảnh muốn chỉnh sửa trên danh sách

2. Nhấn “Sửa” → Chỉnh sửa thông tin cần thiết
3. Nhấn “Lưu”

Lưu ý:

- **Không sửa** “Tên Report” → Lỗi → Không thể in report

Ghi chú: Bấm “Bỏ qua” nếu không muốn lưu thông tin đã nhập hay sửa


Khai báo máy thực hiện

1. Vào màn hình khai báo “Máy thực hiện”


1. Mở phần mềm MQ Main




2. Chọn vào phần Chẩn đoán hình ảnh (MQ RIS)

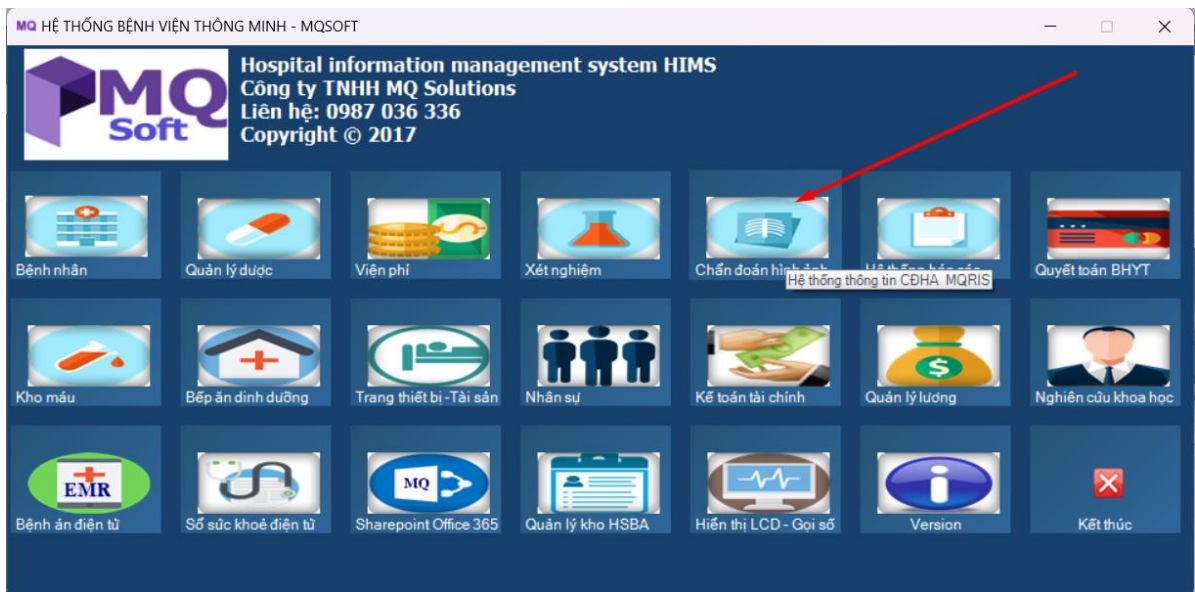


3. Nhập tài khoản, mật khẩu được cung cấp

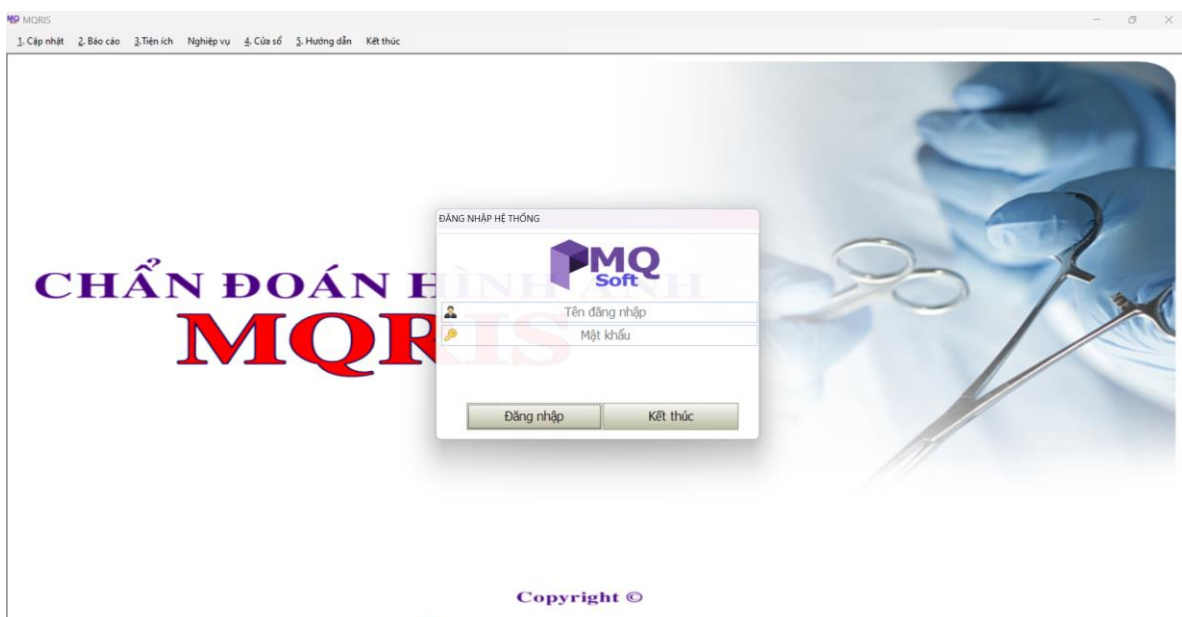

4. Vào “3. Tiện ích” → “Danh mục” → “Máy thực hiện”

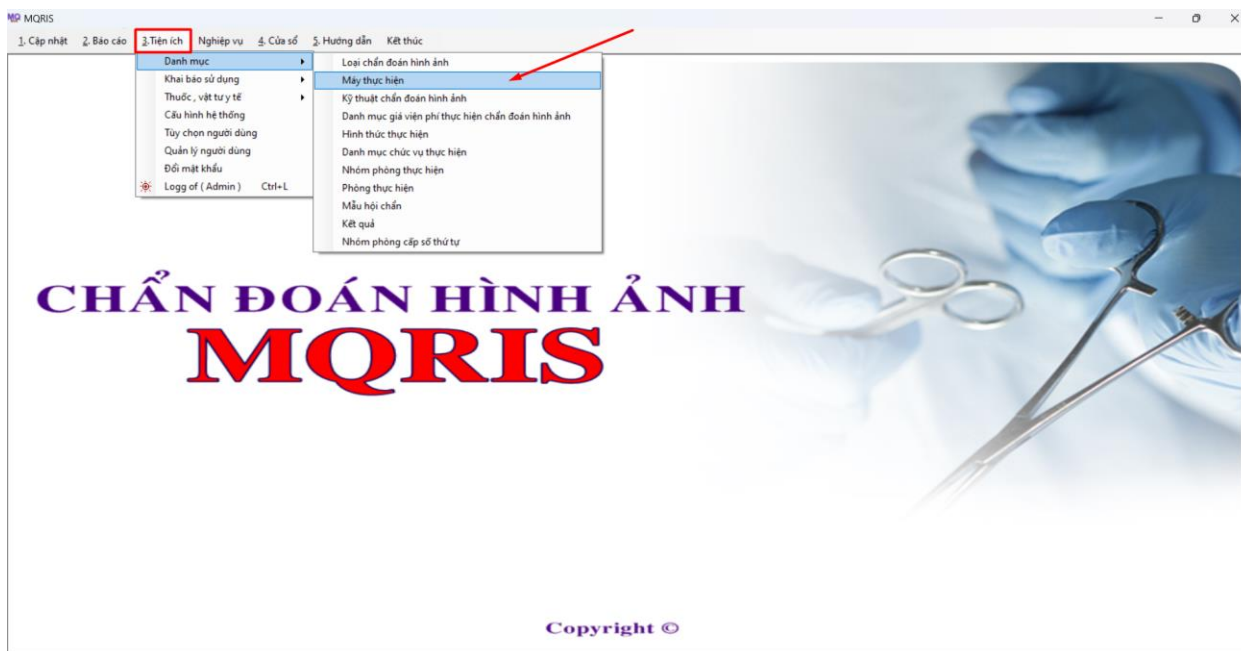

5. Chọn “Loại chẩn đoán hình ảnh” muốn khai báo máy → Nhấn “Chọn”

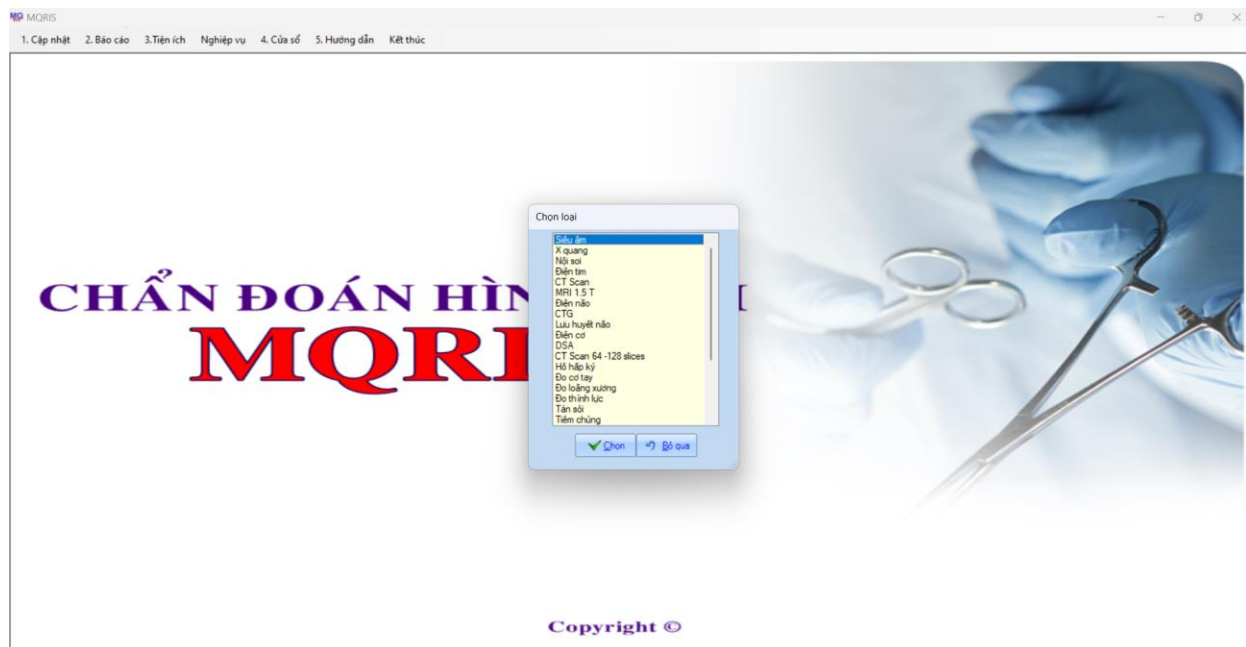

MQRIS - [Danh mục máy]

1. Cập nhật 2. Báo cáo 3. Tiện ích 4. Cửa sổ 5. Hướng dẫn 6. Kết thúc

Danh mục máy

KHAI BÁO MÁY CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

STT	Mã	Tên	Thời gian mang
Danh sách máy đã khai báo			
2	NS 2.64287.7215781	Hệ thống nội soi tiêu hóa OLYMPUS số 1	0
3	NS 2.64287.7215730	Hệ thống nội soi tiêu hóa OLYMPUS số 2	0
18	NS 2.64287.U2AZ309	Máy nội soi tại mũi họng số 1	0
43	NS 2.64287.U2AZ310	Máy nội soi tại mũi họng số 2	0
44	CTC 2.64287.203888R002	Máy soi cổ tử cung số 1	0
45	CTC 2.64287.203888C002	Máy soi cổ tử cung số 2	0
46	CTC 2.64287.203888C001	Máy soi cổ tử cung số 3	0

Khung nhập liệu thông tin

STT: 46 Mã máy: CTC 2.64287.203888C001 Thời gian mang: 0

Mã máy ↑ Tên máy ↑

Hình 2: Màn hình khai báo "Máy thực hiện"

2. Khai báo máy thực hiện

1. Nhấn “Mới” → Điền đầy đủ thông tin máy thực hiện: Mã máy và tên máy
2. Nhấn “Lưu”

3. Sửa máy thực hiện

1. Chọn máy thực hiện muốn chỉnh sửa trên danh sách
2. Nhấn “Sửa” → Chỉnh sửa thông tin cần thiết
3. Nhấn “Lưu”

Ghi chú: Bấm “Bỏ qua” nếu không muốn lưu thông tin đã nhập hay sửa

Khai báo mẫu mô tả (Template)

1. Vào màn hình Khai báo mẫu CĐHA


1. Mở phần mềm MQ Main




2. Chọn vào phần Chẩn đoán hình ảnh (MQ RIS)



3. Nhập tài khoản, mật khẩu được cung cấp

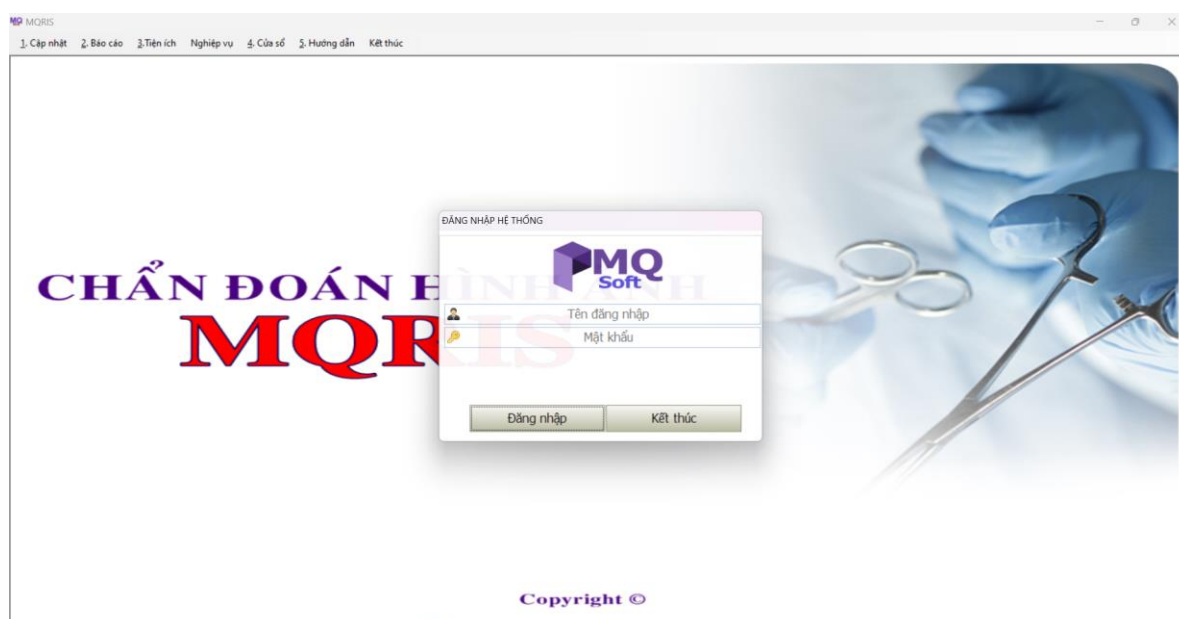



4. Vào “3. Tiện ích” → “Khai báo sử dụng” → “Mẫu 1 – Template”

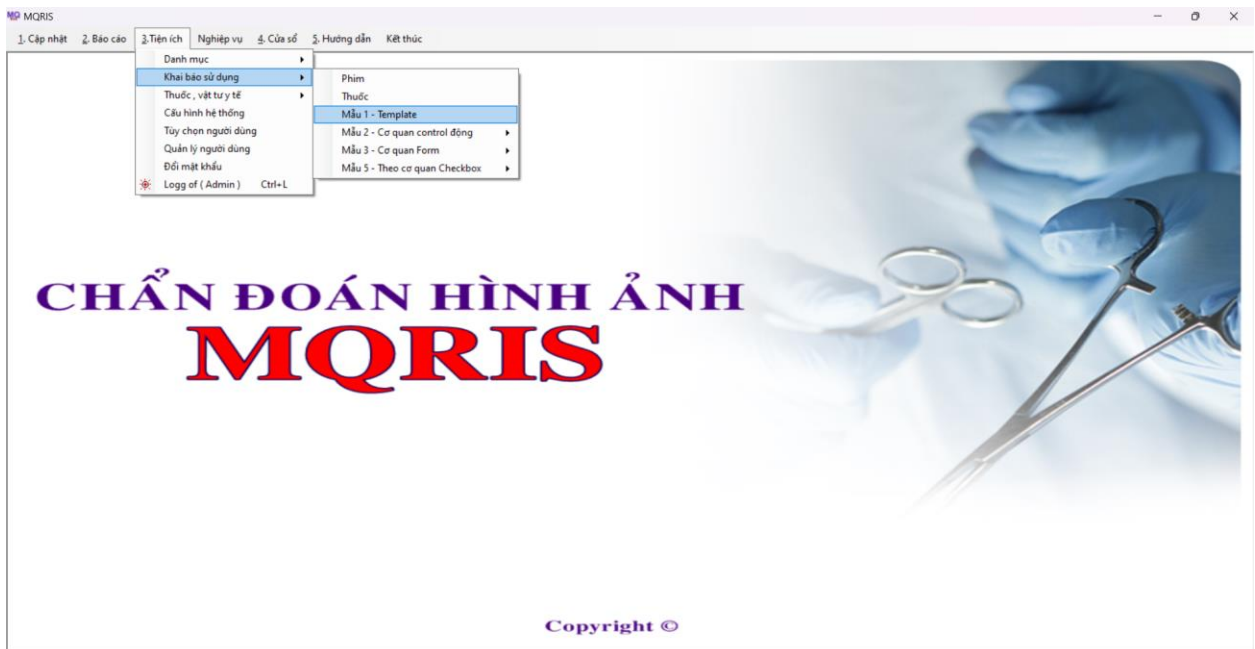

2. Khai báo mẫu mô tả


1. Chọn loại CDHA muốn khai báo mẫu mô tả → Nhấn “Chọn”

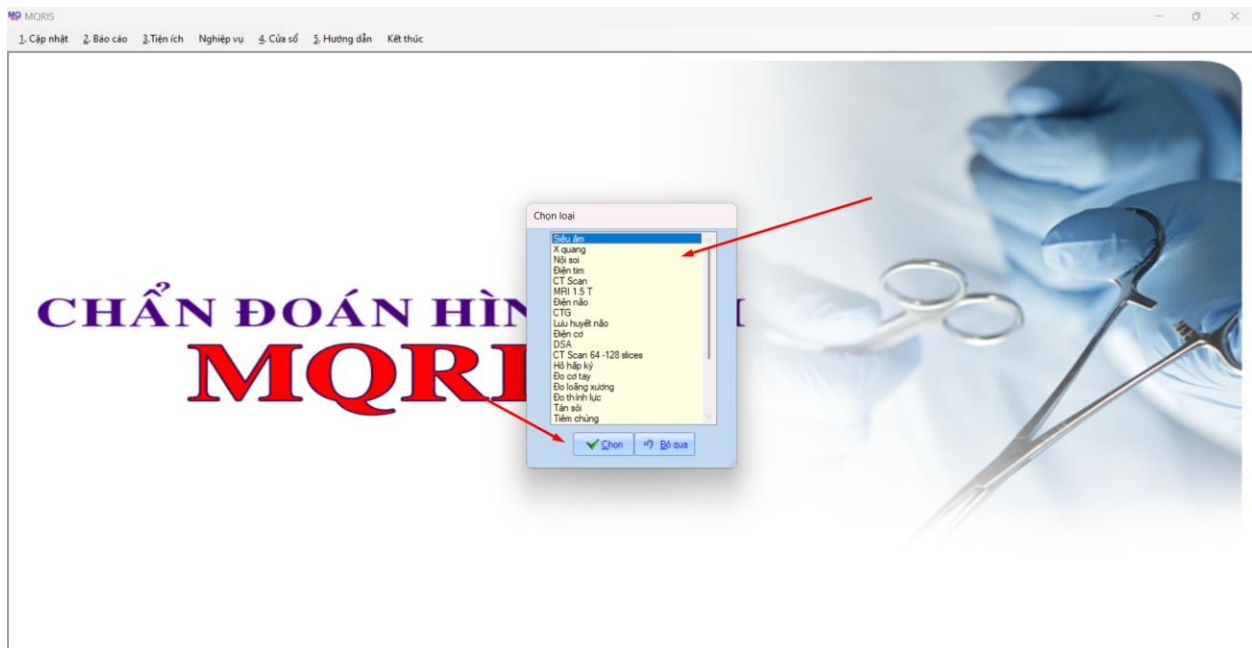

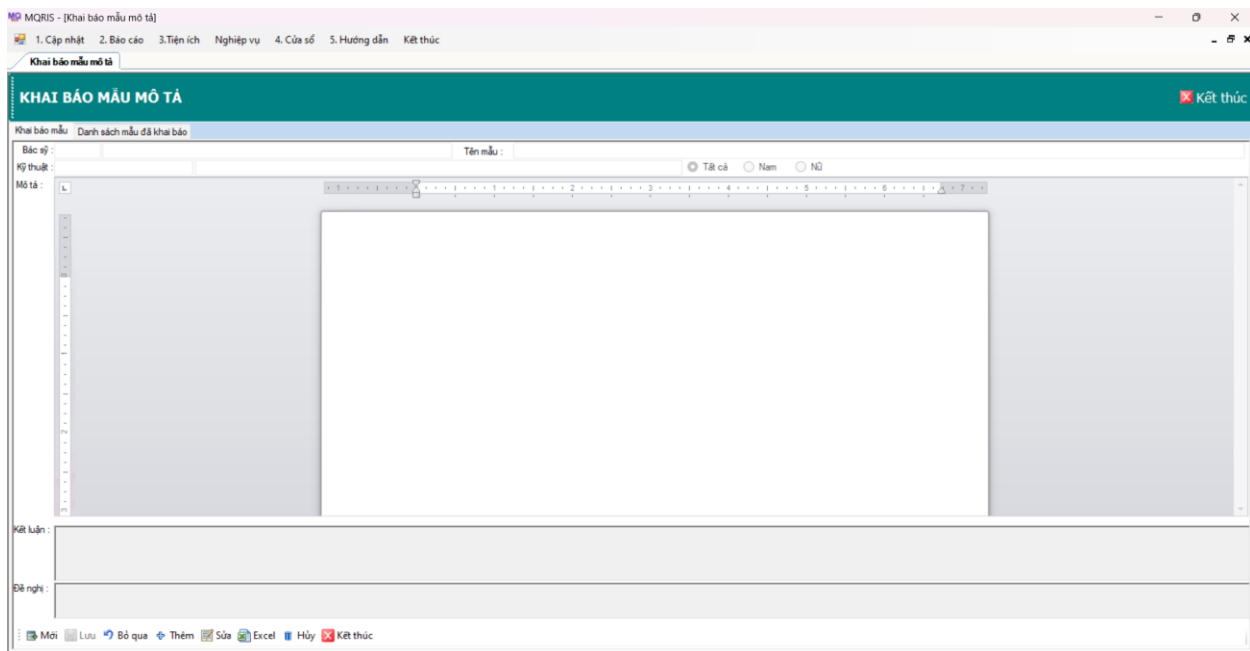

Hình 3: Màn hình khai báo mẫu mô tả

2. Nhấn “Mũi”

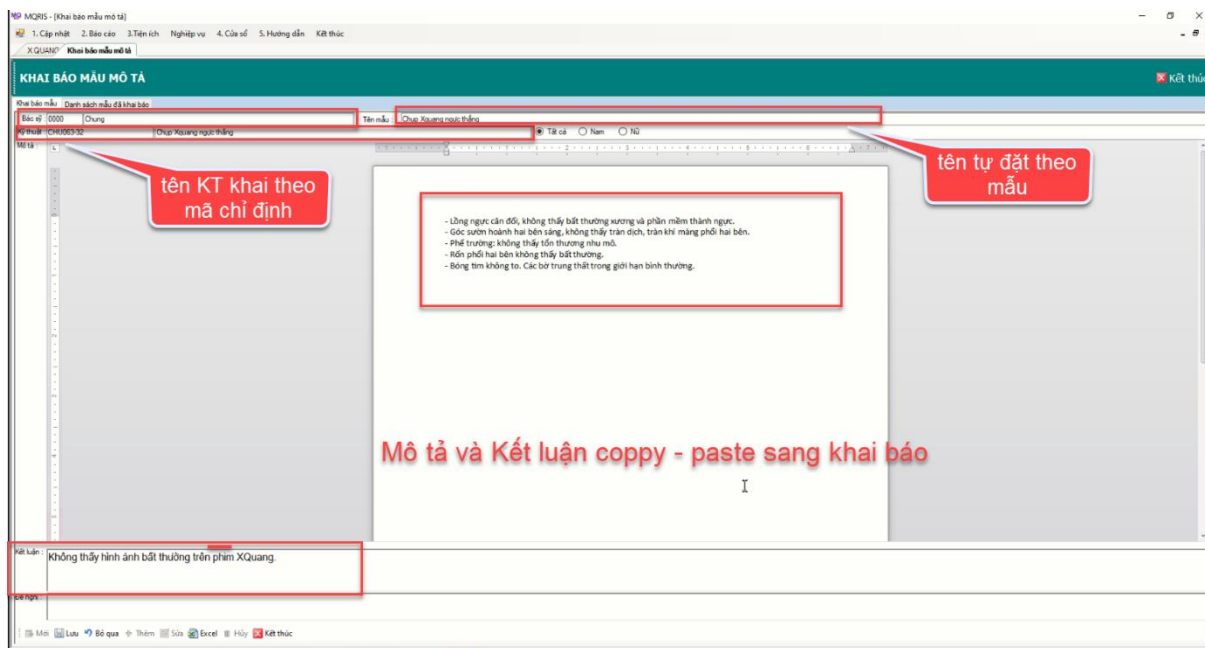


3. Chọn tên Bác sĩ sử dụng mẫu => Gõ “Chung” để dùng chung cho tất cả bác sĩ
4. Chọn kỹ thuật => Chọn đúng theo mã Kỹ thuật chỉ định phòng khám
5. Đặt tên mẫu theo ý muốn để phân biệt từng mẫu cho từng đối tượng
6. Chọn đối tượng “Tất cả”, “Nam”, “Nữ” để mẫu chỉ sử dụng riêng cho đối tượng đó

7. Nhấn “Lưu”

Ghi chú:

- Một kỹ thuật có thể có nhiều mẫu mô tả
- Mẫu mô tả nên có Kết luận. (Nên để mặc định “Không có phát hiện bất thường ...” hay chỉ cần “.” Để đầy công, nếu có thay đổi thì có thể chỉnh sửa khi đưa ra kết quả)
- Bấm “Bỏ qua” nếu không muốn lưu thông tin đã nhập

3. Chỉnh sửa mẫu mô tả

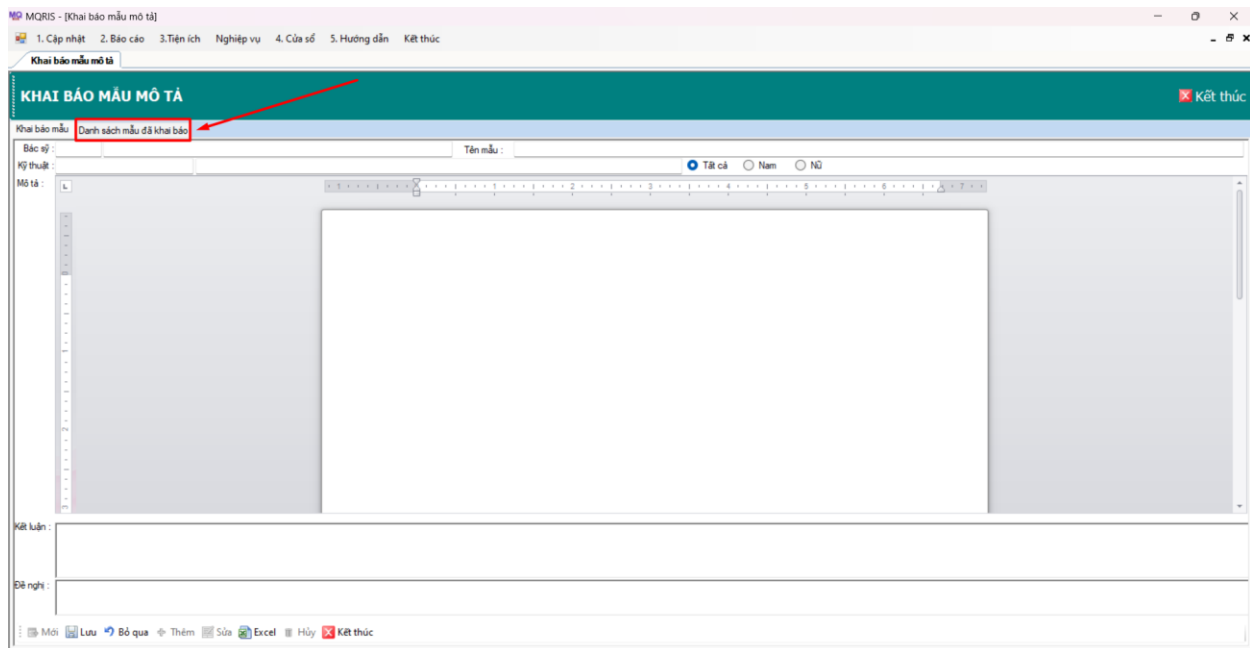

1. Ở màn hình “Khai báo mẫu” chọn “Danh sách mẫu đã khai”
2. Ở đây sẽ hiện ra danh sách mẫu mô tả đã khai, chọn mẫu mô tả muốn chỉnh sửa (nhấn 2 lần vào mẫu muốn chỉnh sửa)

MQSIS - [Khai báo mẫu mô tả]

1. Cập nhật 2. Báo cáo 3. Tiến ích Nghiệp vụ 4. Cửa sổ 5. Hướng dẫn Kết thúc

Khai báo mẫu mô tả

Khai báo mẫu Danh sách mẫu đã khai báo

Mã BS	Bác sỹ	Mã KT	Tên kỹ thuật	Tên mẫu
0000	Chung	GLCDHA461-3	Siêu âm Doppler tuyến vú	Siêu âm Doppler tuyến vú
0000	Chung	GLCDHA358-40	Siêu âm khớp gối, hông, khuỷu, cổ tay...)	Siêu âm khớp gối, hông, khuỷu, cổ tay...)
0000	Chung	GLCDHA454-65	Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung)	Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung)
0000	Chung	GLCDHA378-45	Siêu âm nhân cầu	Siêu âm nhân cầu (mắt trái)
0000	Chung	GLCDHA358-40	Siêu âm khớp gối, hông, khuỷu, cổ tay...)	Siêu âm khớp gối, hông, khuỷu, cổ tay...)
0400	Phan Thị Hồng Hà	GLCDHA461-3	Siêu âm Doppler tuyến vú	Siêu âm tuyến vú
0000	Chung	GLSIEUAM-71	Siêu âm tình hoàn hai bên	Siêu âm tình hoàn hai bên
0000	Chung	GLCDHA360-37	Siêu âm tuyến vú hai bên	Siêu âm tuyến vú hai bên
0000	Chung	GLCDHA366-55	Siêu âm các tuyến nước bọt	Siêu âm các tuyến nước bọt
0000	Chung	GLCDHA365-57	Siêu âm hạch vùng cổ	Siêu âm hạch vùng cổ
0000	Chung	GLCDHA374-56	Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt	Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt
0000	Chung	GLCDHA443-84	Siêu âm Doppler tim	Siêu âm tim mạch
0000	Chung	GLCDHA361-36	Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)	Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)
0191	Bà Đình Thị Mỹ Duyên	GLCDHA362-35	Siêu âm tuyến giáp	siêu âm giáp bà Duyên
0000	Chung	GLCDHA391-44	Siêu âm đàn hồi mô (gan, tuyến vú...)	Siêu âm đàn hồi mô (gan, tuyến vú...)
0000	Chung	GLCDHA378-45	Siêu âm nhân cầu	Siêu âm nhân cầu
0000	Chung	GLCDHA378-45	Siêu âm 3D/4D thai nhi (Siêu âm hình thái thai nhi)	Siêu âm 3D/4D thai nhi (Siêu âm hình thái thai nhi)
0000	Chung	CDHASA0002-8	Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới (tĩnh mạch)	Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới (tĩnh mạch)- TĨNH MẠCH
0000	Chung	CDHASA0001...	Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới (động mạch)	Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới (động mạch)- ĐỘNG MẠCH
0000	Chung	GLCDHA443-84	Siêu âm Doppler tim	Siêu âm động mạch cảnh 1
0000	Chung	GLCDHA424-48	Chọc hút tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm	Chọc hút tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm- TUYẾN VÚ
0000	Chung	GLCDHA358-40	Siêu âm khớp gối, hông, khuỷu, cổ tay...)	Siêu âm khớp gối, hông, khuỷu, cổ tay...)
0000	Chung	GLCDHA377-22	Siêu âm qua thóp	Siêu âm qua thóp
0000	Chung	GLCDHA386-95	Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu	Siêu âm độ mờ da gáy (NT)
0000	Chung	GLCDHA443-84	Siêu âm Doppler tim	KG SAT
0000	Chung	GLCDHA361-36	Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)	Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)- NAM
0000	Chung	GLCDHA361-36	Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)	Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)- NỮ
0000	Chung	GLCDHA360-37	Siêu âm tuyến vú hai bên	Siêu âm tuyến vú hai bên

3. Sau khi chọn, sẽ chuyển qua màn hình “Khai báo mẫu” → Nhấn “Sửa” → Tiến hành chỉnh sửa

MQSIS - [Khai báo mẫu mô tả]

1. Cập nhật 2. Báo cáo 3. Tiến ích Nghiệp vụ 4. Cửa sổ 5. Hướng dẫn Kết thúc

Khai báo mẫu mô tả

Khai báo mẫu Danh sách mẫu đã khai báo

Bác sỹ : 0000 Chung Tên mẫu : Siêu âm khớp gối, hông, khuỷu, cổ tay...)

Kỹ thuật : GLCDHA358-40 Siêu âm khớp gối, hông, khuỷu, cổ tay...)

Mô tả : L

KHỚP GỐI - BÀN CHÂN:

- Các xương cổ chân (mắt cá trong, ngoài, xương sên, xương gót và các xương nhỏ nhờ cổ chân): Không thấy hình ảnh mật liên tục vỏ xương. Không thấy hình ảnh gai xương.
- Khe khớp: Không thấy hình ảnh tràn dịch khớp.
- Dây chằng: Có hình thái, độ dày và cấu trúc âm bình thường:
 - Dây chằng bên ngoài: Dây chằng mắt gót, mắt sên trước và mắt sên sau.
 - Dây chằng bên trong (Deltoid)
 - Dây chằng chày mắt trước và sau dưới
- Gân Achilles: hình dạng, độ dày và cấu trúc âm bình thường.

Kết luận: HIỆN TẠI KHÔNG THẤY BẤT THƯỜNG TRÊN SIÊU ÂM KHỚP CỔ CHÂN

Đề nghị :

Mới Lưu Bỏ qua Thêm Sửa Excel Hủy Kết thúc

4. Sau khi chỉnh sửa xong → Nhấn “Lưu”

Ghi chú: Bấm “Bỏ qua” nếu không muốn lưu thông tin đã sửa

4. Sử dụng mẫu mô tả đã khai báo

1. Vào màn hình thực hiện kỹ thuật CDHA tương ứng

The screenshot shows the MQORIS software interface. The top menu bar includes options like '1. Cập nhật', '2. Báo cáo', '3. Tiến ích', '4. Cửa sổ', '5. Hướng dẫn', and 'Kết thúc'. The left sidebar contains a list of medical procedures and exams, including 'Tiếp nhận', 'Đọc kết quả', 'Siêu âm', 'Siêu âm - AForge.Controls', 'Siêu âm - DirectShow', 'Siêu âm - Video', 'Siêu âm - Camera Net', 'Nội soi', 'X quang', 'CT Scan', 'MRI', 'Điện tim', 'Điện não', 'Điện cơ', 'DSA', 'Hô hấp', 'Giải phẫu bệnh', 'Đo loãng xương', 'Sinh học phân tử', and 'Đo đáy mắt'. The main window displays the 'SIÊU ÂM' (Ultrasound) module. It includes a 'SEND REPORT PACS' button and a 'Tổng số ca: 0' (Total cases: 0) indicator. The patient information section shows 'Mã BN: 24067816', 'Họ và tên: BHYT CƠ BẢN', 'Tuổi: 36', 'Giới tính: Nam', and 'Địa chỉ: 134, Xã An Phú, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, 25'. The 'Ngày' (Date) is '02/11/2024 16:11'. The 'Bác sĩ' (Doctor) is 'Bà Hoàng Thị Thơm'. The 'Y tá' (Nurse) is 'Nguyễn Thị Song Nhân'. The 'Mẫu' (Sample) is 'Mẫu mới' (New sample) with 'ACC NO 0'. The 'Trình trạng' (Status) is 'Thường' (Normal). The 'Kỹ thuật' (Technique) is 'Máy siêu âm Tim mạch 4D 3' (4D 3 cardiac ultrasound machine). The 'Loại' (Type) is 'Thường' (Normal). The 'CD sơ bộ' (Preliminary CD) is empty. The 'Mô tả' (Description) field is empty. The 'Kết luận' (Conclusion) field is empty. The 'Đề nghị' (Request) field is empty. The bottom toolbar includes buttons for 'Mô tả' (Description), 'Mẫu mới' (New sample), 'Template', 'Mẫu khác' (Other sample), 'Thêm' (Add), 'Lưu' (Save), 'Sửa' (Edit), 'Hủy' (Cancel), 'Bỏ qua' (Skip), 'Nhập viện' (Admission), 'Thuốc vật tư' (Medicine and supplies), 'In' (Print), 'Xem' (View), 'In gần' (Print near), and 'Kết thúc' (End). A red arrow points to the 'Mô tả' button.

2. Thực hiện quy trình “Trả kết quả CDHA”
3. Tích vào ô “Mẫu mới”
4. Nhấn “Mô tả”

Ghi chú: Khi không muốn sử dụng mẫu mô tả đã khai báo vẫn phải nhấn “Mô tả” để nhập được nội dung vào mô tả, kết luận và đề nghị.

PACIFICCROSS