



MQ Solutions

Điện thoại: 091 449 77 46

Email: mqsoftvn@gmail.com

Website: mqsoft.vn

XÉT NGHIỆM Lấy mẫu bệnh phẩm

Mục lục

Lấy mẫu bệnh phẩm	2
1. Vào màn hình “Lấy mẫu bệnh phẩm”	2
2. Vào màn hình “Lấy mẫu bệnh phẩm” ở nội trú	4
3. Quy trình “Lấy mẫu bệnh phẩm”	6
4. Huỷ mẫu bệnh phẩm.....	7
5. Thêm XN trên cùng 1 mẫu bệnh phẩm	8
6. Lịch sử lấy mẫu	10
7. Sửa STT	11
8. Hẹn.....	11
9. Tiện ích (Xem tồn kho, tủ trực).....	12
9.1 Xem tồn tủ trực tổng hợp	12
9.2 Xem tồn kho tổng hợp.....	13

Lấy mẫu bệnh phẩm


Chức năng lấy mẫu bệnh phẩm giống như cấp số thứ tự bệnh phẩm cho từng BN, và khi trả kết quả thì không cần quan tâm họ tên của bệnh nhân mà chỉ quan tâm số thứ tự mẫu, số thứ tự mẫu này sẽ dùng để trả kết quả trên phần mềm cho BN .

1. Vào màn hình “Lấy mẫu bệnh phẩm”

1. Mở phần mềm MQ Main




2. Chọn vào phần Xét nghiệm (MQ LIS)

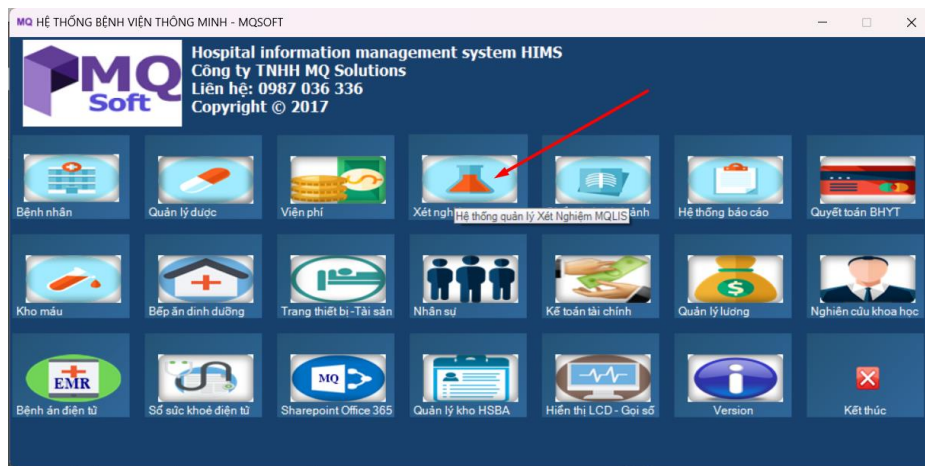

3. Nhập tài khoản, mật khẩu được cung cấp



4. Vào “A. Cập nhật” → “Lấy mẫu bệnh phẩm”

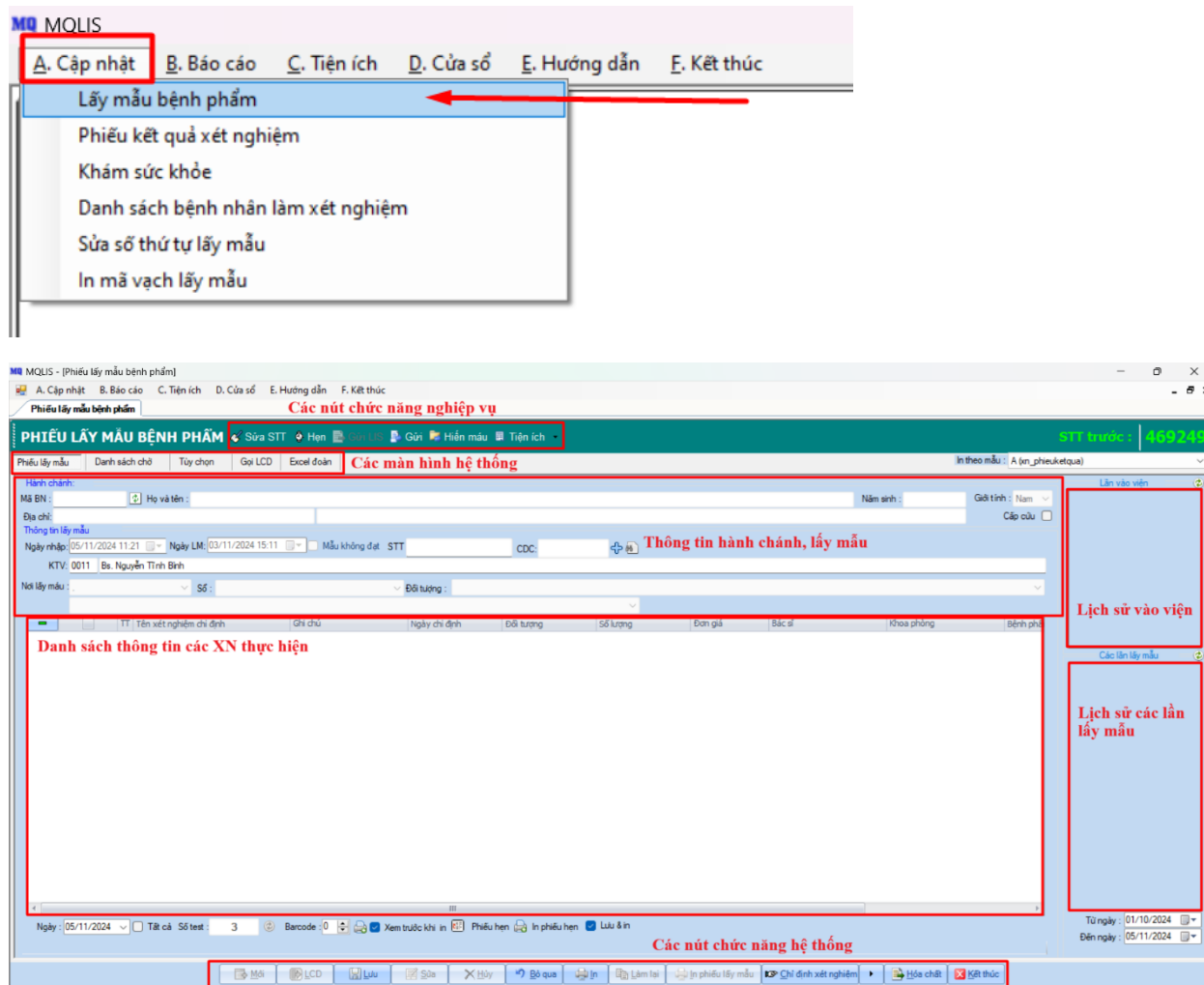

Hình 1: Màn hình "Lấy mẫu bệnh phẩm"

2. Vào màn hình “Lấy mẫu bệnh phẩm” ở nội trú


1. Mở phần mềm MQ Main




2. Chọn vào phần Bệnh nhân (MQ HIS)



3. Nhập tài khoản, mật khẩu được cung cấp

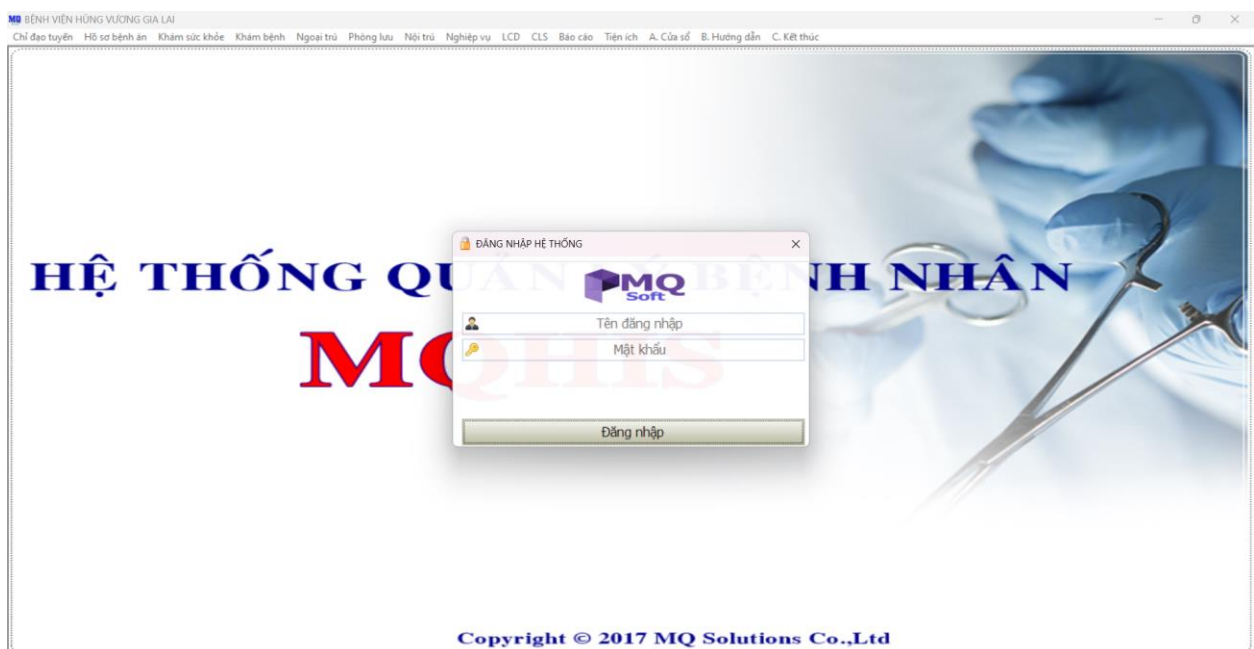

4. Vào “Nghệ vụ” → “Xét nghiệm” → “Lấy mẫu bệnh phẩm”

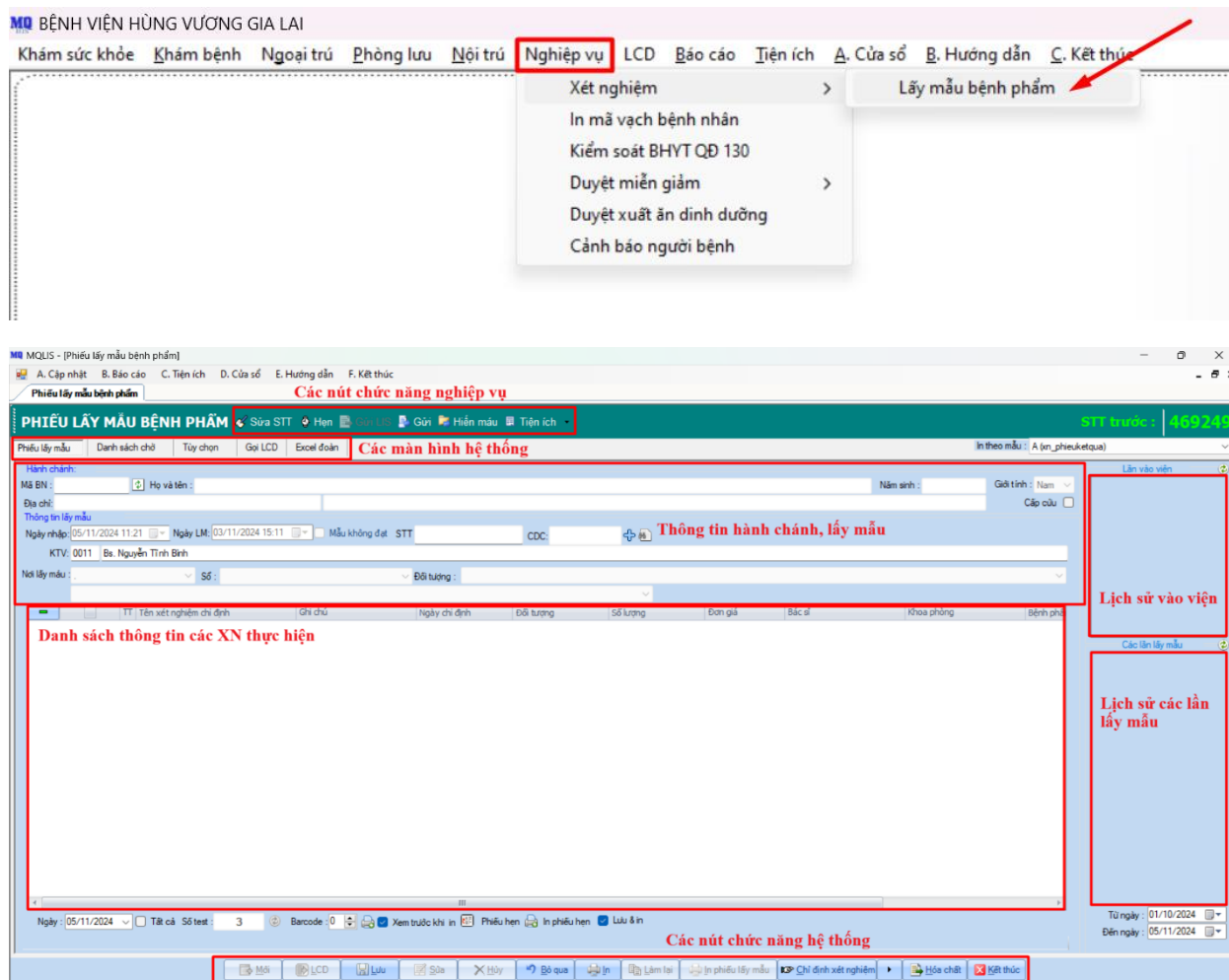

Hình 2: Màn hình "Lấy mẫu bệnh phẩm" nội trú

3. Quy trình “Lấy mẫu bệnh phẩm”

1. Sau khi vào màn hình “Lấy mẫu bệnh phẩm”
2. Gõ, quét mã BN có chỉ định thực hiện xét nghiệm vào ô mã BN hay tìm kiếm BN trong màn hình “Danh sách chờ”.

PHIẾU LẤY MẪU BỆNH PHẨM

Trạng thái: Chưa lấy mẫu, Đã lấy mẫu, Đã có kết quả

Xem

Danh sách chờ

Chọn trạng thái muốn xem (Chưa lấy, Đã lấy, Đã có kết quả) → Nhấn “Xem”

3. Chọn bệnh nhân đó (Nhấn 2 lần), màn hình sẽ chuyển sang màn hình “Phiếu lấy mẫu”.
4. STT tự động cấp cho BN ở ô số thứ tự → Nhấn “Lưu”.


PHIẾU LẤY MẪU BỆNH PHẨM

Mã BN: 24067907, Họ và tên: NGUYỄN VĂN A, Năm sinh: 2001

STT: 24067907

Lưu


- Đã ghi số thứ tự vừa cấp trong chương trình vào mẫu ống nghiệm bệnh phẩm. → In barcode → Nhấn vào biểu tượng  (Như hình trên)

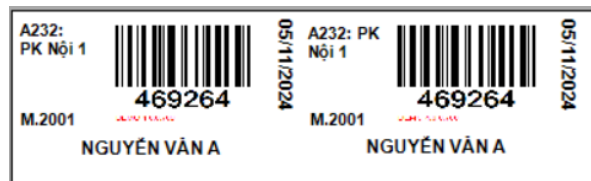

- Nhấn “Mới” để tiếp tục thực hiện BN mới và tuân tự theo quy trình

4. Huỷ mẫu bệnh phẩm

- Sau khi vào màn hình “Lấy mẫu bệnh phẩm”
- Gõ, quét mã BN đã lấy mẫu xét nghiệm muốn huỷ vào ô mã BN hay tìm kiếm BN trong màn hình “Danh sách chờ”. Ở “Danh sách chờ” chọn trạng thái “Đã lấy mẫu” → Nhấn “Xem”
- Chọn bệnh nhân đó (Nhấn 2 lần), màn hình sẽ chuyển sang màn hình “Phiếu lấy mẫu”.
- Nhấn “Huỷ” → Nhấn “Yes”

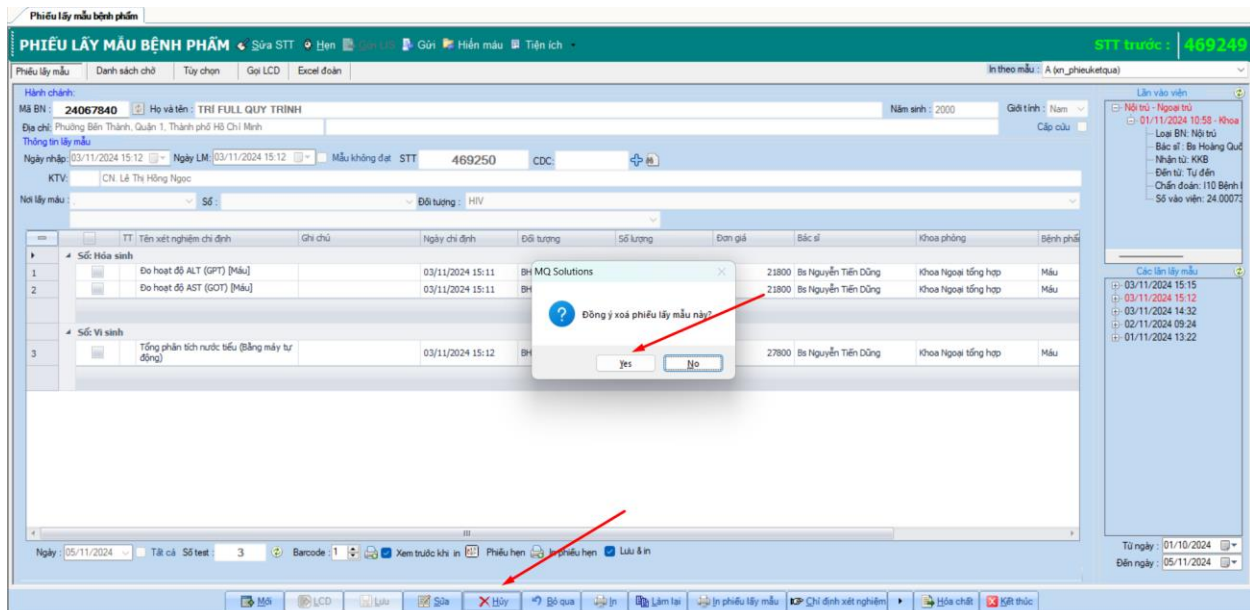

Lưu ý: BN đã có kết quả sẽ không huỷ được, phải thực hiện quy trình ngược: “Huỷ kết quả” → “Huỷ lấy mẫu”.

Ghi chú: Khi chọn BN ở màn hình “Danh sách chờ” trạng thái “Đã lấy mẫu” bao gồm cả các BN đã có kết quả, tránh để mất thời gian khi chọn vào BN xem “Tên XN và Thông số XN của BN” đã có kết quả chưa.

Phiếu lấy mẫu bệnh phẩm

PHIẾU LẤY MẪU BỆNH PHẨM Sửa STT Hủy Lưu Gỡ Hiển mẫu Tiện ích


Phẫu lấy mẫu: Danh sách chờ Tủy chọn Gọi LCD Excel đoàn In theo mẫu: A (m_pheuetqua)

Từ: 01/10/2024 Đến: 05/11/2024 Tin nhanh Tất cả Chưa lấy mẫu Đã lấy mẫu Đã có kết quả Xem 16

Ngày lấy mẫu	STT	Ngày kết quả	Mã BN	Họ và tên	Ngày sinh	Khoa / phòng	QR PAY	Đoàn	Phường/Xã	Mã số	Tên xét nghiệm	Đơn vị đo	Thành toán	Kết quả
01/11/2024 09:46	469212	03/11/2024 15:07	24067811	TRIS DANG	1996	Khoa Nội tổng hợp	0		Phường Hội Phú	001	Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (b...			
01/11/2024 13:22	469216		24067840	TRỊ FULL QUY TRÌNH	2000	Khoa Ngoại tổng hợp	0		Phường Bến Thành	GLHH...	Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (b...			4
01/11/2024 14:11	469221	03/11/2024 15:13	24910764	PHONG LUU HVGL 04 BHTN	2000	Khoa Ngoại tổng hợp			Phường Phú Đồng	GLHH...	Số lượng bạch cầu (WBC)	g/L		2
02/11/2024 09:23	469223		24067491	TEST PK NHẬP VIỆN	2002	Khoa Nội tim mạch	0		Phường Bến Nghé	GLHH...	Tỷ lệ % bạch cầu trung tính	%		4
02/11/2024 09:24	469224		24067840	TRỊ FULL QUY TRÌNH	2000	Khoa Ngoại tổng hợp	0		Phường Bến Thành	GLHH...	Tỷ lệ % bạch cầu lympho	%		3
02/11/2024 09:26	469225	03/11/2024 14:48	24910764	PHONG LUU HVGL 04 BHTN	2000	Khoa Ngoại tổng hợp	0		Phường Phú Đồng	GLHH...	Tỷ lệ % bạch cầu Mono	%		3
02/11/2024 17:21	469233		24067863	KHÁM THU PHÍ	1988	A232: PK Nội 1	0		Phường An Phú	GLHH...	Tỷ lệ % bạch cầu ái toan	%		3
02/11/2024 17:22	469234	02/11/2024 17:24	24910757	TRẦN NAM	2002	Khoa Nội tổng hợp	0		Phường Bến Nghé	GLHH...	Tỷ lệ % bạch cầu ái kiềm	%		3
02/11/2024 17:22	469235		24067543	TEST ĐÔNG KÝ	1999	Khoa Nội tổng hợp	0		Thị trấn Chu Phòng	GLHH...	Số lượng bạch cầu trung tính	g/L		3
03/11/2024 15:11	469249		24067876	BN XÉT NGHIỆM MẪU	1999	A257: PK Nội 2	0		Xã Bàu Cạn	GLHH...	Số lượng bạch cầu lympho	g/L		5
03/11/2024 15:12	469250		24067840	TRỊ FULL QUY TRÌNH	2000	Khoa Ngoại tổng hợp	0		Phường Bến Thành	GLHH...	Số lượng bạch cầu Mono	g/L		4
03/11/2024 15:15	469251		24067840	TRỊ FULL QUY TRÌNH	2000	Khoa Ngoại tổng hợp	0		Phường Bến Thành	GLHH...	Số lượng bạch cầu ái toan	g/L		3
03/11/2024 17:33	469254		24067877	TÊN CHỈ ĐỊNH XN	1999	A230: PK Nội tim mạch	0		Xã Bàu Cạn	GLHH...	Số lượng bạch cầu ái kiềm	g/L		5
04/11/2024 08:48	469256	04/11/2024 08:53	24067897	TRỊ TEST XÉT NGHIỆM	1999	Khoa Nội tim mạch	0		Phường Hội Thương	GLHH...	Số lượng hồng cầu (RBC)	T/L		2
05/11/2024 08:20	469259		24067923	TH THU PHÍ NỘI TRƯ	2000	Hội sức tích cực	0		Xã Bến Hồ	GLHH...	Lượng huyết sắc tố (Hb)	g/L		2
05/11/2024 11:27	469261		24067569	THU TIỀN	2004	A232: PK Nội 1	0		Phường Hội Phú	GLHH...	Thể tích khối hồng cầu (HCT)	%		3
										GLHH...	Thể tích trung bình hồng cầu (MCV)	fL		4
										GLHH...	Lượng Hb trung bình hồng cầu (MCH)	pg		2
										GLHH...	Nồng độ Hb trung bình hồng cầu(MC...	g/L		3
										GLHH...	Bộ phận bổ hồng cầu (RDW-CV)	%		4
										GLHH...	NRBC	g/L		4
										GLHH...	NRBC%	%		5
										GLHH...	Bộ phận bổ hồng cầu (RDW-SD)	fL		5
										GLHH...	Số lượng tiểu cầu (PLT)	g/L		4
										GLHH...	Thể tích trung bình tiểu cầu (MPV)	fL		5
										GLHH...	Bộ phận bổ tiểu cầu (PDW)	%		3
										GLHH...	Thể tích khối tiểu cầu (PCT)	%		3

Mã Gọi LCD Lưu Sửa Hủy Bỏ qua In Lưu lại In phiếu lấy mẫu Chỉ định xét nghiệm Tủy chọn Gỡ thử

Vì khi đã có kết quả sẽ không hủy được và có thông báo:

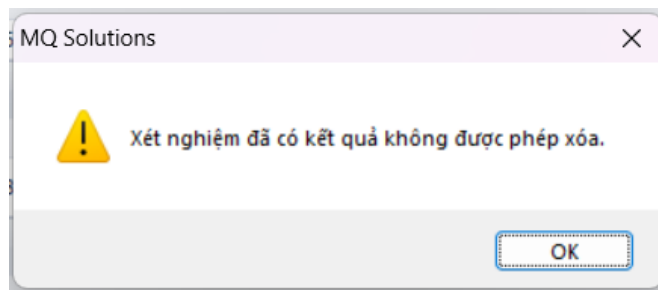

5. Thêm XN trên cùng 1 mẫu bệnh phẩm

Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm của BN, Bác sĩ cho thêm chỉ định XN và muốn thực hiện trên cùng 1 mẫu bệnh phẩm

1. Gỡ, quét mã BN đã lấy mẫu xét nghiệm muốn XN vào ô mã BN hay tìm kiếm BN trong màn hình “Danh sách chờ”. Ở “Danh sách chờ” chọn trạng thái “Đã lấy mẫu” → Nhấn “Xem”
2. Chọn bệnh nhân đó (Nhấn 2 lần), màn hình sẽ chuyển sang màn hình “Phiếu lấy mẫu” → Nhấn “Sửa”
3. Nhấn vào biểu tượng

PHIẾU LẤY MẪU BỆNH PHẨM

Sửa STT | Hủy | Gửi | Hiện mẫu | Tiện ích

STT trước: 469269

In theo mẫu: A (in_pheuketqua)

Hành chính:
 Mã BN: 24067840 | Họ và tên: TRI FULL QUY TRINH | Năm sinh: 2000 | Giới tính: Nam
 Địa chỉ: Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 Thông tin lấy mẫu:
 Ngày nhập: 01/11/2024 13:22 | Ngày LM: 01/11/2024 13:01 | Mẫu không đạt: STT: 469216 | CDC: |

KTV: CN. Nguyễn Hoàng Tung

Nơi lấy mẫu: | Số: | Đồ tượng: HIV

STT	TT	Tên xét nghiệm chi định	Ghi chú	Ngày chi định	Đồ tượng	Số lượng	Đơn giá	Bác sĩ	Khoa phòng	Bệnh phẩm
1		Số Hóa sinh								
1		Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]		01/11/2024 11:04	BHYT	1	21800	BSCXII Đặng Thanh Hải	Khoa Ngoại tổng hợp	Máu

Ngày: 05/11/2024 | Tất cả | Số test: 1 | Barcode: 1 | Xem trước khi in | Phiếu hen | In phiếu hen | Lưu & in

Mũi | LCD | Lưu | Sửa | Hủy | Bỏ qua | In | Làm lại | In phiếu lấy mẫu | Chỉ định xét nghiệm | Hủy chốt | Kết thúc

4. Tích chọn XN muốn thực hiện trên cùng 1 bệnh phẩm → Nhấn “Chọn”

CHỌN XÉT NGHIỆM

1. Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]
 2. Định lượng Creatinin [Nước]
 3. Định lượng Glucose [Máu]

☒ Chọn ☐ Bỏ qua

5. Nhấn “Lưu”

Ghi chú: Những XN nào không được tích chọn có thể thực hiện lại theo quy trình “Lấy mẫu bệnh phẩm” khác, STT khác, mẫu bệnh phẩm khác.

PHIẾU LẤY MẪU BỆNH PHẨM Sửa STT Hien Gửi Hiển mẫu Tien ich

STT trước: 469269

Phieu lay mau Danh sach cho Tuy chon Gai LCD Excel doan In theo mau A (in_pheuetqua)

Hanh chinh: Mã BN: 24067840 Họ và tên: TRI FULL QUY TRINH Năm sinh: 2000 Giới tính: Nam Cấp cứu: ☐

Địa chỉ: Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin lấy mẫu: Ngày nhập: 01/11/2024 13:22 Ngày LM: 01/11/2024 13:01 Mẫu không đạt: STT: 469216 CDC: KTV: CN. Nguyễn Hoàng Tung Nơi lấy mẫu: Số: Đối tượng: HIV

Số	Tên xét nghiệm chỉ định	Ghi chú	Ngày chỉ định	Đối tượng	Số lượng	Đơn giá	Bác sĩ	Khoa phòng	Bệnh phẩm
1	Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]		01/11/2024 11:04	BHVT	1	21800	BSCKII Đặng Thanh Hải	Khoa Ngoại tổng hợp	Máu
2	Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] [Kiểm theo]		03/11/2024 15:38	BHVT		21800	Bs Nguyễn Tiến Dũng	Khoa Ngoại tổng hợp	Máu
3	Định lượng Creatinin [Nước] [Kiểm theo]		03/11/2024 15:38	BHVT		16400	Bs Nguyễn Tiến Dũng	Khoa Ngoại tổng hợp	Máu
4	Định lượng Glucose [Máu] [Kiểm theo]		03/11/2024 15:38	BHVT		21800	Bs Nguyễn Tiến Dũng	Khoa Ngoại tổng hợp	Máu

Ngày: 05/11/2024 Tất cả Số test: 4 Barcode: 1 Xem trước khi in Phiếu hen In phiếu hen Lưu & in

Mở LCD Lưu Sửa X hủy Bỏ qua In Lưu lại In phiếu lấy mẫu KP Chỉ định xét nghiệm Hô chất SBT thực

6. Lịch sử lấy mẫu

Ở màn hình “Phiếu lấy mẫu” sau khi nhập mã BN, sẽ hiển thị các thông tin số lần vào viện và các lần lấy mẫu của BN bên phải màn hình, chia theo từng đợt, trong cùng 1 ngày có thể lấy mẫu nhiều lần và mỗi lần riêng lẻ với nhau. Nhấn vào để xem chi tiết.

Tuỳ chọn ngày tháng để xem được lịch sử vào viện và lấy mẫu

PHIẾU LẤY MẪU BỆNH PHẨM Sửa STT Hien Gửi Hiển mẫu Tien ich

STT trước: 469269

Phieu lay mau Danh sach cho Tuy chon Gai LCD Excel doan In theo mau A (in_pheuetqua)

Hanh chinh: Mã BN: 24067840 Họ và tên: TRI FULL QUY TRINH Năm sinh: 2000 Giới tính: Nam Cấp cứu: ☐

Địa chỉ: Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin lấy mẫu: Ngày nhập: 05/11/2024 16:20 Ngày LM: 01/11/2024 09:43 Mẫu không đạt: STT: CDC: KTV: BS Hà Văn Minh Nơi lấy mẫu: Số: Đối tượng:

Số	Tên xét nghiệm chỉ định	Ghi chú	Ngày chỉ định	Đối tượng	Số lượng	Đơn giá	Bác sĩ	Khoa phòng	Bệnh phẩm
----	-------------------------	---------	---------------	-----------	----------	---------	--------	------------	-----------

Ngày: 05/11/2024 Tất cả Số test: 0 Barcode: 1 Xem trước khi in Phiếu hen In phiếu hen Lưu & in

Mở LCD Lưu Sửa X hủy Bỏ qua In Lưu lại In phiếu lấy mẫu KP Chỉ định xét nghiệm Hô chất SBT thực

Số lần vào viện

- 01/11/2024 10:58 - Khoa

Các lần lấy mẫu

- 03/11/2024 15:15
- 03/11/2024 15:12
- 03/11/2024 14:32
- Ngày lấy mẫu: 03/11/2024
- Ngày kết quả: 03/11/2024
- Nhân viên lấy mẫu: Admin
- Nhân viên thực hiện: Admin
- Ghi chú:
- Nhận xét:
- Kết luận:
- Đề nghị:
- 02/11/2024 09:24
- 01/11/2024 13:22

Số lần lấy mẫu

Chọn ngày xem lịch sử vào viện và lấy mẫu

Từ ngày: 01/10/2024 Đến ngày: 05/11/2024

Nhấn vào icon để làm mới lịch sử vào viện và lấy mẫu

Lần vào viện


- Nội trú - Ngoại trú
- 01/11/2024 10:58 - Khoa

Các lần lấy mẫu


- 03/11/2024 15:15
- 03/11/2024 15:12
- 03/11/2024 14:32

7. Sửa STT

1. Ở màn hình “Lấy mẫu bệnh phẩm” → Nhấn “Sửa STT”

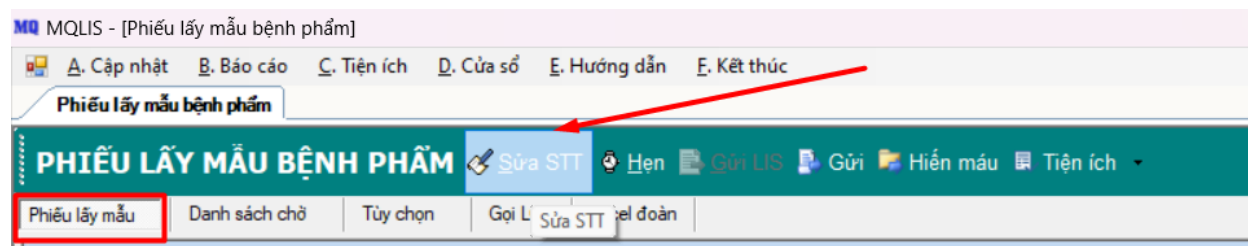

2. Chọn trạng thái “Đã lấy mẫu” hay “Đã thực hiện” → Nhấn “Xem”

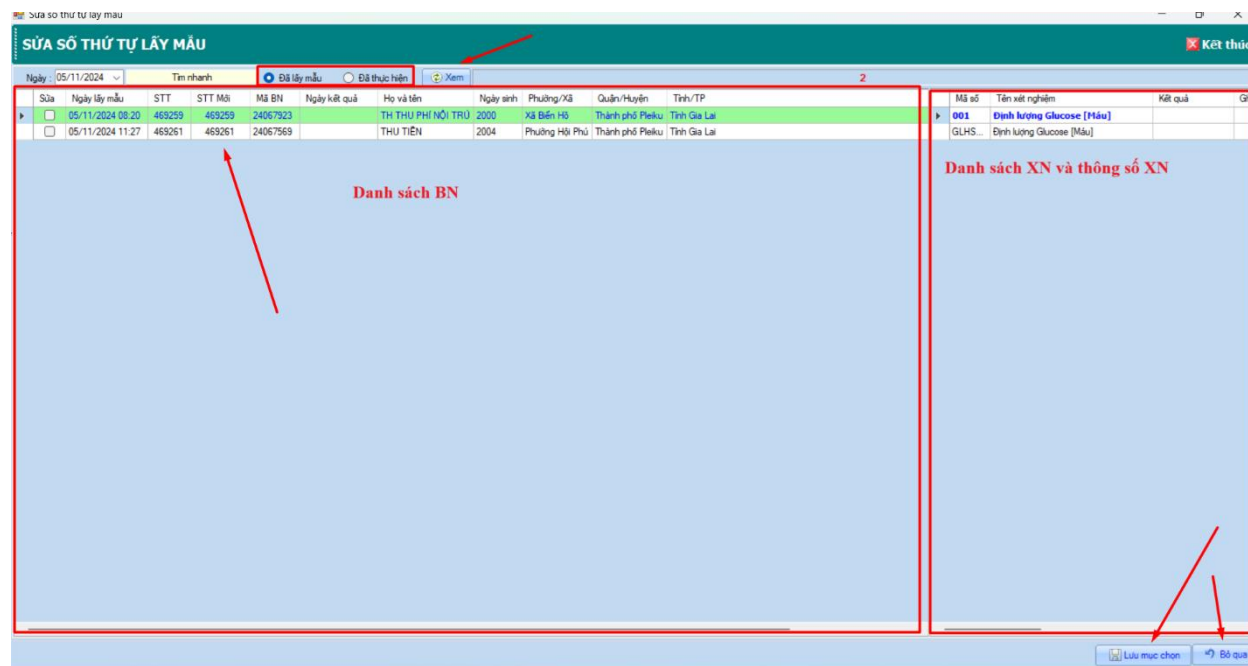

Hình 2: Màn hình sửa STT

3. Chọn BN muốn sửa trên danh sách BN → Sửa STT ở cột “STT Mới”




4. Nhấn “Lưu mục chọn”

Ghi chú: Bấm “Bỏ qua” nếu không muốn lưu thông tin đã sửa

8. Hẹn

1. Ở màn hình “Lấy mẫu bệnh phẩm” → Nhấn “Hẹn”

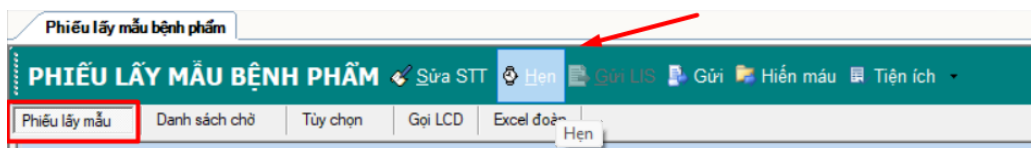


2. Chọn số ngày muốn hẹn (có thể thay đổi đơn vị ngày, tuần và tháng)
3. Nhấn “Lưu”

9. Tiện ích (Xem tồn kho, tử trực)

9.1 Xem tồn tử trực tổng hợp

1. Ở màn hình “Lấy mẫu bệnh phẩm” → Chọn “Tiện ích” → Nhấn “Xem tồn tử trực tổng hợp”

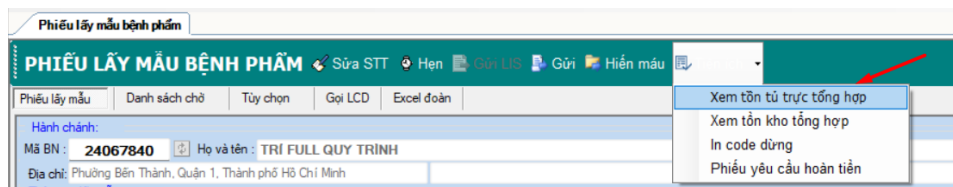


2. Có thể xem tồn theo tháng, năm đã chọn tương ứng

Kho	Mã số	Tên	Hoạt chất	DVT	Tôn đầu	Nhập	Xuất	Tôn cuối	Hãng sản xuất	Khoa
Kho Nội trú	ACET01	Acetazolamid (Acetazolamid) 250mg 2	Acetazolamid	viên	100.00	0.00	1.00	99.00	Công ty cổ phần dược phẩm	Khoa Nội tổng hợp
Kho Nội trú	ADEN01	Adenosin triphosphat (BFS-Adenosin)	Adenosin triphosphat	lọ	99.10	0.00	1.00	98.10	Công ty Cổ phần Dược phẩm	Khoa Nội tổng hợp
Kho Nội trú	AMOX01	Amoxicilin (Moxilen 500mg) 500mg 50	Amoxicilin	viên	100.00	0.00	1.00	99.00	Medochemie Ltd-Factory B	Khoa Nội tổng hợp

9.2 Xem tồn kho tổng hợp

1. Ở màn hình “Lấy mẫu bệnh phẩm” → Chọn “Tiện ích” → Nhấn “Xem tồn kho tổng hợp”
2. Chọn tháng, năm và kho tương ứng muốn xem

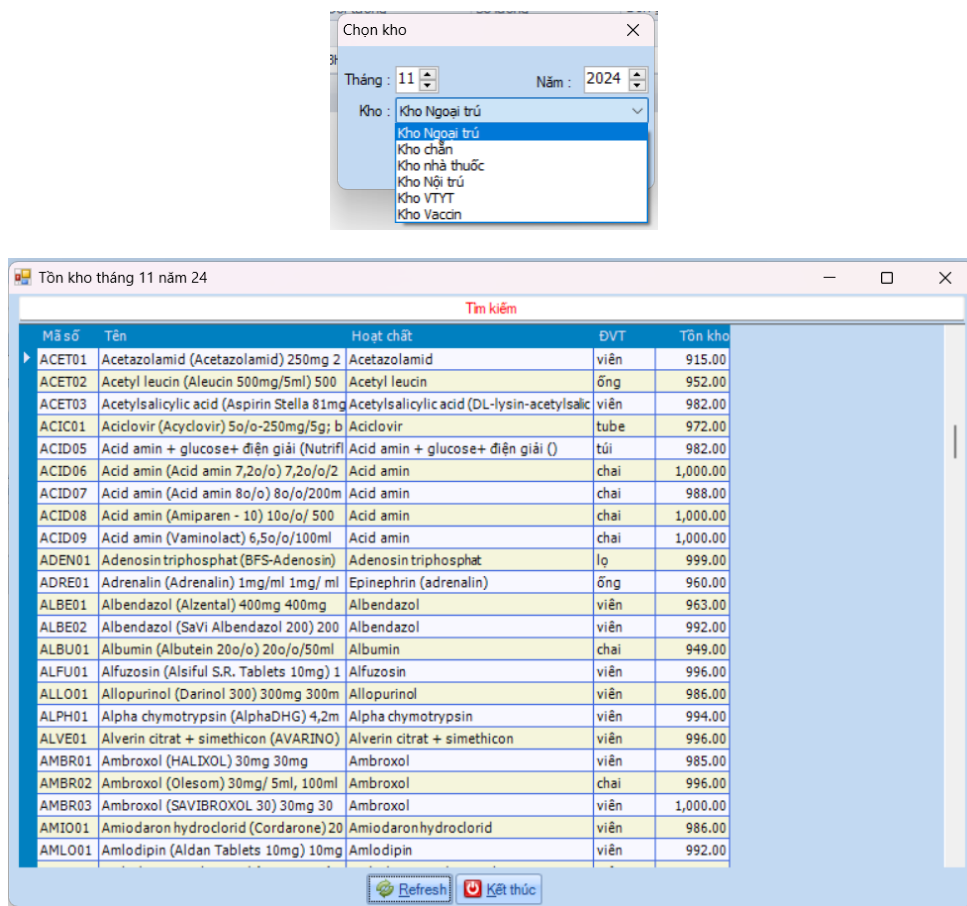

Hình 3: Giao diện tồn kho